



UNIVERSIDAD DE CARABOBO  
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología  
Departamento de Computación

**SOFTWARE PARA EL ESPECTROFOTÓMETRO MINISCAN  
XE PLUS USADO EN EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS  
DERMATOLÓGICAS EN PACIENTES. CASO DE ESTUDIO:  
CIMBUC.**

**Autor:**  
Gabriel A. Núñez N.

**Tutores:**  
Prof. Patricia Guerrero  
Prof. Harold Vasquez

Naguanagua, Diciembre de 2015.



UNIVERSIDAD DE CARABOBO  
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología  
Departamento de Computación

**SOFTWARE PARA EL ESPECTROFOTÓMETRO MINISCAN  
XE PLUS USADO EN EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS  
DERMATOLÓGICAS EN PACIENTES. CASO DE ESTUDIO:  
CIMBUC.**

**Autor:**  
Gabriel A. Núñez N.

**Tutores:**  
Prof. Patricia Guerrero  
Prof. Harold Vasquez

Trabajo Especial de Grado presentado ante la ilustre Universidad de Carabobo,  
como credencial para optar por el título de Licenciado en Computación.

Naguanagua, Diciembre de 2015.

# Dedicatoria

A mi abuela, quien me crió desde mis cuatro meses de vida, y a quien llamo mamá desde que tengo uso de la razón. Este trabajo es para ti, representa la culminación de una etapa donde estuviste presente día a día, gracias por el ánimo, los consejos y los valores que me has inculcado, por haberme enseñado que con Dios de la mano todo se puede, por haber salido adelante conmigo, por haberme hecho el hombre de bien que soy hoy, por todos los sacrificios que hiciste en silencio, y más que nada por todo el amor que has brindado. Te amo mamá.

**Gabriel A. Núñez N.**

# Agradecimientos

A Dios, por acompañarme en todo momento, por ser mi mejor maestro, y por haberme ayudado a alcanzar esta meta, la culminación de mi carrera.

A mi familia, por apoyarme en todo momento, por estar presente para celebrar los logros, compartir la alegría y superar las dificultades.

A mi novia y a mis amigos, quienes me ayudaron a tomar las cosas con calma, a despejar mi mente innumerables veces, a apreciar los problemas desde distintos ángulos, y a darme el ánimo necesario para terminar este largo trayecto a tiempo.

A mi profesora Patricia, por haberme ayudado y aconsejado desde el primero hasta el último día de este recorrido, y haberme mostrado que siempre se pueden mejorar las cosas.

A mi profesor Harold, por saber cuándo exigirme más, ser justo, y mostrarme el nivel de excelencia que puedo alcanzar, a pesar de la distancia.

Al equipo de profesores e investigadores que hace vida en el CIMPUC, por haberme brindado una experiencia única al trabajar con ellos.

A la empresa HunterLab, por haber respondido todas mis dudas, por haberme proporcionado la ayuda que necesité y mucho más.

**Gabriel A. Núñez N.**



UNIVERSIDAD DE CARABOBO  
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología  
Departamento de Computación

**SOFTWARE PARA EL ESPECTROFOTÓMETRO MINISCAN XE PLUS USADO EN EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS EN PACIENTES. CASO DE ESTUDIO: CIMBUC.**

**Resumen**

El espectrofotómetro de reflexión difusa, denominado MiniScan XE Plus, es un instrumento de medición utilizado por el Centro de Investigaciones Médicas y Biotecnológicas de la Universidad de Carabobo (CIMBUC), que ayuda a los médicos dermatólogos a establecer diagnósticos sobre patologías en la piel de pacientes, de manera precisa y sin necesidad de realizar biopsias. No obstante, el software comercial disponible para la utilización de tal instrumento es poco amigable, difícil de utilizar, e imposible de modificar y extender. Se desarrolló un software amigable, modificable y extensible, y se realizaron pruebas que determinaron que dicho software se ajusta a las necesidades de los dermatólogos, garantizando un mejor aprovechamiento del instrumento en cuestión.

**Palabras claves:** espectrofotómetro de reflexión difusa, MiniScan XE Plus, análisis bioquímico de la piel, desarrollo de software, mantenibilidad y usabilidad.

**Autor:**

Gabriel A. Núñez N.

**Tutores:**

Prof. Patricia Guerrero  
Prof. Harold Vasquez

# Índice general

<b>Introducción</b>	<b>8</b>
<b>I. El Problema</b>	<b>10</b>
1.1. Planteamiento del problema . . . . .	10
1.2. Objetivos . . . . .	13
1.2.1. Objetivo general . . . . .	13
1.2.2. Objetivos específicos . . . . .	13
1.3. Justificación de la investigación . . . . .	14
<b>II. Marco Teórico</b>	<b>16</b>
2.1. Antecedentes . . . . .	16
2.1.1. Antecedentes de la investigación . . . . .	16
2.1.2. Observación directa . . . . .	17
2.2. Bases teóricas . . . . .	18
2.2.1. Espectroscopía de reflectancia difusa . . . . .	18
2.2.2. Absorbancia aparente . . . . .	19
2.2.3. Iluminante estándar D65 . . . . .	19
2.2.4. Observador estándar de 10 grados . . . . .	21

## Índice general

---

2.2.5. Coordenadas de cromaticidad CIE xyz . . . . .	23
2.2.6. Coordenadas del espacio CIELAB . . . . .	25
2.2.7. Coeficiente de absorción . . . . .	27
2.2.8. Índice de eritema . . . . .	28
<b>III. Marco Metodológico</b>	<b>29</b>
3.1. Metodología de investigación . . . . .	29
3.1.1. Investigación-Acción . . . . .	29
3.2. Metodología de desarrollo de software . . . . .	31
3.2.1. SCRUM . . . . .	32
3.2.2. Artefactos de RUP utilizados . . . . .	35
<b>IV. Resultados</b>	<b>37</b>
4.1. Fases metodológicas . . . . .	37
4.1.1. Visión . . . . .	37
4.1.2. Pila del producto ( <i>product backlog</i> ) . . . . .	40
4.1.3. Requerimientos no funcionales . . . . .	41
4.1.4. Casos de uso . . . . .	42
4.1.5. Glosario . . . . .	47
4.2. Base de datos . . . . .	49
4.2.1. Diagrama ER de la base de datos . . . . .	49
4.2.2. Descripción de las tablas de la base de datos . . . . .	49
4.3. Tecnologías y recursos utilizados . . . . .	50
4.3.1. Tecnologías . . . . .	50
4.3.2. Recursos . . . . .	51

## Índice general

---

4.4. Comunicación con el MiniScan XE Plus . . . . .	53
4.5. Fórmulas implementadas . . . . .	54
4.6. Interfaz del software . . . . .	60
4.7. Manuales . . . . .	62
4.8. Pruebas realizadas . . . . .	62
4.8.1. Cálculo de los valores triestímulo CIE XYZ . . . . .	63
4.8.2. Realización de las mediciones . . . . .	63
4.8.3. Cálculo de las fórmulas restantes . . . . .	64
4.9. Colores utilizados en el software . . . . .	65
<b>V. Conclusiones y recomendaciones</b>	<b>66</b>
5.1. Conclusiones . . . . .	66
5.2. Recomendaciones . . . . .	68
<b>Referencias</b>	<b>69</b>
<b>Anexos</b>	<b>72</b>
<b>A. Manual de instalación</b>	<b>73</b>
<b>B. Manual de usuario</b>	<b>99</b>
<b>C. Manual del desarrollador</b>	<b>127</b>
3.1. Requerimientos del sistema . . . . .	127
<b>D. Guiones de prueba</b>	<b>130</b>
<b>E. Pruebas de aceptación</b>	<b>141</b>

Índice general

<b>F. Constancias de pruebas de aceptación</b>	<b>145</b>
<b>G. Pruebas de usabilidad: Evaluación heurística</b>	<b>147</b>
<b>H. Protocolo de respaldo y recuperación de la base de datos</b>	<b>153</b>

# Índice de figuras

2.1.	HunterLab Universal Software . . . . .	17
2.2.	Representación gráfica del iluminante estándar D65 . . . . .	21
2.3.	Representación gráfica del observador de 10 grados . . . . .	23
3.1.	Carácter cíclico de la Investigación-Acción . . . . .	30
3.2.	Configuración de los artefactos a utilizar de SCRUM y RUP . .	36
4.1.	Caso de uso: operar el MiniScan XE Plus . . . . .	42
4.2.	Caso de uso: gestionar medición . . . . .	42
4.3.	Caso de uso: gestionar sesión de usuario . . . . .	43
4.4.	Caso de uso: gestionar historia . . . . .	43
4.5.	Caso de uso: gestionar muestra . . . . .	44
4.6.	Caso de uso: gestionar usuario . . . . .	44
4.7.	Caso de uso general . . . . .	45
4.8.	Diagrama ER de la base de datos . . . . .	49
4.9.	MiniScan XE Plus . . . . .	52
4.10.	Ventana principal . . . . .	60
4.11.	Inicio de sesión . . . . .	60
4.12.	Curva de reflectancia . . . . .	61

## Índice de figuras

4.13. Historia médica de un paciente . . . . .	61
4.14. Medición del HunterLab Universal Software . . . . .	64
4.15. Medición del Spectrasoft . . . . .	64

# Índice de tablas

1.1.	Atributos esenciales de un software de calidad . . . . .	15
2.1.	Valores del iluminante D65 . . . . .	20
2.2.	Valores del observador de 10 grados . . . . .	22
3.1.	Actividades del proyecto según la Investigación-Acción . . . . .	31
3.2.	Principios de los métodos ágiles . . . . .	32
4.1.	Actores del negocio . . . . .	38
4.2.	Actores del software . . . . .	38
4.3.	Beneficios y características principales del producto . . . . .	39
4.4.	Requerimientos funcionales del software . . . . .	40
4.5.	Requerimientos no funcionales del software . . . . .	41
4.6.	Verificación de los valores triestímulo CIE XYZ . . . . .	63

# Introducción

La espectroscopía de reflectancia difusa es una técnica óptica con la cual es posible estudiar las propiedades bioquímicas y las condiciones estructurales de un tejido biológico. Los instrumentos que emplean técnicas como ésta son de gran ayuda para los dermatólogos, razón por la cual tales instrumentos han tomado suma importancia en el área de la medicina dermatológica.

El Centro de Investigaciones Médicas y Biotecnológicas de la Universidad de Carabobo (CIMBUC) dispone de un espectrofotómetro de reflexión difusa denominado MiniScan XE Plus. Este instrumento se utiliza a través del único software disponible para su manejo, designado HunterLab Universal Software.

El HunterLab Universal Software es un software comercial y privativo que fue descontinuado en el año 2008. Su interfaz gráfica de usuario está en inglés y contiene más funciones de las necesarias para manejar el instrumento en estudio, lo que lo hace poco amigable y difícil de entender por los dermatólogos.

Esta investigación se centró en desarrollar un software amigable, modificable y extensible para la utilización del MiniScan XE Plus, ajustándose a las necesidades de los dermatólogos, a fin de sentar una base que permite la realización de nuevas investigaciones que conlleven a la implementación de técnicas que empleen análisis más complejos, y como resultado, diagnósticos más completos y diversos sobre patologías dermatológicas presentes en pacientes.

El presente trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos, los cuales son descritos a continuación.

El **capítulo I** describe el contexto de la problemática que motiva el desarrollo de este trabajo de investigación, se indican los objetivos a cumplir con el mismo y se explican las razones que justifican la necesidad de su realización.

En el **capítulo II** se presentan los trabajos que anteceden esta investigación, las observaciones directas realizadas para llevarla a cabo, y se explican las bases teóricas que sustentan el desarrollo de las funciones que debe ofrecer el software producto de la misma.

En el **capítulo III** se describen la metodología de investigación y la metodología de desarrollo que se emplearon para planificar, diseñar y desarrollar el software propuesto en el presente trabajo de investigación.

El **capítulo IV** muestra los resultados que fueron alcanzados en el desarrollo del presente trabajo de investigación, incluyendo las fases metodológicas, las tecnologías y los recursos utilizados, la interfaz gráfica de usuario del software resultante y las pruebas realizadas.

Finalmente, en el **capítulo V** se establecen las conclusiones a las que se llegó con el presente trabajo de investigación, y las recomendaciones para trabajos futuros, tomando en cuenta dichas conclusiones.

# **Capítulo I**

## **El Problema**

### **1.1. Planteamiento del problema**

El color y la apariencia de la piel humana son importantes en el campo de la medicina. Durante el diagnóstico de enfermedades de la piel, la observación cuidadosa y la evaluación visual del área afectada es siempre el primer paso, y el más importante. Esto es seguido generalmente por una escisión o biopsia por punción, en la que se extrae una muestra de tejido de la piel para un análisis microscópico. La observación visual suele ser subjetiva, y los pacientes a menudo se someten a cicatrices y dolor durante la biopsia. Por otro lado, las técnicas ópticas son por lo general no invasivas y sus resultados son a menudo objetivos (Bersha, 2010).

Los avances tecnológicos de la actualidad permiten emplear técnicas de óptica, capaces de estudiar las propiedades estructurales y bioquímicas del tejido biológico de manera precisa y no invasiva. Los instrumentos que emplean tales técnicas son de gran ayuda para los dermatólogos, razón por la cual dichos instrumentos han tomado suma importancia en el área de la medicina dermatológica.

Hoy en día existen diferentes tipos de estudios ópticos in-situ, in-vivo e invitro del tejido biológico, como lo es la espectroscopía de reflectancia difusa (ERD). Pérez (2012) asegura que con esta técnica es posible estudiar las propiedades bioquímicas y las condiciones estructurales de un tejido biológico, analizando la interacción luz-tejido de una manera no invasiva.

En este sentido, el Centro de Investigaciones Médicas y Biotecnológicas de la Universidad de Carabobo (CIMBUC) dispone de un espectrofotómetro de reflexión difusa, denominado MiniScan XE Plus. Este dispositivo fue creado por la empresa HunterLab, la cual lo describe como un instrumento que aplica la técnica de ERD, utilizado para medir la reflectancia de especímenes como una función de longitud de onda.

Ahora bien, el CIMBUC hace uso de este instrumento a través del único software disponible para su utilización, designado HunterLab Universal Software. Éste es un software comercial y privativo capaz de ejecutarse en sistemas operativos Windows, desde la versión 95 hasta la versión XP. Dicho software contiene funciones que abarcan la utilización del MiniScan XE Plus y de otros instrumentos ofrecidos por HunterLab; su interfaz gráfica de usuario está en inglés, además de que los resultados que genera no poseen el formato de gestión de información de pacientes con el que trabajan los dermatólogos del CIMBUC. Por último, este software fue descontinuado en el año 2008.

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se tiene que el HunterLab Universal Software es privativo y está descontinuado, por lo tanto no existe la posibilidad de modificarlo ni de extenderlo. Dicho software está en inglés y ofrece funciones ajenas al uso exclusivo del MiniScan XE Plus, causando que su interfaz gráfica de usuario contenga más opciones de las necesarias para manejar tal instrumento, y que sea difícil de entender por los dermatólogos. Todo esto sumado al hecho de que los resultados generados por este software deben exportarse y almacenarse manualmente, porque los mismos no poseen el formato con el que trabajan los dermatólogos, produce la necesidad de contar

con asistencia técnica especializada para su debida utilización y ralentiza las consultas con los pacientes.

De lo antedicho se desprende que el HunterLab Universal Software posee una interfaz gráfica de usuario poco amigable, y el costo del tiempo de capacitación para su uso correcto podría ser alto. Dicho software no podrá modificarse ni extenderse, por lo tanto no se fomentará el uso del instrumento en cuestión, disminuyendo su potencial. El formato de los resultados de este software convertirá las consultas de los dermatólogos con los pacientes en una labor ineficiente en términos de tiempo. Por último, no se fomentará el desarrollo de nuevas funciones que utilicen los resultados de dicho software como insumo, sosegando así la posibilidad de realizar análisis más complejos, y de proveer resultados que les permitan a los dermatólogos establecer diagnósticos más completos sobre patologías dermatológicas en pacientes.

Motivado por lo anterior, se desarrolló un software modifiable y extensible, con una interfaz gráfica de usuario amigable, con funciones para el uso exclusivo del MiniScan XE Plus, que genera resultados relevantes para los dermatólogos empleando el formato utilizado por ellos para registrar las consultas con los pacientes, y siguiendo los lineamientos de la ingeniería del software pertinentes.

Finalmente, con esta investigación se espera fomentar la utilización del MiniScan XE Plus, reducir el tiempo de las consultas con los pacientes, aportar un software sobre el que se puedan desarrollar nuevas investigaciones que conlleven a análisis más complejos, y por último, realizar diagnósticos más completos y diversos sobre patologías dermatológicas presentes en pacientes.

## 1.2. Objetivos

### 1.2.1. Objetivo general

Desarrollar un software para el espectrofotómetro MiniScan XE Plus, usado en el diagnóstico de patologías dermatológicas en pacientes, tomando como caso de estudio el CIMBUC.

### 1.2.2. Objetivos específicos

- Investigar el estado del arte relacionado a la investigación: técnicas de óptica y colorimetría, MiniScan XE Plus, HunterLab Universal Software y atributos de calidad del software.
- Seleccionar una metodología de investigación y una metodología de desarrollo para el nuevo software.
- Desarrollar el software, siguiendo las metodologías seleccionadas.
- Realizar las pruebas de funcionalidad y usabilidad al software.
- Elaborar los manuales de usuario y de instalación del software.

### 1.3. Justificación de la investigación

Empezando con la interfaz gráfica de usuario, Sommerville (2005) señala que el diseño cuidadoso de la misma es una parte fundamental del proceso de diseño general del software. Si un software debe alcanzar su potencial máximo, es fundamental que su interfaz gráfica de usuario sea diseñada para ajustarse a las habilidades, experiencia y expectativas de sus usuarios previstos. Un buen diseño de la interfaz gráfica de usuario es crítico para la confiabilidad del software. Muchos de los llamados errores de usuario son causados porque las interfaces gráficas de usuario no consideran las habilidades de los usuarios reales y su entorno de trabajo.

Dicho lo anterior, el diseño de la interfaz gráfica de usuario del HunterLab Universal Software es la principal razón por la cual los dermatólogos requieren de personal técnico especializado que los asista al momento de utilizarlo. Esto porque dicha interfaz está en inglés, ofrece funciones que no son necesarias para la utilización del MiniScan XE Plus y sus resultados no poseen un formato adecuado. Por estas razones los dermatólogos perciben este software comercial como no intuitivo, ni auto descriptivo ni amigable, temiendo cometer errores al utilizarlo sin asistencia y generar resultados erróneos, poniendo en riesgo la fiabilidad del diagnóstico y, en consecuencia, la salud de los pacientes.

Con respecto a software de calidad, Sommerville (2005) explica lo siguiente: así como los servicios que proveen, los productos de software tienen un cierto número de atributos asociados que reflejan su calidad. Estos atributos no están directamente relacionados con lo que hace el software; más bien, reflejan su comportamiento durante su ejecución, en la estructura y la organización del programa fuente y en la documentación asociada.

El conjunto específico de atributos que se esperan de un software de calidad depende obviamente de su aplicación. En la tabla 1.1 se puede apreciar la generalización de estos atributos.

Tabla 1.1: *Atributos esenciales de un software de calidad* (Fuente: Sommerville, 2005).

<b>Característica</b>	<b>Descripción</b>
<b>Mantenibilidad</b>	El software debe describirse de tal forma que pueda evolucionar para cumplir las necesidades de cambio de los clientes. Éste es un atributo crítico, debido a que el cambio en el software es una consecuencia inevitable de un cambio en el entorno de negocios.
<b>Confiabilidad</b>	Este atributo tiene un gran número de características, incluyendo la fiabilidad, la protección y la seguridad. El software confiable no debe causar daños físicos o económicos en caso de que ocurra una falla del sistema.
<b>Eficiencia</b>	El software no debe hacer que se malgasten los recursos del sistema, como la memoria y los ciclos de procesamiento. Por lo tanto, la eficiencia incluye tiempos de respuesta y de procesamiento, utilización de la memoria, etcétera.
<b>Usabilidad</b>	El software debe ser fácil de utilizar, sin esfuerzo adicional por parte del usuario para quien está diseñado. Esto significa que debe tener una interfaz gráfica de usuario apropiada, y una documentación adecuada.

Debido a que el HunterLab Universal Software es privativo, el CIMBUC no dispone de su código fuente, de manera que este software no puede modificarse ni adaptarse a necesidades específicas, y por lo tanto, no posee el primer atributo esencial para un software de calidad: la mantenibilidad. Por la misma razón, no se puede determinar con certidumbre el segundo atributo: la confiabilidad. Por último, la usabilidad de este software es baja, ya que la interfaz gráfica de usuario es poco amigable.

Las razones descritas anteriormente justifican la necesidad del desarrollo de un software para el uso del MiniScan XE Plus que sea amigable, modificable, extensible y que cumpla con los atributos esenciales de calidad; que emplee el formato de historia médica con el que trabajan dermatólogos, y que ofrezca las funciones que ellos necesitan para realizar análisis y establecer diagnósticos de patologías dermatológicas en pacientes. Por último, se ha tomado como caso de estudio el CIMBUC.

# **Capítulo II**

## **Marco Teórico**

### **2.1. Antecedentes**

#### **2.1.1. Antecedentes de la investigación**

En el artículo científico titulado «*Comparing Quantitative Measures of Erythema, Pigmentation and Skin Response using Reflectometry*», realizado por Wagner, Jovel, Norton, Parra, y Shriver (2002), en la Universidad del Estado de Pensilvania, Estados Unidos, y publicado por Pigment Cell Res, se obtiene el índice de eritema, que es utilizado para determinar el nivel inflamatorio de la epidermis de un paciente. El método utilizado en este artículo para su obtención fue implementado en el nuevo software.

En el artículo científico titulado «*Recuperación del Coeficiente de Absorción de la Epidermis en la Piel Humana*», realizado por Narea, Vivas, y Muñoz (2015), en la Universidad de Carabobo, Venezuela, y publicado por la Sociedad Española de Óptica, se determina el coeficiente de absorción, que es un parámetro óptico asociado a la piel, el cual indica el nivel de concentración de melanina presente en la epidermis de un paciente. La técnica empleada en dicho artículo para

calcular este coeficiente fue implementada en el nuevo software.

### 2.1.2. Observación directa

El «*HunterLab Universal Software*», es un software comercial y privativo de 16 bits diseñado para el sistema operativo Microsoft Windows versión 3.x, con la posibilidad de ejecutarse en Windows 95, Windows 98, Windows 2000 y Windows XP. Fue creado para la utilización del MiniScan XE Plus, además de otros instrumentos de la empresa HunterLab, y descontinuado en el año 2008. Este software dispone de algunas de las funciones que fueron desarrolladas en el nuevo software, razón por la cual es una referencia importante de observación. En la figura 2.1 se puede apreciar la vista principal de la interfaz de este software.

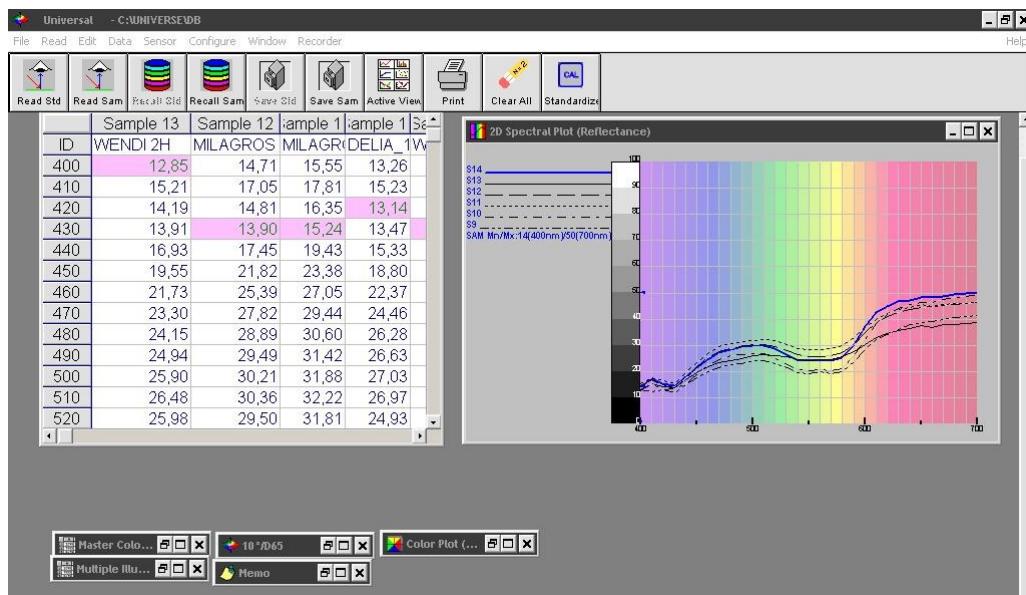


Figura 2.1: *HunterLab Universal Software* (Fuente: CIMBUC, 2015).

El archivo denominado «MSXE + OCX», es una hoja de cálculo habilitada para la ejecución de macroinstrucciones de Microsoft Excel, que fue proporcionada por el personal de soporte técnico de HunterLab como un ejemplo para utilizar el MiniScan XE Plus, empleando el uso de un kit de control denominado

MiniScan XE Plus OCX Kit (MSXE.ocx). Este kit fue diseñado por la empresa HunterLab para dar acceso a las características comúnmente utilizadas por dicho instrumento. El código contenido en la hoja de cálculo se empleó como referencia para el manejo del kit MSXE.ocx.

## 2.2. Bases teóricas

### 2.2.1. Espectroscopía de reflectancia difusa

La ERD es una técnica con la cual se puede estudiar tejido biológico. En el campo de las aplicaciones biomédicas resulta útil para propósitos de diagnóstico, ya que se pueden estudiar tejidos de manera no invasiva, también ha demostrado ser una técnica de gran utilidad en aplicaciones de diagnóstico en varias situaciones modernas (Pérez, 2012).

Para llevar a cabo una medición con ERD se requiere hacer incidir la luz de una fuente, cuyo espectro de emisión sea conocido, sobre el tejido que se quiere estudiar. La luz que logra propagarse en el tejido y que es re-emitida por éste hacia la superficie irradiada, será capturada por algún dispositivo fotosensible (en el caso de esta investigación, el MiniScan XE Plus), para ser comparada posteriormente con la luz incidente o espectro de referencia, y así poder determinar qué tanto cambió dicho espectro después de haber interactuado con el tejido.

Normalmente los datos espectrales de la reflectancia difusa  $R(\lambda)$  son multiplicados por un factor de 100 por los dispositivos fotosensibles, para representarlos en forma de curva en una escala del 0 % al 100 %, a lo largo de puntos discretos que representan las longitudes de onda con las que opera dicho dispositivo; tal es el caso del MiniScan XE Plus.

### 2.2.2. Absorbancia aparente

Según el *Random House Kernerman Webster's College Dictionary* (2010), el espectro de absorción es la radiación electromagnética en ciertas longitudes de onda que atraviesa un medio, y que es absorbida por el mismo. En cierto modo, es el opuesto del espectro de reflectancia, es decir, es la luz que está siendo absorbida aparentemente por el tejido en estudio, y que no está siendo reflejada de vuelta al MiniScan XE Plus. Recordando que la reflectancia es multiplicada por un factor de 100 por el MiniScan XE Plus, la absorbancia se puede calcular con la ecuación II.1.

$$A(\lambda) = 100 - R(\lambda) \quad (\text{II.1})$$

Los valores resultantes se pueden representar en forma de curva, de la misma manera que la reflectancia difusa.

### 2.2.3. Iluminante estándar D65

El tipo de luz bajo el cual se observa un objeto puede afectar su apariencia. Para cuantificar estas fuentes de luz blanca, la *Commission Internationale de l'Eclairage* (CIE) desarrolló iluminantes estándares para la medición del color. HunterLab (2015) define el iluminante como una tabla cuantificable de números que representan la energía relativa en comparación con la longitud de onda de una fuente de luz.

El iluminante estándar D65, según es descrito por la CIE (2015), tiene el propósito de representar la luz de día promedio, y tiene una temperatura de color correlacionada de aproximadamente 6500 grados Kelvin. Los valores numéricos que representan este iluminante se muestran en la tabla 2.1, y su representación gráfica se ilustra en la figura 2.2.

Tabla 2.1: *Valores del iluminante D65* (Fuente: CIE, 2004).

Longitud de onda $\lambda$	Función $S(\lambda)$
400 nm	82.7549
410 nm	91.4860
420 nm	93.4318
430 nm	86.6823
440 nm	104.865
450 nm	117.008
460 nm	117.812
470 nm	114.861
480 nm	115.923
490 nm	108.811
500 nm	109.354
510 nm	107.802
520 nm	104.790
530 nm	107.689
540 nm	104.405
550 nm	104.046
560 nm	100.000
570 nm	96.3342
580 nm	95.7880
590 nm	88.6856
600 nm	90.0062
610 nm	89.5991
620 nm	87.6987
630 nm	83.2886
640 nm	83.6992
650 nm	80.0268
660 nm	80.2146
670 nm	82.2778
680 nm	78.2842
690 nm	69.7213
700 nm	71.6091

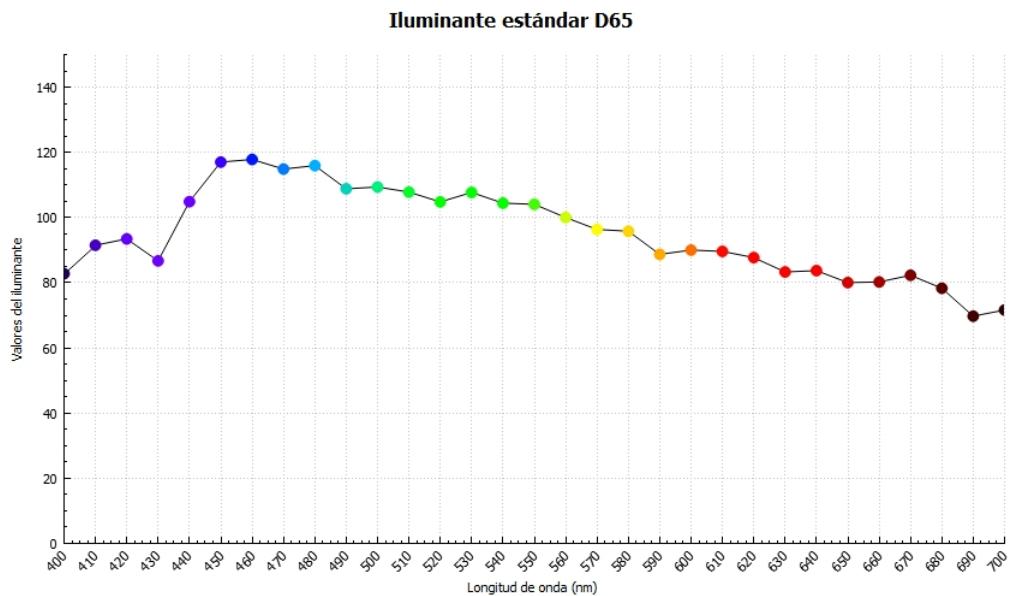


Figura 2.2: Representación gráfica del iluminante estándar D65 (Fuente: Autor).

## 2.2.4. Observador estándar de 10 grados

HunterLab (2008) describe que en la observación visual, el observador es el ojo humano que recibe la luz reflejada desde o a través de un objeto, y el cerebro el cual percibe la visión. Debido a que los humanos perciben el color y la apariencia de formas distintas, subjetivamente, se han hecho intentos para estandarizar el observador humano como una representación de lo que una persona promedio ve u observa.

En 1964, se desarrolló la función del observador estándar CIE de 10 grados, denominado así debido a que los experimentos llevados a cabo para establecer dicho estándar involucraron a sujetos que juzgaban colores, mientras observaban a través de un agujero que les permitía tener un campo de visión de 10 grados. Este observador estándar, en la forma de una función matemática de la respuesta humana a cada longitud de onda de luz, es utilizado en cálculos del color. Los valores numéricos de las funciones que representan este estándar se muestran en la tabla 2.2, y su representación gráfica se ilustra en la figura 2.3.

Tabla 2.2: *Valores del observador de 10 grados* (Fuente: CIE, 2004).

Longitud de onda $\lambda$	Función $\bar{x}(\lambda)$	Función $\bar{y}(\lambda)$	Función $\bar{z}(\lambda)$
400 nm	0.019110	0.002004	0.086011
410 nm	0.084736	0.008756	0.389366
420 nm	0.204492	0.021391	0.972542
430 nm	0.314679	0.038676	1.553480
440 nm	0.383734	0.062077	1.967280
450 nm	0.370702	0.089456	1.994800
460 nm	0.302273	0.128201	1.745370
470 nm	0.195618	0.185190	1.317560
480 nm	0.080507	0.253589	0.772125
490 nm	0.016172	0.339133	0.415254
500 nm	0.003816	0.460777	0.218502
510 nm	0.037465	0.606741	0.112044
520 nm	0.117749	0.761757	0.060709
530 nm	0.236491	0.875211	0.030451
540 nm	0.376772	0.961988	0.013676
550 nm	0.529826	0.991761	0.003988
560 nm	0.705224	0.997340	0.000000
570 nm	0.705224	0.955552	0.000000
580 nm	1.014160	0.868934	0.000000
590 nm	1.118520	0.777405	0.000000
600 nm	1.123990	0.658341	0.000000
610 nm	1.030480	0.527963	0.000000
620 nm	0.856297	0.398057	0.000000
630 nm	0.647467	0.283493	0.000000
640 nm	0.431567	0.179828	0.000000
650 nm	0.268329	0.107633	0.000000
660 nm	0.152568	0.060281	0.000000
670 nm	0.081261	0.031800	0.000000
680 nm	0.040851	0.015905	0.000000
690 nm	0.019941	0.007749	0.000000
700 nm	0.009577	0.003718	0.000000

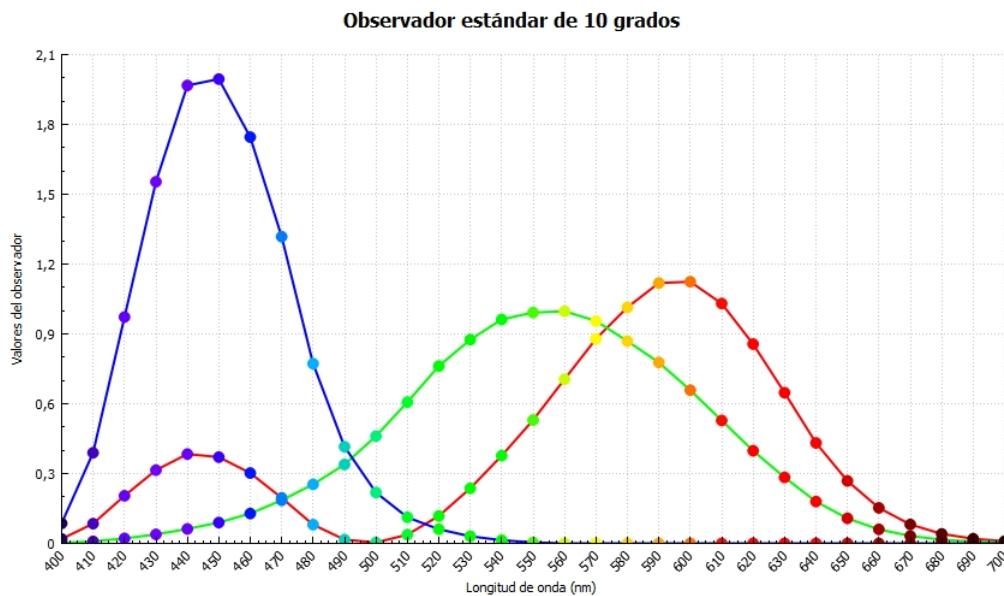


Figura 2.3: Representación gráfica del observador de 10 grados. La línea roja representa la función  $\bar{x}(\lambda)$ , la línea verde representa la función  $\bar{y}(\lambda)$ , y la línea azul representa la función  $\bar{z}(\lambda)$ . (Fuente: Autor).

## 2.2.5. Coordenadas de cromaticidad CIE xyz

La sensación de luz es producida por radiación electromagnética visible, que cae dentro de los límites de longitud de onda de 380 nanómetros y 780 nanómetros. La radiación proveniente de la región de longitud de onda corta produce usualmente la sensación de luz azul, la radiación con longitudes de onda entre 520 nanómetros y 550 nanómetros son vistas como luz verde, y por encima de los 650 nanómetros se percibe usualmente la luz de color rojo. Estos límites no están bien definidos, y la percepción actual depende fuertemente del estado de adaptación del ojo y del estímulo de luz que rodea el objeto en estudio (Schanda, 2007).

La CIE definió un estándar para calcular los valores de estos estímulos, denominandolos valores triestímulo CIE XYZ o sistema tricromático CIE XYZ. Tomando en cuenta el rango de longitudes de onda con el que opera el MiniScan XE Plus, las fórmulas para calcular estos valores se muestran en las ecuaciones II.2, II.3 y II.4.

$$X = k \int_{400 \text{ nm}}^{700 \text{ nm}} R(\lambda) S(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda \quad (\text{II.2})$$

$$Y = k \int_{400 \text{ nm}}^{700 \text{ nm}} R(\lambda) S(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda \quad (\text{II.3})$$

$$Z = k \int_{400 \text{ nm}}^{700 \text{ nm}} R(\lambda) S(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda \quad (\text{II.4})$$

En donde  $R(\lambda)$  es el factor de reflectancia difusa,  $S(\lambda)$  es la distribución de energía espectral relativa de un iluminante estándar, en este caso del iluminante D65 (véase la tabla 2.1),  $\bar{x}(\lambda)$ ,  $\bar{y}(\lambda)$  y  $\bar{z}(\lambda)$  son las funciones de correspondencia del color, dado el observador estándar CIE de 10 grados (véase la tabla 2.2), y por último,  $k$  es una constante que se calcula con la fórmula II.5.

$$k = \frac{100}{\sum_{\lambda} S(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda} \quad (\text{II.5})$$

De acuerdo con la recomendación de la CIE, la integración en las fórmulas II.2, II.3 y II.4 puede llevarse a cabo con una sumatoria numérica, con intervalos de longitud de onda equivalentes a 10 nanómetros para el caso del MiniScan XE Plus. Tomando en cuenta esto, los valores triestímulo CIE XYZ se calculan con las ecuaciones II.6, II.7 y II.8.

$$X = k \sum_{\lambda} R(\lambda) S(\lambda) \bar{x}(\lambda) \Delta \lambda \quad (\text{II.6})$$

$$Y = k \sum_{\lambda} R(\lambda) S(\lambda) \bar{y}(\lambda) \Delta \lambda \quad (\text{II.7})$$

$$Z = k \sum_{\lambda} R(\lambda) S(\lambda) \bar{z}(\lambda) \triangle \lambda \quad (\text{II.8})$$

Ahora bien, el estímulo de un color se puede describir completamente por los tres valores triestímulo, pero esta descripción no es concebible fácilmente. Según Schanda (2007), es difícil imaginar un estímulo si solamente se dan sus valores triestímulo, y frecuentemente no se buscan los valores absolutos de los mismos. En tales casos se pueden utilizar las coordenadas de cromaticidad CIE xyz. Finalmente, dichas coordenadas se definen en las ecuaciones II.9, II.10 y II.11.

$$x = \frac{X}{X + Y + Z} \quad (\text{II.9})$$

$$y = \frac{Y}{X + Y + Z} \quad (\text{II.10})$$

$$z = \frac{Z}{X + Y + Z} \quad (\text{II.11})$$

### 2.2.6. Coordenadas del espacio CIELAB

Según Schanda (2007), los estímulos del color son tridimensionales, y la solicitud de extender el espacio del color uniforme a un espacio tridimensional ya había sido expresada en los años 60. En 1976 se aceptó la recomendación para el diagrama de espacio del color uniforme CIELAB ( $L^*a^*b^*$ ).

El espacio del color CIELAB es un sistema para transformar las coordenadas de cromaticidad CIE xyz, a coordenadas  $L^*a^*b^*$  representables en un espacio tridimensional, y está definido por las ecuaciones II.12, II.13 y II.14.

$$L^* = 116f(Y/Y_n) - 16 \quad (\text{II.12})$$

$$a^* = 500[f(X/X_n) - f(Y/Y_n)] \quad (\text{II.13})$$

$$b^* = 200[f(Y/Y_n) - f(Z/Z_n)] \quad (\text{II.14})$$

Donde  $f(X/X_n) = (X/X_n)^{1/3}$  si  $(X/X_n) > (24/116)^3$

$$f(X/X_n) = (841/108)(X/X_n) + 16/116 \text{ si } (X/X_n) \leq (24/116)^3$$

Donde  $f(Y/Y_n) = (Y/Y_n)^{1/3}$  si  $(Y/Y_n) > (24/116)^3$

$$f(Y/Y_n) = (841/108)(Y/Y_n) + 16/116 \text{ si } (Y/Y_n) \leq (24/116)^3$$

Donde  $f(Z/Z_n) = (Z/Z_n)^{1/3}$  si  $(Z/Z_n) > (24/116)^3$

$$f(Z/Z_n) = (841/108)(Z/Z_n) + 16/116 \text{ si } (Z/Z_n) \leq (24/116)^3$$

En donde  $X, Y, Z$  son los valores triestímulo del color considerado del objeto o tejido en estudio y  $X_n, Y_n, Z_n$  son los valores triestímulo de la fuente de luz. Para el caso del iluminante estándar D65, y tomando en cuenta el observador estándar de 10 grados, los valores de  $X_n, Y_n, Z_n$  son  $X_n = 94,81$ ,  $Y_n = 100,00$  y  $Z_n = 107,32$ .

### 2.2.7. Coeficiente de absorción

La piel es un medio biológico que se comporta perfectamente como un medio turbio multicapa, donde el principal agente de absorción es la melanina, la cual es producida en la epidermis, y es uno de los parámetros que determinan la coloración de la piel (Narea et al., 2015).

En la actualidad, existe el problema de calcular confiablemente los parámetros ópticos (entre ellos, el coeficiente de absorción) de los medios turbios a partir del conocimiento de su reflectancia. La determinación de los parámetros ópticos es de vital importancia para el desarrollo de las investigaciones relativas a la caracterización de tejidos biológicos, en especial de la piel, empleando métodos ópticos.

Narea et al., (2015) plantean recuperar el coeficiente de absorción de la epidermis a través del ajuste trigonométrico de los espectros de reflectancia difusa, brindando de esta forma una herramienta matemática que permite relacionar los parámetros del ajuste de las curvas espetrales con las propiedades ópticas de la piel.

La fórmula II.15 es la empleada para recuperar el coeficiente de absorción de la epidermis, dada una curva espectral  $R(\lambda)$ .

$$\mu_{a,epi}(a_0, \lambda) = Z e^{ka_0} 6,6 \cdot 10^{11} \lambda^{-3,3} \quad (\text{II.15})$$

En donde  $Z = 0,2796$ ,  $k = -7,174$ , y  $a_0$  es un coeficiente hallado aplicando ajuste polinomial por series trigonométricas a la curva espectral  $R(\lambda)$ .

## 2.2.8. Índice de eritema

Una propiedad fundamental de la piel es su capacidad para responder a la radiación ultravioleta. En muchas personas y poblaciones, estas respuestas son claramente adaptativas, en donde el eritema (enrojecimiento) es tanto una señal para la persona quemada por el sol de buscar un resguardo, como una señal de que el sistema inmunológico está activo y el proceso de curación ha comenzado (Wagner et al.,, 2002).

La respuesta de la piel resultó ser importante clínicamente cuando los protocolos de tratamiento se establecieron en la década de los 70 para regímenes de fototerapia para la psoriasis y otras enfermedades de la piel. Para calcular el índice de eritema, primero hay que determinar el promedio ponderado de la reflectancia de la luz en el rango de longitud de onda verde, y en el rango de longitud de onda roja, utilizando las fórmulas II.16 y II.17.

$$R_{verde} = \left[ \left( \frac{1}{2}R_{560\text{ nm}} + R_{570\text{ nm}} + \frac{1}{2}R_{580\text{ nm}} \right) / 2 \right] / 100 \quad (\text{II.16})$$

$$R_{roja} = \left[ \left( \frac{1}{2}R_{640\text{ nm}} + R_{650\text{ nm}} + R_{660\text{ nm}} + \frac{1}{2}R_{670\text{ nm}} \right) / 3 \right] / 100 \quad (\text{II.17})$$

Teniendo ya el promedio ponderado de dichas reflectancias, la fórmula II.18 es la utilizada para calcular el índice de eritema.

$$E = 100 \cdot [\log(1/R_{verde}) - \log(1/R_{roja})] \quad (\text{II.18})$$

# **Capítulo III**

## **Marco Metodológico**

### **3.1. Metodología de investigación**

#### **3.1.1. Investigación-Acción**

Baskerville (1999) define la Investigación-Acción como un método de investigación que a finales de la década de los 90 empezó a crecer en popularidad, para el uso en investigaciones académicas de sistemas de información. Este método produce resultados de investigación altamente relevantes debido a que se fundamenta en la acción práctica, dirigida a resolver un problema mientras se informa cuidadosamente sobre la teoría.

Esta metodología tiene una doble finalidad: generar un beneficio al cliente de la investigación y al mismo tiempo generar conocimiento relevante. Por lo tanto, es una forma de investigar de carácter colaborativo que busca unir teoría y la práctica entre investigadores y practicantes, mediante un proceso de naturaleza cíclica.

La representación más habitual de la Investigación-Acción es la descrita

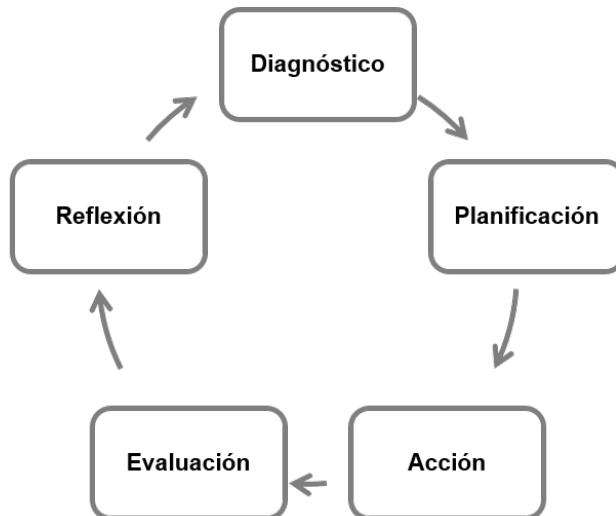


Figura 3.1: *Carácter cíclico de la Investigación-Acción* (Fuente: Baskerville, 1999).

por Baskerville (1999), en forma de cinco fases que conforman un ciclo, las cuales se muestran en la figura 3.1 y se describen a continuación.

- **Fase de diagnóstico:** se realiza el proceso de identificación de los problemas primarios de la investigación.
- **Fase de planificación:** se especifican las acciones que se llevarán a cabo para solucionar los problemas primarios.
- **Fase de acción:** se ejecutan las acciones planificadas en la fase anterior.
- **Fase de evaluación u observación:** se efectúa una evaluación de los resultados obtenidos para observar, conocer y documentar los efectos de las acciones que fueron realizadas.
- **Fase de reflexión:** se toman los conocimientos adquiridos en la Investigación-Acción. Si las acciones ejecutadas no fueron exitosas, los conocimientos pueden proporcionar la base para el diagnóstico de un nuevo ciclo de Investigación-Acción.

En la tabla 3.1 se muestran las actividades de la presente investigación, haciendo correspondencia a cada una de las fases de la Investigación-Acción descritas por Baskerville (1999).

Tabla 3.1: *Actividades del proyecto según la Investigación-Acción* (Fuente: Autor).

Fase	Actividades
<b>Diagnóstico</b>	Identificar los problemas y limitaciones que presenta el HunterLab Universal Software.
<b>Planificación</b>	Seleccionar la metodología de desarrollo, determinar los requisitos del software y realizar un plan de trabajo.
<b>Acción</b>	Desarrollar el software, tomando en cuenta los requisitos identificados previamente y los lineamientos de calidad del software.
<b>Evaluación</b>	Realizar las pruebas de funcionalidad y de usabilidad al software.
<b>Reflexión</b>	Presentar los resultados y los análisis de las pruebas realizadas.

## 3.2. Metodología de desarrollo de software

Para que el desarrollo del nuevo software cumpliera con los objetivos propuestos en la presente investigación, y tomando en cuenta los atributos de calidad planteados por la ingeniería del software, se realizó una revisión del enfoque que debería tener la metodología de desarrollo a utilizar.

Según Sommerville (2005), en los años 80 y a principios de los 90, existía una opinión general de que la mejor forma de obtener un software de calidad era a través de una planificación cuidadosa del proyecto, una garantía de calidad formalizada, la utilización de métodos de análisis y diseño soportados por herramientas *CASE*, y por medio de procesos de desarrollo de software controlados y rigurosos. El software que seguía lo mencionado previamente era desarrollado por grandes equipos que a veces trabajaban para compañías diferentes, que a menudo estaban dispersos geográficamente y trabajaban en el software durante largos períodos de tiempo.

Ahora bien, debido a que se tenía un equipo pequeño para el desarrollo del nuevo software, y a que no se iba a trabajar en éste durante un largo periodo de tiempo, se eligió la utilización de una metodología de desarrollo de enfoque ágil.

Tabla 3.2: *Principios de los métodos ágiles* (Fuente: Sommerville, 2005).

<b>Principio</b>	<b>Descripción</b>
<b>Participación del cliente</b>	Los clientes deben estar fuertemente implicados en todo el proceso de desarrollo.
<b>Entrega incremental</b>	El software se desarrolla en incrementos, en los que el cliente especifica los requerimientos a incluir en cada incremento.
<b>Personas, no procesos</b>	Se deben reconocer y explotar las habilidades del equipo de desarrollo. A éste se le debe dejar desarrollar su propia forma de trabajar, sin procesos formales.
<b>Aceptar el cambio</b>	Se debe contar con que los requerimientos del software cambian, por lo que el software se diseña para dar cabida a estos cambios.
<b>Mantener la simplicidad</b>	Se debe centrar la simplicidad tanto en el software a desarrollar como en el proceso de desarrollo. Donde sea posible, se trabaja activamente para eliminar la complejidad del software.

De acuerdo con Sommerville (2005), los métodos ágiles dependen de un enfoque iterativo para la especificación, el desarrollo y la entrega del software, y están pensados para entregar un producto funcional de forma rápida a los clientes, quienes pueden entonces proponer que se incluyan en iteraciones posteriores nuevos requerimientos o cambios en los mismos. Si bien los métodos ágiles proponen procesos diferentes para el desarrollo y entregas incrementales del software, comparten unos principios en común, los cuales son ilustrados en la tabla 3.2.

### 3.2.1. SCRUM

De acuerdo con Schwaber y Sutherland (2013), esta metodología ágil es un marco de trabajo de procesos, que ha sido utilizado para gestionar el desarrollo de productos complejos desde principios de los años 90. SCRUM muestra la eficacia relativa de las prácticas de gestión de productos y las prácticas de desarrollo.

La estructura de desarrollo de SCRUM se basa en ciclos de trabajo llamados *sprints*. Los *sprints* son iteraciones de una a cuatro semanas que suceden una detrás de la otra, con una duración fija y con fechas de culminación previamente establecidas. Se seleccionan los requerimientos que se van a desarrollar de una lista priorizada. Todos los días el equipo se reúne, y al final del *sprint* el equipo revisa el mismo con los *stakeholders*.

Hundermark (2015) explica de forma precisa los roles que conforman el equipo de desarrollo de SCRUM, que se detallan a continuación:

- **Dueño del producto (*Product Owner*):** su responsabilidad es optimizar el retorno de la inversión, asegurando que el equipo SCRUM este ocupado en entregar las características más valiosas del producto. Su trabajo principal es concentrarse en la efectividad, esto es elaborar el producto correcto para sus clientes.
- **Equipo de desarrollo:** es un grupo de personas responsables por entregar incrementos de la funcionalidad del producto al final de cada *sprint*. El trabajo principal de este equipo es concentrarse en la eficiencia, esto es, elaborar el producto correcto para su *Product Owner* y sus usuarios.
- **Maestro SCRUM (*SCRUM Master*):** gestiona todos los aspectos del proceso del equipo SCRUM. Su trabajo principal es concentrarse en el progreso continuo del equipo, acortando los ciclos de retroalimentación mediante los cuales aprende.

Como es sabido, el *sprint* marca cada una de las iteraciones dentro del ciclo de desarrollo de SCRUM. Por otra parte, la planificación, la continua revisión y la retrospectiva definen el inicio y el final del *sprint*. Las reuniones que ocurren en cada *sprint* son las siguientes.

- **Reunión de planificación del *sprint*:** esta reunión marca el inicio

de cada *sprint*. Su propósito para el equipo SCRUM es planear el trabajo que van a realizar durante el *sprint* actual.

- **Reunión diaria del *sprint*:** el equipo de desarrollo se reúne para comunicar su trabajo, sincronizarlo y crear un plan para las siguientes 24 horas. Esta colaboración es esencial para asegurar el progreso continuo y evadir cualquier obstrucción de trabajo.
- **Reunión de revisión del *sprint*:** su propósito es el de inspeccionar la iteración del producto que el equipo de desarrollo ha entregado, obtener una retroalimentación de los participantes en la reunión con respecto a la misma, y adaptar el plan para el *sprint* subsiguiente. Esta reunión está abierta para todo el personal dentro de la organización.
- **Reunión de retrospectiva:** es la reunión final del *sprint*, la cual nunca es omitida, sin importar lo que haya ocurrido en dicho *sprint*. Mientras que la reunión de revisión del *sprint* está enfocada en el producto, esta reunión está enfocada en el proceso, es decir, la forma en la que el equipo SCRUM está trabajando en conjunto, incluyendo sus habilidades técnicas, las prácticas de desarrollo del software y las herramientas que están usando. Esta reunión se limita a los miembros del equipo SCRUM.

Por otra parte, la metodología SCRUM incluye los siguientes artefactos:

- **Pila del producto (*product backlog*):** es una lista de ítems de trabajo descritos en un nivel funcional, que necesitan ser realizados a lo largo del tiempo. Los requerimientos son emergentes, lo que significa que no se puede saber por adelantado todos los detalles acerca de lo que se quiere en el producto. Por esta razón este artefacto es un documento dinámico, que requiere un refinamiento constante para mantenerlo actual y útil.
- **Pila del *sprint* (*sprint backlog*):** esta pila es visualizada por el equipo de desarrollo en un *task board*, que es la representación física de la

lista de trabajo que se ha resumido para realizar durante el *sprint* actual. Este artefacto le dice al equipo SCRUM y a todos los demás el trabajo que tienen planeado hacer en el *sprint*, y su estado actual.

- **Incremento:** es la suma de todos los ítems de la pila del producto que cumplen con la definición de terminado al final del *sprint*. El equipo de desarrollo presentará el incremento en la revisión del *sprint*, y el *Product Owner* determinará cuándo liberarlo.

En esta metodología se pueden emplear varias técnicas y procesos. En este sentido, se incluyeron algunos artefactos de la metodología RUP (*Rational Unified Process*) descrita por Kroll y Kruchten (2003), para así generar suficiente documentación durante el diseño y el desarrollo del software.

### 3.2.2. Artefactos de RUP utilizados

- **Documento de visión:** describe la visión de los *stakeholders* con respecto al producto a desarrollarse, especificado en términos de las características y las necesidades claves de los mismos.
- **Modelo de casos de uso:** describe los requerimientos funcionales del software en términos de actores y casos de uso. Un actor representa el tipo de usuario del software, mientras que un caso de uso describe cómo va a interactuar cada actor con el software.
- **Requerimientos no funcionales:** representan los requerimientos que tienen un impacto significativo en la arquitectura y en la satisfacción del usuario.
- **Glosario:** define la terminología empleada en todos los artefactos utilizados.

Para finalizar, en la figura 3.2 se ilustra la configuración de la metodología SCRUM utilizada, en conjunto con los artefactos elegidos de la metodología RUP.

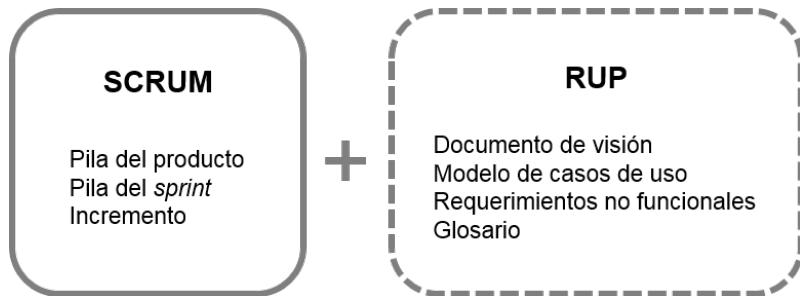


Figura 3.2: *Configuración de los artefactos a utilizar de SCRUM y RUP* (Fuente: Autor).

# **Capítulo IV**

## **Resultados**

### **4.1. Fases metodológicas**

#### **4.1.1. Visión**

##### **Enunciado del problema**

El problema que se presenta es que se está utilizando el HunterLab Universal Software para el manejo del espectrofotómetro de reflexión difusa MiniScan XE Plus. Dicho software está en inglés, es comercial, privativo y fue descontinuado; esto afecta a los dermatólogos del CIMBUC.

El impacto causado por esto es que los dermatólogos encuentran el HunterLab Universal Software difícil de utilizar e imposible de adaptar a sus necesidades, lo que ralentiza la actividad de consulta con sus pacientes, genera la necesidad de disponer de personal especializado para su debido uso y disminuye el potencial de dicho instrumento.

Una solución satisfactoria sería disponer de un software para el uso del

MiniScan XE Plus que esté en español, que sea amigable y mantenible, permitiendo que se adapte a las necesidades de los dermatólogos.

### Descripción de los usuarios

Tabla 4.1: *Actores del negocio* (Fuente: Autor).

Actor	Descripción
<b>Administrador</b>	Realiza mediciones. Consulta las historias médicas de los pacientes y las muestras. Gestiona los usuarios.
<b>Dermatólogo</b>	Realiza mediciones. Gestiona las historias médicas de los pacientes y las muestras. Realiza diagnósticos a partir de los resultados de las muestras.
<b>Investigador</b>	Realiza mediciones. Consulta las historias médicas de los pacientes y las muestras. Realiza análisis sobre los resultados de las mediciones.

Tabla 4.2: *Actores del software* (Fuente: Autor).

Actor	Responsabilidad	Experiencia	Uso
<b>Administrador</b>	Manejar el MiniScan XE Plus. Crear, consultar, modificar y eliminar usuarios. Consultar historias médicas de pacientes. Consultar muestras de pacientes.	Alta	Alto
<b>Dermatólogo</b>	Manejar el MiniScan XE Plus. Crear, consultar, modificar y eliminar historias médicas de pacientes. Crear, consultar, modificar y eliminar muestras de pacientes.	Baja	Alto
<b>Investigador</b>	Manejar el MiniScan XE Plus. Consultar historias médicas de pacientes. Consultar muestras de pacientes.	Media	Alto

### Resumen del producto

El software desarrollado, denominado a partir de ahora Spectrasoft, es una aplicación para el uso del MiniScan XE Plus, destinado a la recuperación

de los datos de medición de dicho instrumento, y a la generación y gestión de resultados relevantes. Dicho software estará orientado a las actividades médicas dermatológicas del CIMBUC. La tabla 4.3 resume los beneficios y las características más importantes que provee el producto.

Tabla 4.3: *Beneficios y características principales del producto* (Fuente: Autor).

<b>Beneficio al cliente</b>	<b>Característica que lo soporta</b>
Se puede conectar, calibrar y realizar mediciones con el MiniScan XE Plus.	Comunicación con el MiniScan XE Plus y acceso a las características comúnmente utilizadas por el mismo.
Se dispone de información relevante para el análisis y diagnóstico de patologías dermatológicas en la piel de los pacientes.	Muestra de los datos espectrales obtenidos de las mediciones, representación gráfica de dichos datos, y cálculo de valores adicionales asociados a los mismos.
Se pueden gestionar los usuarios, las historias médicas y las muestras generadas de las mediciones.	Manejo de una base de datos que almacena toda la información referente a los usuarios, las historias médicas y las muestras, permitiendo su gestión por medio del Spectrasoft.
El Spectrasoft se puede utilizar con facilidad.	Interfaz gráfica de usuario en español, que ofrece únicamente las funciones necesarias para gestionar la información que necesitan los usuarios.
El Spectrasoft se puede adaptar a las futuras necesidades de sus usuarios.	Código abierto del proyecto disponible en su totalidad para realizar cualquier modificación y/o extensión.

### Principales restricciones

El software se desarrolla utilizando el lenguaje de programación C++, empleando únicamente tecnologías gratuitas, y en la medida de lo posible, de código abierto. Se ejecuta en sistemas operativos Windows actuales. Por último, la comunicación entre el software y el MiniScan XE Plus se logra por medio de un puerto serial, o a través de un adaptador USB.

#### 4.1.2. Pila del producto (*product backlog*)

La lista de requerimientos funcionales que necesitan ser realizados a lo largo del desarrollo del Spectrasoft son el producto de una reunión que se tuvo con los dermatólogos y los investigadores del CIMBUC, al igual que de la observación directa efectuada a las funciones que el HunterLab Universal Software ofrece para el manejo del MiniScan XE Plus. En la tabla 4.4 se muestran dichos requerimientos.

Tabla 4.4: *Requerimientos funcionales del software* (Fuente: Autor).

Código	Requerimiento	Prioridad
<b>RF01</b>	Conectar y desconectar el MiniScan XE Plus.	Esencial
<b>RF02</b>	Calibrar el MiniScan XE Plus.	Esencial
<b>RF03</b>	Recuperar los 31 puntos espectrales de una medición con el MiniScan XE Plus y mostrarlos en su forma numérica.	Esencial
<b>RF04</b>	Graficar una curva de reflectancia difusa a partir de los 31 puntos espectrales recuperados.	Esencial
<b>RF05</b>	Graficar una curva de absorbancia aparente a partir de los 31 puntos espectrales recuperados.	Esencial
<b>RF06</b>	Calcular y mostrar las coordenadas de cromaticidad CIE xyz.	Esencial
<b>RF07</b>	Calcular y mostrar las coordenadas del espacio CIELAB.	Esencial
<b>RF08</b>	Calcular y graficar el coeficiente de absorción de la epidermis.	Esencial
<b>RF09</b>	Calcular y mostrar el índice de eritema.	Esencial
<b>RF10</b>	Almacenar la información de los usuarios, las historias médicas, las muestras y los resultados de las mediciones en una base de datos.	Esencial
<b>RF11</b>	Gestionar la creación, consulta, modificación y eliminación de los usuarios.	Esencial
<b>RF12</b>	Gestionar la creación, consulta, modificación y eliminación de las historias médicas de pacientes.	Esencial
<b>RF13</b>	Gestionar la creación, consulta, modificación y eliminación de las muestras pertenecientes a las historias médicas.	Esencial
<b>RF14</b>	Exportar los datos de una muestra a un archivo portátil.	Esencial

### 4.1.3. Requerimientos no funcionales

De la misma forma que los requerimientos funcionales, la lista de los requerimientos no funcionales fue definida en la misma reunión con los dermatólogos y los investigadores, tomando en cuenta las restricciones del entorno en donde se va a ejecutar el Spectrasoft. En la tabla 4.5 se describen estos requerimientos no funcionales.

Tabla 4.5: *Requerimientos no funcionales del software* (Fuente: Autor).

Código	Requerimiento	Prioridad
<b>RNF01</b>	El software debe ser fácil de utilizar, por lo que debe cumplir con el atributo de usabilidad de un software de calidad.	Esencial
<b>RNF02</b>	El software debe ser capaz de adaptarse a las necesidades de los dermatólogos, permitiendo la incorporación de nuevos requerimientos y funcionalidades, razón por la cual debe cumplir con el atributo de mantenibilidad de un software de calidad.	Esencial
<b>RNF03</b>	El software debe desarrollarse empleando únicamente herramientas y tecnologías gratuitas, y en la medida de lo posible, libres.	Esencial
<b>RNF04</b>	El software debe ser capaz de ejecutarse en sistemas Windows actuales, con arquitecturas de 32 bits y 64 bits.	Esencial
<b>RNF05</b>	El software debe conectarse con el MiniScan XE Plus por medio de un puerto serial o de un adaptador USB.	Esencial
<b>RNF06</b>	El archivo portátil al que se exportan los resultados de una medición debe ser abierto por un visualizador/editor de hojas de cálculo.	Esencial
<b>RNF07</b>	El software debe desarrollarse utilizando el lenguaje de programación orientado a objetos C++.	Esencial

#### 4.1.4. Casos de uso

- Operar el MiniScan XE Plus:

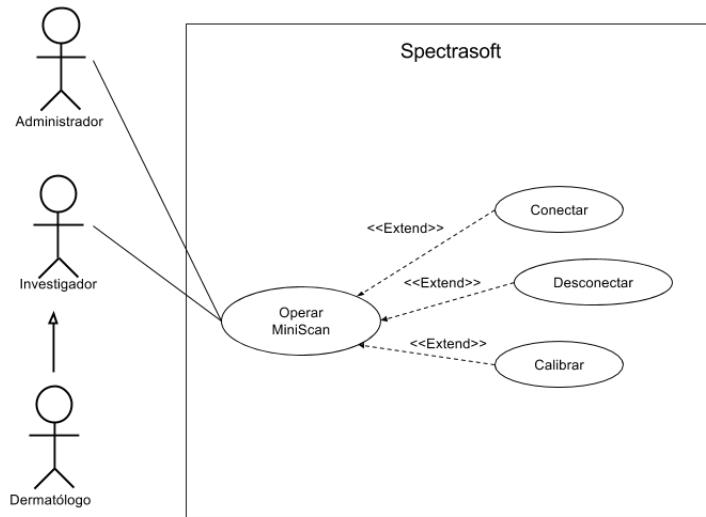


Figura 4.1: Caso de uso: operar el MiniScan XE Plus (Fuente: Autor).

- Gestionar medición:

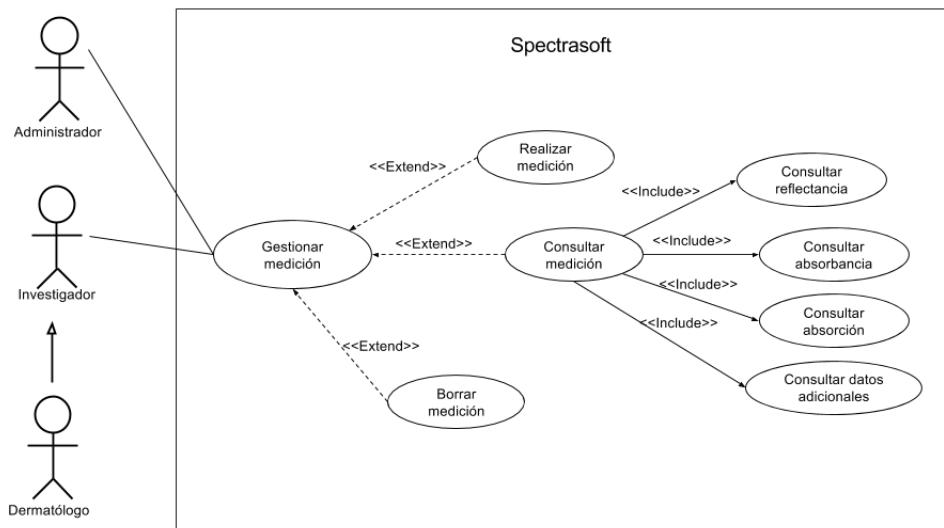


Figura 4.2: Caso de uso: gestionar medición (Fuente: Autor).

■ Gestionar sesión de usuario:

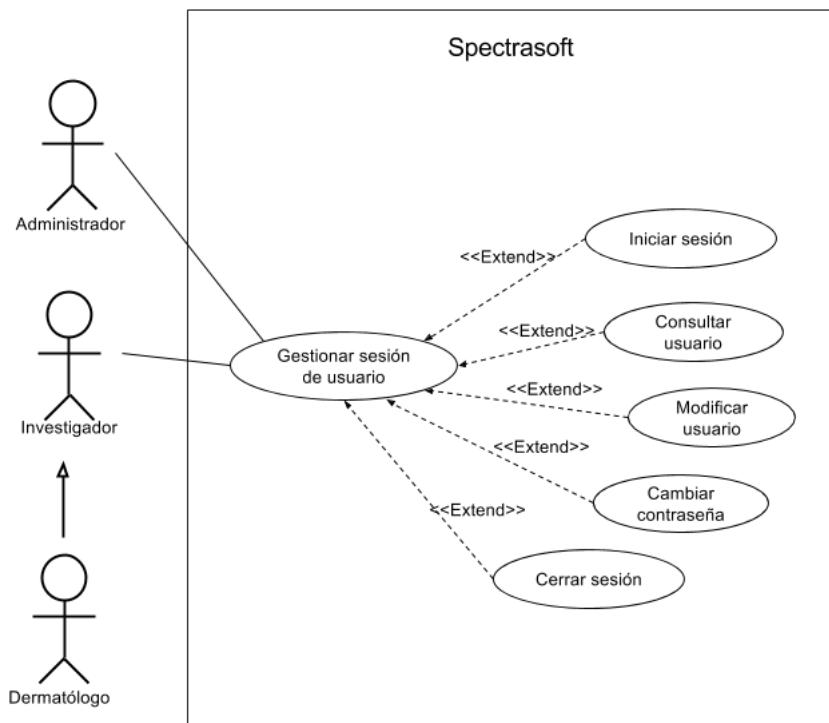


Figura 4.3: Caso de uso: gestionar sesión de usuario (Fuente: Autor).

■ Gestionar historia:

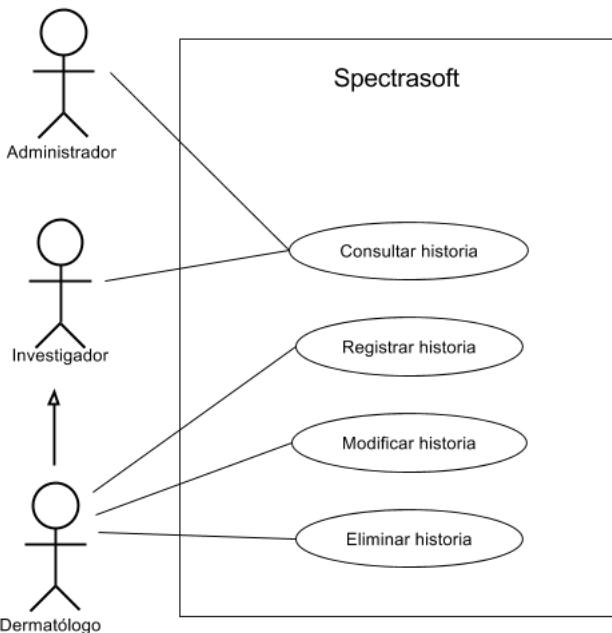


Figura 4.4: Caso de uso: gestionar historia (Fuente: Autor).

■ Gestionar muestra:

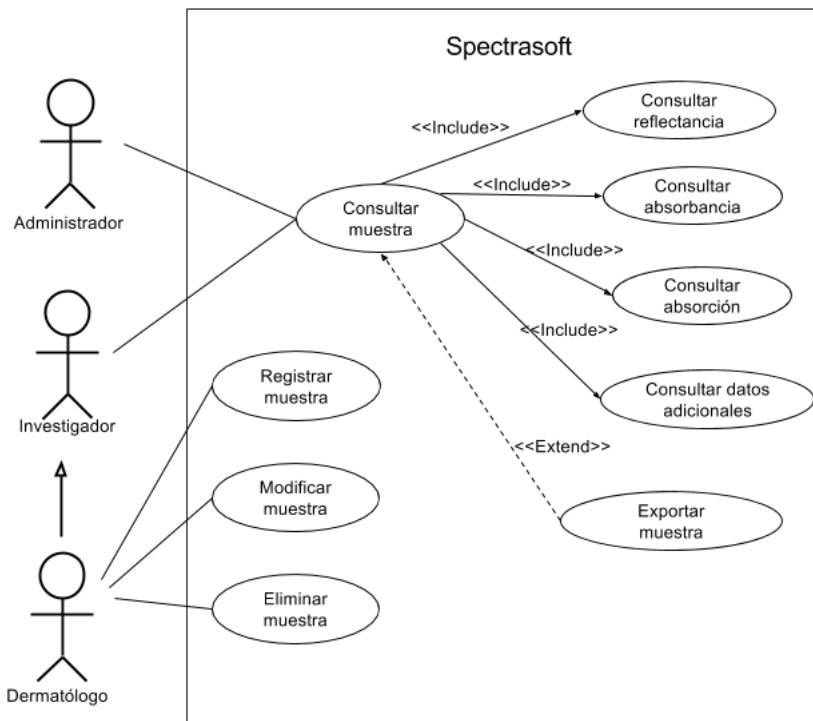


Figura 4.5: Caso de uso: gestionar muestra (Fuente: Autor).

■ Gestionar usuario:

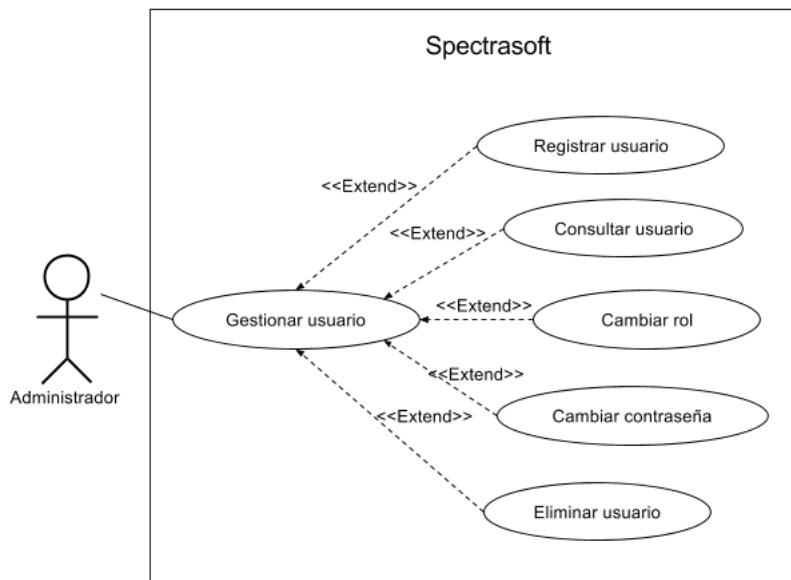


Figura 4.6: Caso de uso: gestionar usuario (Fuente: Autor).

■ Caso de uso general:

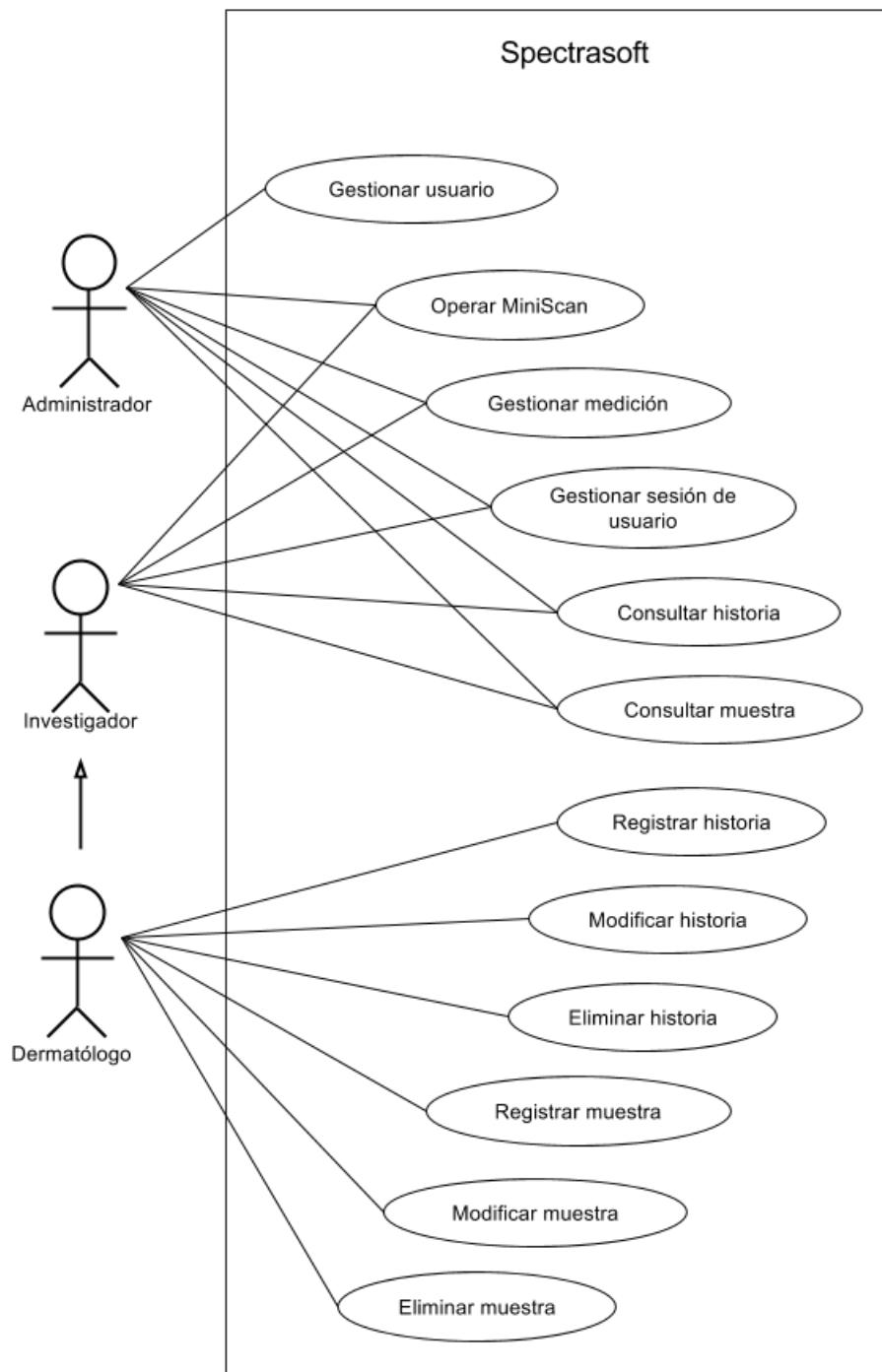


Figura 4.7: Caso de uso general (Fuente: Autor).

## Descripción de los casos de uso

- **Operar MiniScan:** Permite a todos los usuarios conectar, desconectar y calibrar el MiniScan XE Plus, esto último haciendo uso de una trampa de luz y una cerámica blanca.
- **Gestionar medición:** Permite a todos los usuarios efectuar una medición con el MiniScan XE Plus conectado, visualizar los resultados obtenidos de la misma, y borrarlos.
- **Consultar medición:** Permite a todos los usuarios visualizar tanto la información obtenida directamente del MiniScan XE Plus, como la información calculada a partir de la misma, como la curva de reflectancia difusa, la curva de absorbancia aparente, las coordenadas de cromaticidad CIE xyz, las coordenadas CIELAB, el coeficiente de absorción y el índice de eritema de una medición realizada.
- **Gestionar sesión de usuario:** Permite a cualquier usuario iniciar sesión para acceder a las funciones pertinentes a su rol, consultar y modificar su información, cambiar su contraseña, y cerrar sesión.
- **Gestionar historia:** Permite a todos los usuarios consultar la información perteneciente a las historias médicas, y sólo permite a los usuarios con el rol de dermatólogo registrar, modificar y eliminar dichas historias.
- **Gestionar muestra:** Permite a todos los usuarios consultar la información referente a las muestras pertenecientes a una historia médica de un paciente determinado, así como exportar dicha información, y sólo permite a los usuarios con el rol de dermatólogo registrar, modificar y eliminar tales muestras.
- **Gestionar usuario:** Permite registrar usuarios, consultar su información, cambiar los roles de dichos usuarios, cambiar sus contraseñas y eliminarlos. Esto solamente puede ser efectuado por usuarios con el rol de administrador.

#### 4.1.5. Glosario

- **Espectroscopía de reflectancia difusa:** técnica con la cual se puede estudiar tejido biológico.
- **Espectrofotómetro de reflexión difusa:** instrumento de medición del color, que emplea la técnica de espectroscopía de reflectancia difusa.
- **Medición:** es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir, para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud.
- **Calibración:** proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia.
- **Historia médica:** documento médico-legal que surge del contacto entre el profesional de la salud (en este caso, dermatólogo) y el paciente, donde se recoge la información necesaria para la correcta atención de los pacientes.
- **Muestra:** parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación.
- **Patología dermatológica:** parte de la medicina dermatológica que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de la piel, así como los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen.
- **Datos espectrales:** datos que representan un conjunto de ondas electromagnéticas, ordenadas según su frecuencia.
- **Absorbancia aparente:** es la luz que aparentemente está siendo absorbida por un medio.

- **Coordenadas de cromaticidad CIE xyz:** valores que representan los estímulos de la luz de una forma estándar.
- **Coordenadas del espacio CIELAB:** valores obtenidos de la transformación de las coordenadas de cromaticidad CIE xyz, haciéndolas representables en un espacio de tres dimensiones.
- **Epidermis:** membrana epitelial que recubre la parte más superficial del cuerpo de los animales.
- **Coeficiente de absorción:** conjunto de valores que indican el nivel de concentración de melanina presente en la epidermis de un paciente.
- **Índice de eritema:** valor utilizado para determinar el nivel inflamatorio de la epidermis de un paciente.

## 4.2. Base de datos

### 4.2.1. Diagrama ER de la base de datos

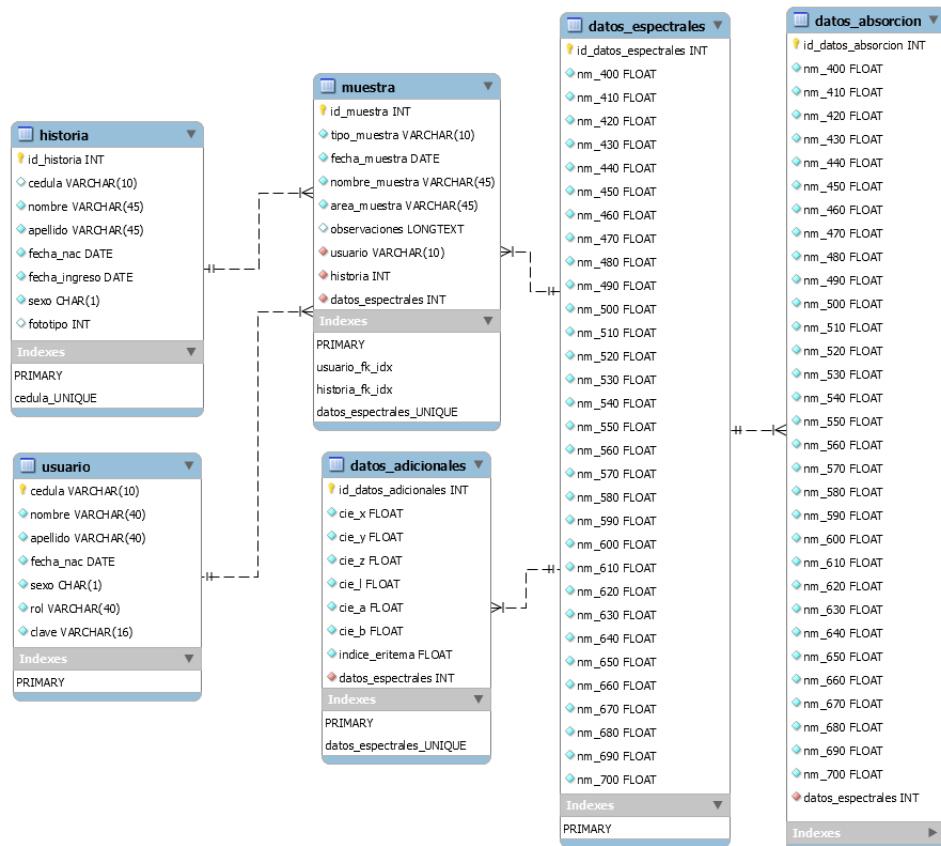


Figura 4.8: Diagrama ER de la base de datos (Fuente: Autor).

### 4.2.2. Descripción de las tablas de la base de datos

- **historia**: almacena los datos referentes a la historia médica de cada uno de los pacientes registrados.
- **usuario**: guarda la información de cada uno de los usuarios que pueden acceder al software, que pueden ser administradores, dermatólogos o investigadores.
- **muestra**: contiene los datos relevantes de las muestras que son tomadas a los pacientes. Dichas muestras siempre están interrelacionadas con la

historia médica del paciente al que pertenece, y la cédula del usuario que la tomó.

- **datos\_espectrales:** contiene los 31 puntos espectrales resultantes de la medición realizada sobre cada muestra por medio del MiniScan XE Plus.
- **datos\_absorcion:** contiene los 31 puntos espectrales resultantes del cálculo del coeficiente de absorción asociado con los datos espectrales.
- **datos\_adicionales:** almacena los datos que son calculados a partir de los 31 puntos espectrales de cada muestra, estos son las coordenadas de cromaticidad CIE xyz, las coordenadas del espacio del color CIELAB y el índice de eritema.

## 4.3. Tecnologías y recursos utilizados

### 4.3.1. Tecnologías

- **Qt:** es un *framework* de desarrollo de aplicaciones multiplataforma para sistemas operativos de escritorio, sistemas integrados y sistemas móviles. Se utilizó la versión *open source* 5.4.1 de este *framework* para el desarrollo del Spectrasoft.
- **Visual Studio:** es un entorno integrado de desarrollo o *IDE* para crear aplicaciones en varias plataformas, como Windows, Android y iOS. La versión 2013 de este *IDE* fue utilizada para desarrollar una librería escrita en Visual Basic.NET, la cual actúa como intermediaria entre el kit *MSXE.oxc* y el *framework* Qt, para así utilizar las características del MiniScan XE Plus en el Spectrasoft.
- **PostgreSQL:** es un sistema *open source* multiplataforma de bases de datos relacionales. Posee más de 15 años de desarrollo activo y una arquitectura comprobada que se ha ganado una fuerte reputación por

confiabilidad, integridad de datos y correctitud. La versión 9.4.4-3 de este sistema se utilizó para desarrollar y administrar la base de datos con la que opera el Spectrasoft.

- **Gitlab:** es un servicio de control de versiones que ofrece alojamiento gratuito, tanto público como privado, de repositorios para proyectos. Se utilizó la versión en línea de este servicio para llevar un control de versiones durante el desarrollo del proyecto.
- **QCustomPlot:** es un *widget open source* para Qt que permite realizar el trazado y la visualización de datos. Este *widget* fue empleado por el Spectrasoft para visualizar la curva de reflectancia difusa y la curva de absorbancia aparente asociadas a los 31 puntos espectrales resultantes de las mediciones.
- **QtXlsx:** es una librería *open source* para Qt que permite leer y escribir archivos con extensión xlsx. Esta librería fue utilizada para implementar en el Spectrasoft la opción de exportar los resultados de una muestra a un archivo portátil, manejable por medio de aplicaciones de hojas de cálculo.

### 4.3.2. Recursos

- **Adaptador RS232-USB:** es un cable adaptador que habilita la comunicación de dispositivos que utilizan puerto serial con computadoras que disponen de puertos USB, creando puertos COM virtuales con las mismas mientras se realiza dicha comunicación. Este cable es utilizado como adaptador para el cable de comunicación RS232 DB-9 hembra a RJ-45 del MiniScan XE Plus, habilitando su utilización en computadoras que no poseen puerto serial.
- **MiniScan XE Plus OCX Kit (MSXE.ocx):** es un archivo diseñado por la empresa HunterLab para controlar y/o realizar mediciones con el

MiniScan XE Plus. Su objetivo es proporcionar a los desarrolladores un componente reutilizable de software que dé acceso a las características comunmente utilizadas por el instrumento.

- **MiniScan XE Plus:** es un instrumento de medición del color creado por la empresa HunterLab, de diseño compacto y portátil, que emplea la técnica de espectroscopía de reflectancia difusa, el cual se puede apreciar en la figura 4.9. Este instrumento mide la cantidad de luz que refleja una muestra dentro de un rango de longitudes de onda que va desde los 400 hasta los 700 nanómetros, generando como resultado 31 puntos espectrales dentro de ese rango, que son el insumo principal del Spectrasoft.



Figura 4.9: *MiniScan XE Plus* (Fuente: HunterLab, 2006).

## 4.4. Comunicación con el MiniScan XE Plus

Para establecer la comunicación entre el MiniScan XE Plus y el Spectrasoft, se recurrió a la documentación del instrumento, en la cual se describe el MSXE.ocx, un archivo que implementa las funciones comúnmente utilizadas por dicho instrumento. Se contactó al personal de soporte técnico de HunterLab por correo electrónico, para solicitarle el código fuente de dicho archivo y la documentación relativa a su utilización que se pudiera proporcionar para la investigación.

Si bien el personal no compartió el código fuente del archivo, sí envió la documentación solicitada y un ejemplo de su uso escrito en Visual Basic for Applications (VBA). Primero se intentó cargar el archivo y utilizarlo directamente en Qt; sin embargo, ocurría un error de compatibilidad de datos al invocar algunas de sus funciones. La solución a este problema fue desarrollar una librería escrita en Visual Basic .NET, con la cual se pueden invocar todas las funciones de este archivo sin problema alguno.

Así pues, por medio del cable adaptador RS232-USB, y empleando la librería escrita en Visual Basic .NET, se logró establecer la comunicación entre el Spectrasoft y el MiniScan XE Plus.

## 4.5. Fórmulas implementadas

A continuación se muestra el código fuente de las fórmulas de óptica y colorimetría que fueron definidas en las bases teóricas, e implementadas en el Spectrasoft. Dichas fórmulas fueron implementadas utilizando el lenguaje de programación orientada a objetos C++, utilizando punto flotante de presición simple para almacenar los resultados, debido a que el MiniScan XE Plus maneja la misma presición en la realización de sus mediciones.

- **Función de índice de eritema:**

---

```
1 //Calcula el indice de eritema
2 float eritema(QVector<float> medicion){
3     //promRojo: promedio ponderado del color rojo
4     float promRojo = (medicion[24]/2.0 + medicion[25]
5         + medicion[26] + medicion[27]/2.0) /3.0;
6
7     //promVerde: promedio ponderado del color verde
8     float promVerde = (medicion[16]/2.0 + medicion[17]
9         + medicion[18]/2.0) /2.0;
10
11    float resultado = 100.0*(log(1.0/promVerde)
12        - log(1.0/promRojo));
13
14    return resultado;
15 }
```

---

■ Función de absorbancia aparente:

---

```
1 //Calcula los datos de absorbancia aparente
2 QVector<float> absorbancia(QVector<float> medicion){
3
4     QVector<float> resultado;
5
6     for(int i = 0; i < 31; ++i)
7         resultado.push_back(100.0 - medicion[i]);
8
9     return resultado;
10 }
```

---

■ Función de coordenadas de cromaticidad CIE xyz:

---

```
1 //Calcula las coordenadas de cromaticidad CIE xyz
2 QVector<float> CIExyz(QVector<float> medicion){
3
4     QVector<float> resultado;
5     QVector<float> XYZ = CIEXYZ(medicion);
6     float x, y, z;
7
8     x = XYZ[0]/(XYZ[0] + XYZ[1] + XYZ[2]);
9     y = XYZ[1]/(XYZ[0] + XYZ[1] + XYZ[2]);
10    z = XYZ[2]/(XYZ[0] + XYZ[1] + XYZ[2]);
11
12    resultado.push_back(x);
13    resultado.push_back(y);
14    resultado.push_back(z);
15
16    return resultado;
17 }
```

---

- Función de valores triestímulo CIE XYZ:

---

```
1 //Calcula los valores triestimulo CIE XYZ
2 QVector<float> CIEXYZ(QVector<float> medicion){
3
4     QVector<float> resultado;
5     float auxK, auxX, auxY, auxZ, k, X, Y, Z;
6
7     auxK = auxX = auxY = auxZ = 0.0;
8
9     //realiza las sumatorias indicadas de las formulas
10    for(int i = 0; i < 31; ++i){
11
12        auxK+= iluCIED65[i]*yCIE10[i];
13        auxX+= medicion[i]*iluCIED65[i]*xCIE10[i];
14        auxY+= medicion[i]*iluCIED65[i]*yCIE10[i];
15        auxZ+= medicion[i]*iluCIED65[i]*zCIE10[i];
16    }
17
18    //calcula la constante k
19    k = 100.0/auxK;
20
21    //calcula los valores triestimulo XYZ
22    X = k*auxX;
23    Y = k*auxY;
24    Z = k*auxZ;
25
26    resultado.push_back(X);
27    resultado.push_back(Y);
28    resultado.push_back(Z);
29
30    return resultado;
31 }
```

---

■ Función de coordenadas CIELAB:

---

```

1 //Calcula las coordenadas de del espacio CIELAB
2 QVector<float> CIELAB(QVector<float> medicion){
3
4     QVector<float> resultado;
5     QVector<float> XYZ = CIEXYZ(medicion);
6     float constante, aux, fXfYfZ[3], L, a, b;
7
8     //calcula la constante utilizada en la formula
9     constante = 24.0/116.0;
10    constante = pow(constante, 3);
11
12    //calcula las funciones X/Xn, Y/Yn, Z/Zn
13    for(int i = 0; i < 3; ++i){
14
15        aux = XYZ[i]/XnYnZn[i];
16
17        if(aux > constante){
18            fXfYfZ[i] = pow(aux, 1.0/3.0);
19        } else{
20            fXfYfZ[i] = (841.0/108.0)*aux + (16.0/116.0);
21        }
22    }
23
24    //calcula las coordenadas L*a*b*
25    L = 116.0*fXfYfZ[1] - 16.0;
26    a = 500.0*(fXfYfZ[0] - fXfYfZ[1]);
27    b = 200.0*(fXfYfZ[1] - fXfYfZ[2]);
28
29    resultado.push_back(L);
30    resultado.push_back(a);
31    resultado.push_back(b);
32
33    return resultado;
34 }
```

---

**■ Función de coeficiente de absorción:**

---

```
1 //Calcula el coeficiente de absorcion
2 QVector<float> absorcion(QVector<float> medicion){
3
4     QVector<float> resultado;
5     float rango, aux, Z, k, a0;
6     int n, grado;
7     bool op = false; //el sistema de ecuaciones a resolver ←
                      tiene solucion
8
9     //son 31 datos, y el grado del polinomio de ajuste es 8
10    n = 31; grado = 8;
11
12    double *x = new double[n];
13    double *y = new double[n];
14
15    //cargando los datos en x, y
16    for(int i = 0; i < n; ++i){
17        x[i] = i;
18        y[i] = medicion.at(i);
19    }
20
21    double **matriz = new double*[grado + 1];
22
23    for (int i = 0; i < grado + 1; ++i)
24        matriz[i] = new double[grado + 2];
25
26    //realizando el ajuste polinomial y calculando los ←
      coeficientes
27    coeficientes(x, y, matriz, grado, n);
28    recorrido(matriz, grado + 1, op);
29
30    //a0 esta en la primera fila de la matriz resultante ←
      del ajuste
31    a0 = matriz[0][grado + 1];
32    Z = 0.2796; k = -7.174;
```

```
33     rango = 400;
34
35     //calculando el coeficiente de absorcion
36     for (int i = 0; i < n; ++i){
37         aux = Z*exp(k*a0)*6.6*pow(10, 11)*pow(rango, -3.3);
38         resultado.push_back(aux);
39         rango+=10;
40     }
41
42     //liberando la memoria dinamica asignada
43     delete x;
44     delete y;
45
46     for (int i = 0; i < grado + 1; ++i)
47         delete matriz[i];
48
49     delete matriz;
50
51     return resultado;
52 }
```

---

## 4.6. Interfaz del software

A continuación se muestran algunas de las ventanas de la interfaz gráfica de usuario del Spectrasoft, que comprenden la ventana principal, la ventana de inicio de sesión, la visualización de algunos de los resultados de una medición realizada, y los detalles de la historia médica de un paciente.

- Ventana principal:

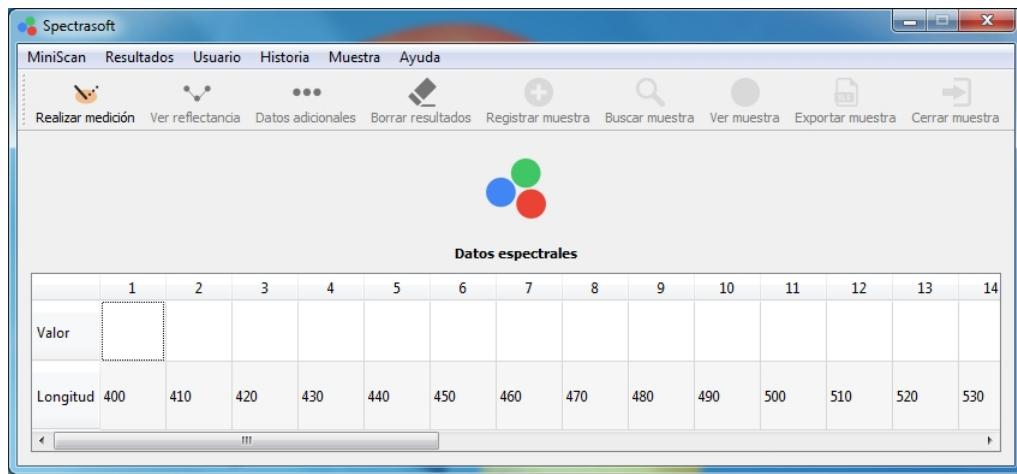


Figura 4.10: Ventana principal (Fuente: Autor).

- Inicio de sesión:

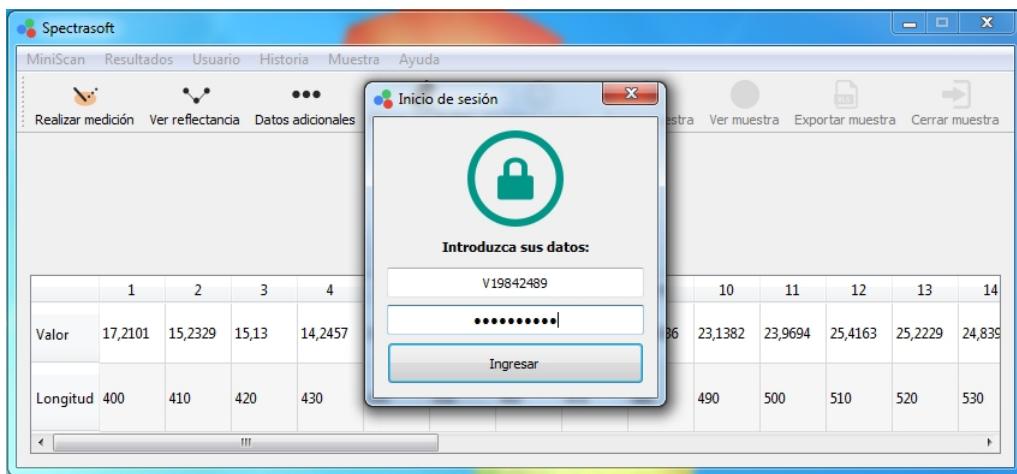


Figura 4.11: Inicio de sesión (Fuente: Autor).

■ Curva de reflectancia:

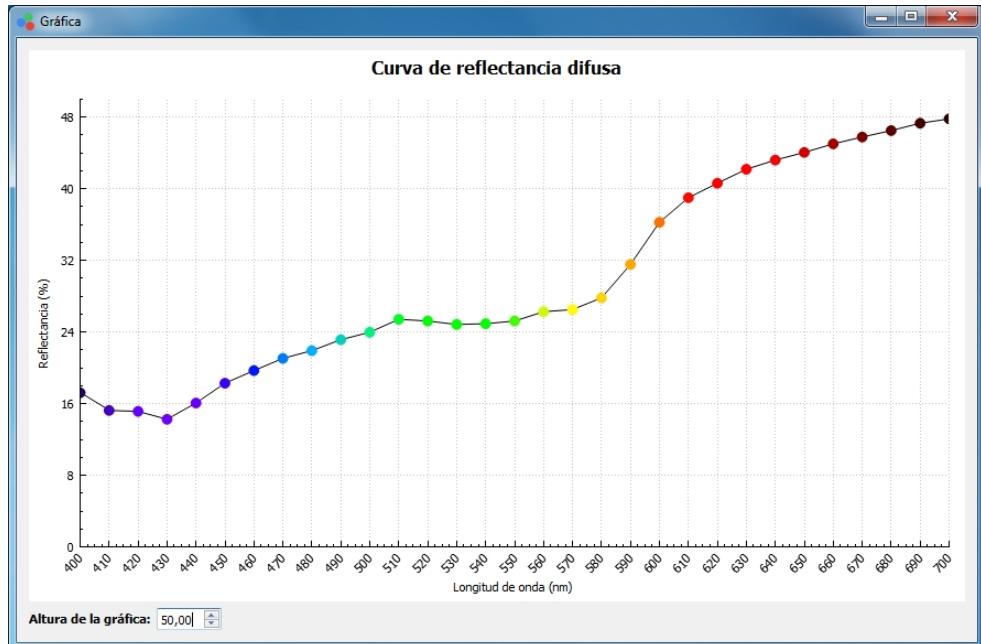


Figura 4.12: *Curva de reflectancia* (Fuente: Autor).

■ Historia médica de un paciente:

Ver historia

Número de la historia: 26

Nombre(s): JOSE

Apellido(s): GUILLERMO

Cédula de identidad: N/A

Fecha de nacimiento: 11-10-2010

Fecha de ingreso: 11-10-2015

Sexo: Masculino

Fototipo cutáneo: III

Listo

Figura 4.13: *Historia médica de un paciente* (Fuente: Autor).

## 4.7. Manuales

Se generó un manual de instalación que detalla todos los pasos que se deben seguir para instalar y configurar todo lo necesario para instalar y ejecutar el Spectrasoft, así como la instalación del mismo. Además se realizó un manual de usuario, en donde se explica con detalle la permisología de los usuarios del Spectrasoft y las funciones que dicho software ofrece. Por último, se hizo un manual para el desarrollador, el cual especifica lo que se necesita para desarrollar en el Spectrasoft, y se describen los archivos de código fuente que conforman dicho proyecto. Estos manuales están disponibles en los anexos A, B y C, respectivamente.

## 4.8. Pruebas realizadas

El desarrollo de un software incluye verificar y validar que éste se encuentre libre de errores y que se haya logrado el objetivo de su diseño. En este sentido, se realizaron pruebas de funcionalidad empleando el modelo de guiones de prueba y de pruebas de aceptación propuestos por Williamson (2001), cuyos resultados permitieron determinar que el software Spectrasoft cumple con todos los requerimientos y objetivos definidos.

Las pruebas de usabilidad se realizaron utilizando las heurísticas de Nielsen (1994), tomando únicamente los ítems de evaluación que se pudieran aplicar en el software y adaptándolos para ese fin. Dichas pruebas de usabilidad mostraron que el software Spectrasoft cumple con el atributo de usabilidad, necesario para ser considerado un software de calidad. Tales pruebas y las constancias de aceptación firmadas por los clientes están disponibles en los anexos comprendidos desde el D, hasta el G.

#### 4.8.1. Cálculo de los valores triestímulo CIE XYZ

Para verificar que la implementación de la fórmula para calcular los valores triestímulo CIE XYZ es correcta, se realizó una medición a la placa de diagnóstico de HunterLab con el MiniScan XE Plus, utilizando el Spectrasoft para calcular los valores triestímulo de la misma. Esta placa proporciona valores triestímulo de control, los cuales fueron leídos de fábrica utilizando el iluminante estándar D65 y el observador estándar de 10 grados. Al comparar los valores triestímulo calculados por el Spectrasoft con los valores triestímulo de control de la placa, se puede observar que los valores se asemejan. La tabla 4.6 muestra los valores comparados.

Tabla 4.6: *Verificación de los valores triestímulo CIE XYZ* (Fuente: Autor).

Valores de control	Valores del Spectrasoft
$X = 18,6$	$X = 17,72$
$Y = 24,5$	$Y = 23,51$
$Z = 20,7$	$Z = 20,01$

#### 4.8.2. Realización de las mediciones

Para corroborar que las mediciones realizadas utilizando con el Spectrasoft generan los mismos resultados que las mediciones realizadas con el HunterLab Universal Software, se realizó la medición de una muestra en una misma zona dos veces, la primera utilizando el Spectrasoft, y la segunda utilizando el HunterLab Universal Software. En las figuras 4.14 y 4.15 se puede observar que las curvas de reflectancia difusa resultantes de las mediciones tienen la misma forma, por lo que las mediciones realizadas con el Spectrasoft son correctas.

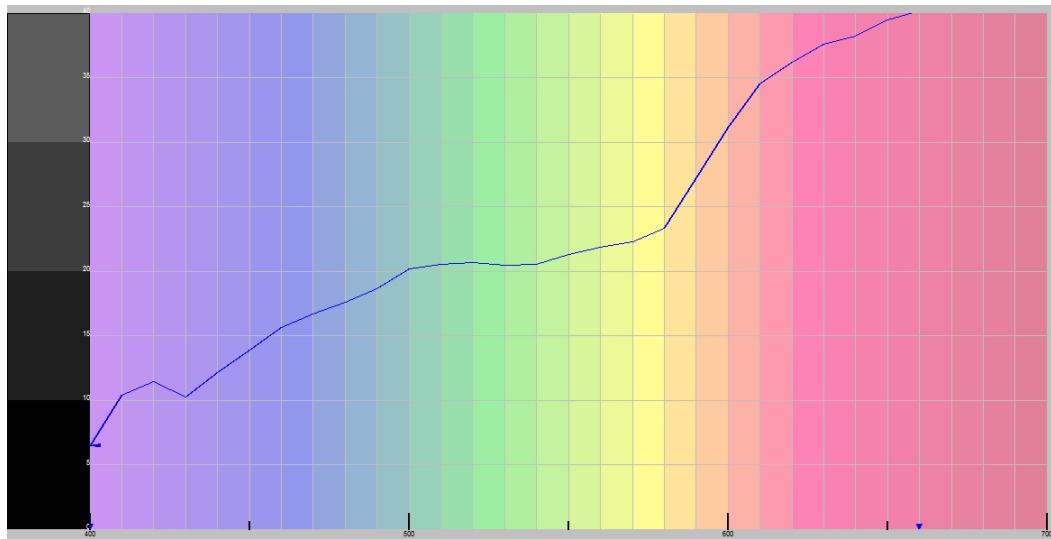


Figura 4.14: *Medición del HunterLab Universal Software* (Fuente: CIMBUC, 2015).

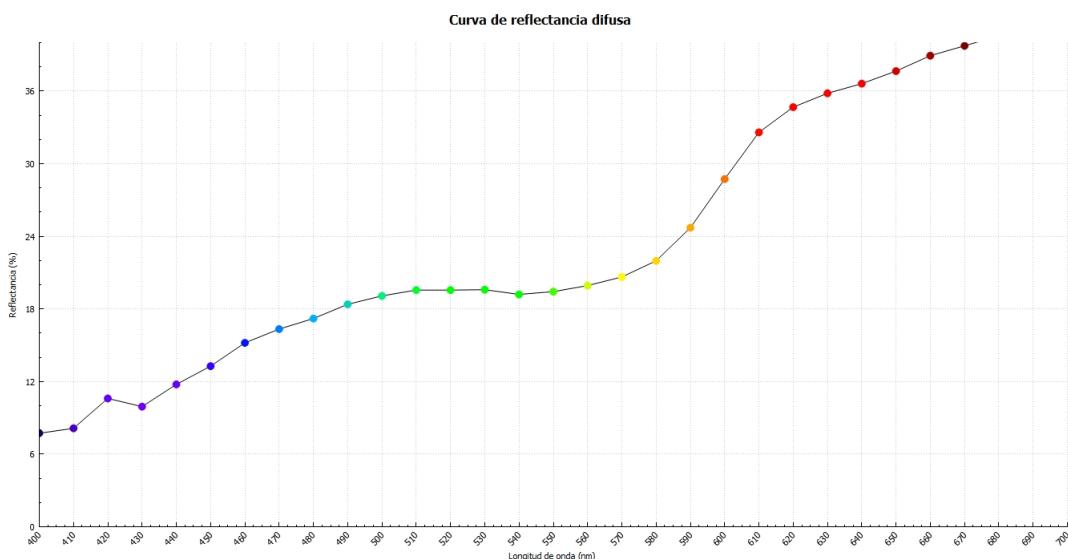


Figura 4.15: *Medición del Spectrasoft* (Fuente: Autor).

#### 4.8.3. Cálculo de las fórmulas restantes

- **Absorbancia aparente:** No hay forma de determinar con exactitud la luz que es absorbida por un medio, por esta razón se asume que la luz que no es reflejada de vuelta al MiniScan XE Plus, debe ser la luz que es aparentemente absorbida. Por esta razón esta fórmula no es verificada.
- **Coordenadas tricromáticas CIE xyz:** La fórmula utilizada para cal-

cular estas coordenadas es una normalización de los valores triestímulo CIE XYZ, y estos últimos ya fueron verificados, por lo que no hace falta realizar la verificación de estas coordenadas.

- **Coordenadas del espacio CIELAB:** La fórmula utilizada para calcular estas coordenadas no es más que la transformación de los valores triestímulo CIE XYZ, razón por la cual no hace falta realizar su verificación.
- **Coeficiente de absorción:** La fórmula utilizada para determinar este coeficiente es la definida por Narea et al., (2015), en cuyo artículo deja documentadas las pruebas y los análisis relacionados con la misma, por este motivo esta fórmula no es verificada.
- **Índice de eritema:** La fórmula utilizada para determinar este índice es la definida por Wagner et al., (2002), en cuyo artículo deja documentadas las pruebas y los análisis relacionados con la misma, por esta razón no es verificada.

## 4.9. Colores utilizados en el software

Es importante destacar que los colores utilizados en las gráficas generadas por el Spectrasoft son referencias visuales, por lo tanto no son una reproducción real de los colores que representan. De la misma manera, los colores utilizados para representar los fototipos de piel en el Spectrasoft son solamente referencias visuales de la escala propuesta por Fitzpatrick (1988).

# **Capítulo V**

## **Conclusiones y recomendaciones**

### **5.1. Conclusiones**

La elaboración de la presente investigación ha cumplido los objetivos planteados. Para lograr esto fue necesario un análisis detallado de la bibliografía, la revisión de algunas investigaciones previas, y el estudio riguroso del material proporcionado por el personal de soporte técnico de la empresa HunterLab.

El aporte general de este trabajo de investigación se centra en proveer un software libre para operar el MiniScan XE Plus, el cual dispone de las funciones necesarias para que los dermatólogos puedan establecer diagnósticos de patologías dermatológicas en pacientes.

Desde el comienzo del proceso de desarrollo del software se optó por trabajar con un servicio gratuito de control de versiones, lo cual permitió tener almacenado el código fuente del software de manera centralizada. Esto ayudó a tener una mejor organización durante el desarrollo.

Debido a las limitaciones encontradas durante la investigación, se concluye que es necesaria la utilización de algunos archivos de HunterLab para lograr la

comunicación entre el software resultante y el MiniSan XE Plus. Adicionalmente, debido a esta limitación el software resultante no puede captar ni interpretar las señales de los botones del MiniScan XE Plus, ya que estos archivos no ofrecen esta característica para ser utilizada fuera del HunterLab Universal Software.

La instalación de este software no es tan simple como podría llegar a ser, como consecuencia de la necesidad de utilizar algunos archivos del HunterLab. El software resultante no puede habilitarse para ser multiplataforma debido a esta razón.

Durante las pruebas de funcionalidad y usabilidad realizadas al software se hizo notorio el nivel de aceptación y la satisfacción de los clientes a los que iba dirigido. Adicionalmente, se realizó un manual de usuario para la correcta utilización del software, que explica detalladamente con tablas y con imágenes la permisología de sus usuarios y las funciones que ofrece, por lo que su curva de aprendizaje es baja.

Durante el transcurso del presente trabajo de investigación ocurrió un intercambio multidisciplinario, debido a que se utilizó la computación para implementar teorías de la física, óptica y colorimetría, y así resolver un problema en el área de la medicina dermatológica.

En definitiva, se concluye que el software resultante cumple con todos los objetivos establecidos en esta investigación, ajustándose a las necesidades de los dermatólogos, garantizando un mejor aprovechamiento del MiniScan XE Plus, creando una base sobre la cual se pueden realizar trabajos futuros que modifiquen, mejoren y extiendan dicho software.

## 5.2. Recomendaciones

De acuerdo a las conclusiones alcanzadas con el trabajo, se han generado una serie de recomendaciones, las cuales se presentan a continuación.

- Permitir la visualización, consulta y exportación de varias muestras al mismo tiempo.
- Desarrollar un archivo controlador para el MiniScan XE Plus que no dependa del kit MSXE.ocx del HunterLab, para así simplificar el proceso de instalación del Spectrasoft, lograr que el mismo sea capaz de captar e interpretar las señales de los botones del MiniScan XE Plus, y posibilitar que éste sea multiplataforma.
- Incluir la fórmula desarrollada por los investigadores del CIMBUC para el cálculo del coeficiente de esparcimiento de la epidermis, la cual no estuvo lista durante el tiempo en el que se llevó a cabo este trabajo de investigación.
- Crear una nueva base de datos que habilite la gestión de muestras experimentales para los investigadores del CIMBUC.
- Adaptar el Spectrasoft a una arquitectura de modelo cliente-servidor para permitir la conexión con bases de datos remotas en sistemas distribuidos.
- Disponer de un ambiente *QA* para realizar pruebas de rendimiento y de base de datos al Spectrasoft, previas a su puesta en producción.
- Incluir la carga de muestras por archivo al Spectrasoft.

# Referencias

- Baskerville, R. L. (1999). «*investigating information systems with action research*». Atlanta – Georgia, Estados Unidos: Association for Information Systems.
- Bersha, K. S. (2010). «*spectral imaging and analysis of human skin*». Universidad del Este de Finlandia, Finlandia.
- CIE. (2004). «*cie 15: Technical report: Colorimetry, 3rd edition*». Viena, Austria.
- CIE. (2015). «*commission internationale de l'éclairage, international commission on illumination*». Viena, Austria. Descargado de <http://www.cie.co.at/index.php>
- Fitzpatrick, T. (1988). «*the validity and practicality of sun-reactive skin types i through vi*». Arch Dermatol.
- Gitlab. (s.f.). «*gitlab: Create, review, and deploy code together*». Descargado de <https://about.gitlab.com/>
- Hundermark, P. (2015). «*do better scrum*». Agile42 - The Agile Coaching Company.
- HunterLab. (2001). «*universal software versions 4.10 and above user's manual*». Reston – Virginia, Estados Unidos: Hunter Associates Laboratory.
- HunterLab. (2006). «*miniscan xe plus user's guide version 2.4*». Reston –

- Virginia, Estados Unidos: Hunter Associates Laboratory.
- HunterLab. (2008). «*applications note*». Reston – Virginia, Estados Unidos: Hunter Associates Laboratory.
- HunterLab. (2015). «*hunterlab, the world's true measure of color*». Reston – Virginia, Estados Unidos: Hunter Associates Laboratory. Descargado de <http://www.hunterlab.com/about-us.html>
- Kroll, P., y Kruchten, P. (2003). «*the rational unified process made easy: A practitioner's guide to the rup*». Boston – Massachusetts, Estados Unidos: Addison-Wesley.
- LTD, K. D. (2010). «*absorption spectrum. (n.d.) random house kernerman websters college dictionary*». Autor.
- Microsoft. (s.f.). «*a fully-featured, extensible ide*». Descargado de <https://www.visualstudio.com/products/visual-studio-community-vs>
- Narea, F., Vivas, S., y Muñoz, A. (2015). «*recuperación del coeficiente de absorción de la epidermis en la piel humana*». Universidad de Carabobo, Venezuela: Sociedad Española de Óptica.
- Nielsen, J. (1994). «*heuristic evaluation. in nielsen, j., and mack, r.l. (eds.), usability inspection methods*». Nueva York, Estados Unidos: John Wiley & Sons.
- Pérez, A. D. (2012). «*estudio de la reflexión Óptica difusa en tejido biológico*». Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, México.
- PostgreSQL. (s.f.). «*postgresql: The world's most advanced open source database*». Descargado de <http://www.postgresql.org/about/>
- QCustomPlot. (s.f.). «*a qt c++ widget for plotting and data visualization*». Des-

- cargado de <http://www.qcustomplot.com/index.php/introduction>
- Qt. (s.f.). «*qt, a cross-platform framework for application development*». Descargado de [https://wiki.qt.io/About\\_Qt](https://wiki.qt.io/About_Qt)
- QtXlsx. (s.f.). «*a qt library to read and write excel files*». Descargado de <http://www.qtxlsx.debao.me/>
- Research, M. T. (s.f.). «*usb to serial adapters wiki*». Descargado de <http://www.usb-serial-adapter.org/>
- Schanda, J. (2007). «*colorimetry: understanding the cie system*». Hoboken – Nueva Jersey, Estados Unidos: John Wiley & Sons.
- Schwaber, K., y Sutherland, J. (2013). «*the definitive guide to scrum: The rules of the game*».
- Sommerville, I. (2005). «*ingeniería del software*». Madrid, España: Pearson Education.
- Wagner, J., Jovel, C., Norton, H., Parra, E., y Shriver, M. (2002). «*comparing quantitative measures of erythema, pigmentation and skin response using reflectometry*». Universidad del Estado de Pensilvania, Estados Unidos: Pigment Cell Res.
- Williamson, A. (2001). «*insite, information architecture web services methodology*». Waitakere, Nueva Zelanda: Wairua Consulting. Descargado de <http://es.slideshare.net/joseglozda/insite>

## **Anexos**

**Anexo A: Manual de instalación**

## **Requerimientos del sistema**

### **1. Requerimientos de hardware**

- Procesador de 1 gigahertz (GHz) o superior.
- 1 gigabyte (GB) de memoria RAM o más.
- Resolución de pantalla de 1024x768 o superior.

### **2. Requerimientos de arquitectura**

- Arquitectura de 32 bits o de 64 bits.

### **3. Requerimientos del sistema operativo**

- Sistema operativo Microsoft Windows 7 Service Pack 1 o superior.

### **4. Requerimientos de software**

- Microsoft .NET framework 4 o superior.
- Microsoft Internet Explorer 10 o superior.

## Acciones previas

1. **Controlador para el adaptador serial-USB:** conecte el MiniScan XE Plus utilizando el cable adaptador serial-USB, luego instale el paquete denominado «PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v1.10.0», dejando todas las opciones de instalación por defecto.
2. **Paquete MSXP-CFLX Utility:** instale el paquete denominado «MSXP-CFLX Utility», ejecutándolo como administrador y dejando todas las opciones de instalación por defecto.
3. **Carpeta MSXEBridge:** copie la carpeta «MSXEBridge» en el disco local C, en la ruta «C:\».
4. **Versiones de los paquetes a instalar:**
  - Visual Studio 2013 community/professional/ultimate.
  - PostgreSQL 9.4.4-3.

## Instalación de Visual Studio

Ejecute la instalación de Visual Studio como administrador. Seleccione la opción «Acepto los términos de licencia y la declaración de privacidad.» y haga click en el botón «Siguiente» (véase la figura 1.1).

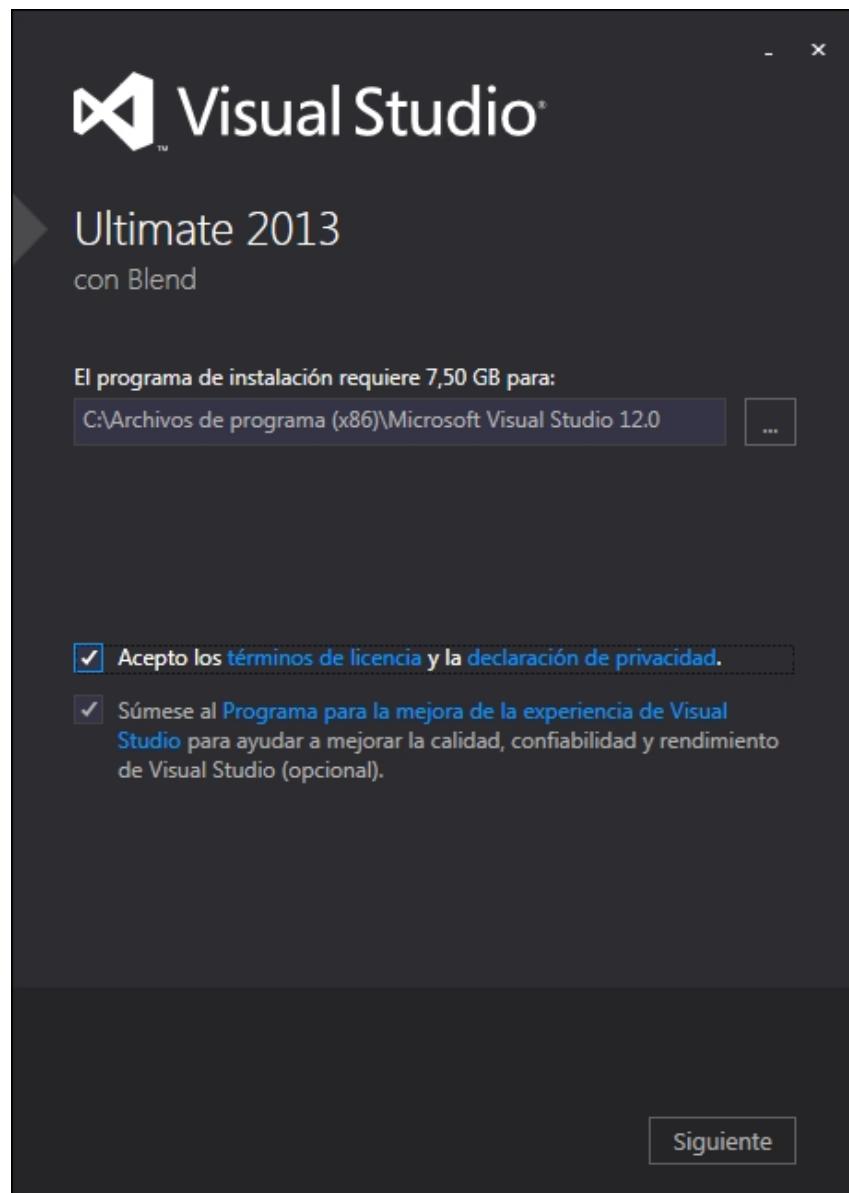


Figura 1.1: Inicio de instalación de Visual Studio

Deje todas las opciones por defecto de «Características opcionales para instalar:» y haga click en el botón «INSTALAR» (véase la figura 1.2).

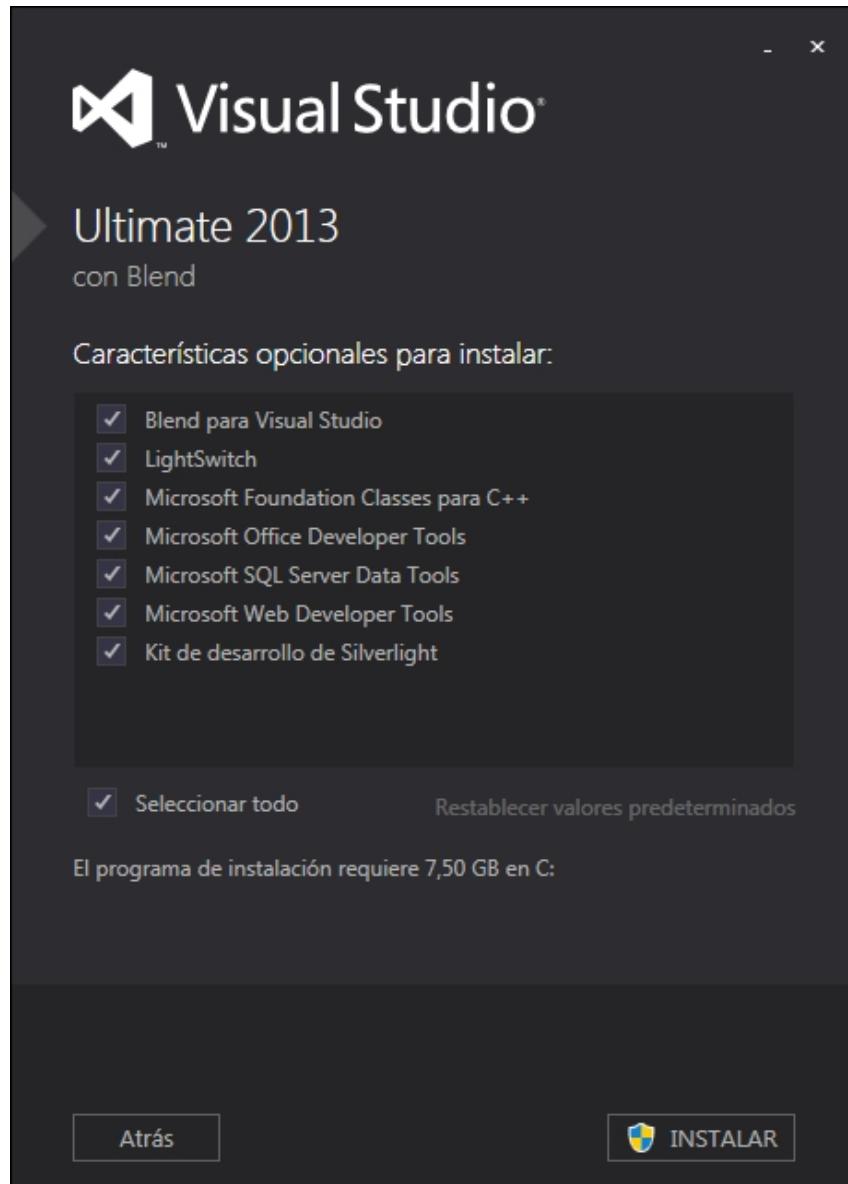


Figura 1.2: Características opcionales de Visual Studio

Espere a que el proceso de instalación finalice (véase la figura 1.3).

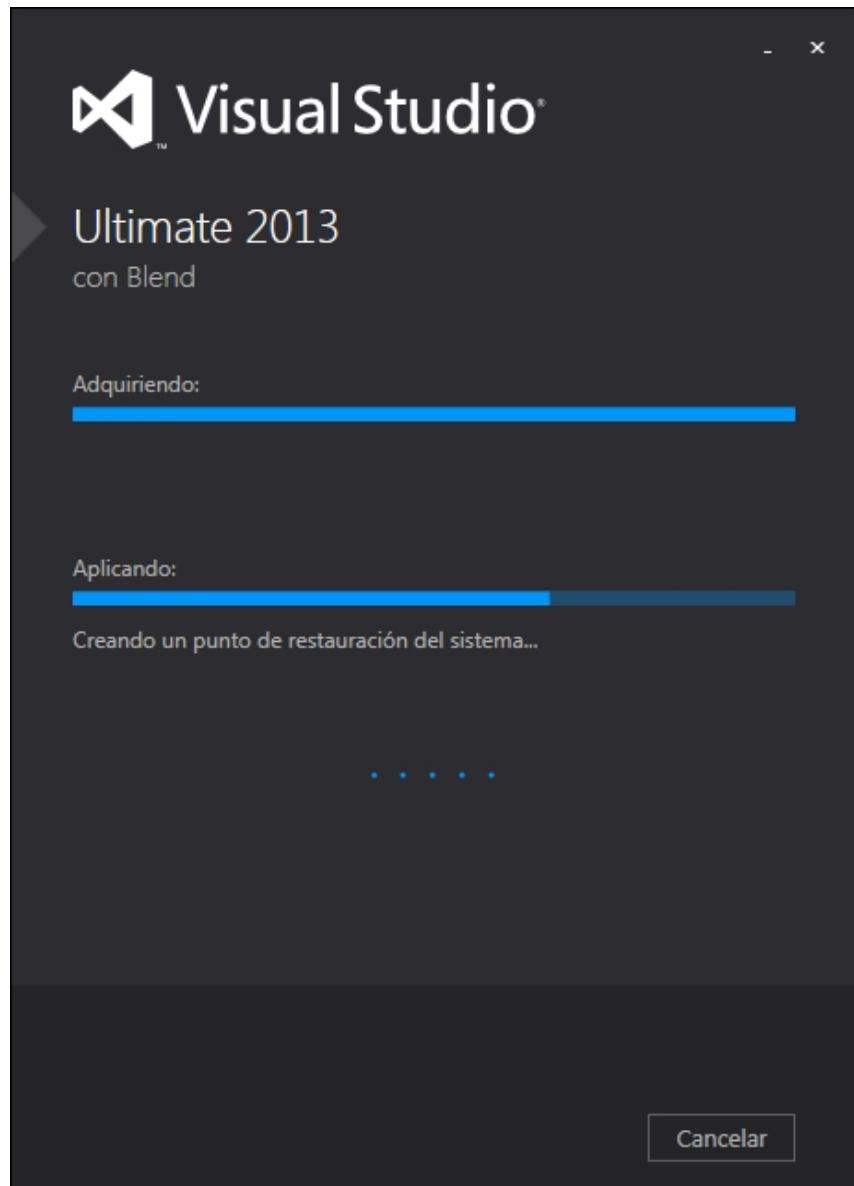


Figura 1.3: Progreso de la instalación de Visual Studio

Después de finalizar la instalación, no inicie Visual Studio, haga click en el botón con forma de equis (x) en la esquina superior para cerrar la ventana (véase la figura 1.4).

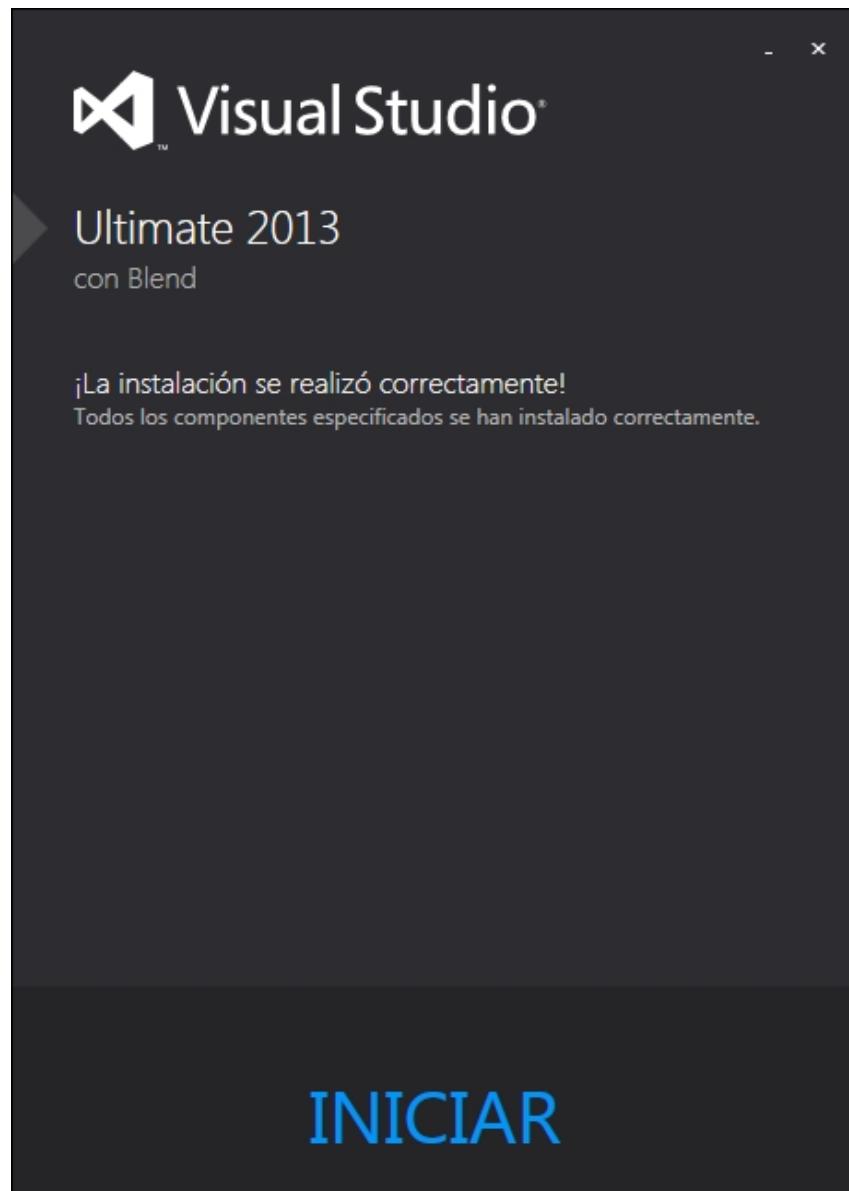


Figura 1.4: Cerrar ventana de instalación de Visual Studio

## Instalación de PostgreSQL

Ejecute la instalación de PostgreSQL como administrador. Haga click en el botón «Siguiente» (véase la figura 1.5).



Figura 1.5: Inicio de instalación de PostgreSQL

Deje la ubicación del directorio de instalación por defecto y haga click en el botón «Siguiente» (véase la figura 1.6).



Figura 1.6: Directorio de instalación de PostgreSQL

Deje la ubicación del directorio de datos por defecto y haga click en el botón «Siguiente» (véase la figura 1.7).



Figura 1.7: Inicio de datos de PostgreSQL

Introduzca una contraseña de su preferencia, guárdela en un lugar seguro y haga click en el botón «Siguiente» (véase la figura 1.8).

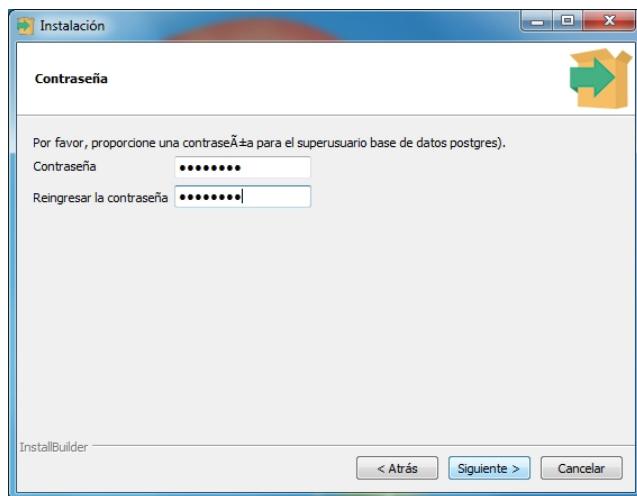


Figura 1.8: Contraseña para el superusuario de PostgreSQL

Deje el número del puerto por defecto y haga click en el botón «Siguiente» (véase la figura 1.9).

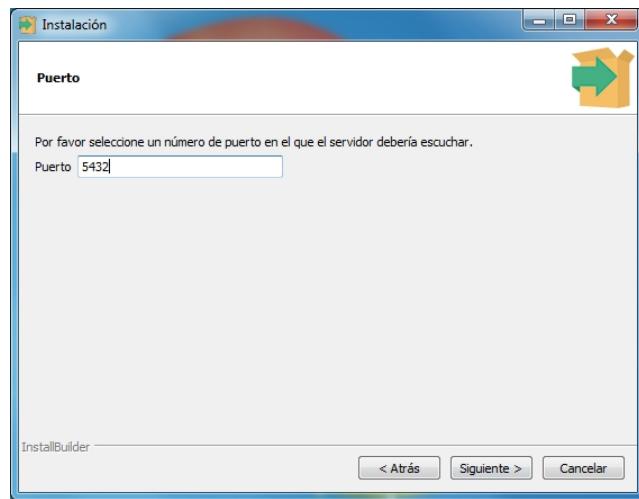


Figura 1.9: Número de puerto para PostgreSQL

Deje la configuración regional por defecto y haga click en el botón «Siguiente» (véase la figura 1.10).

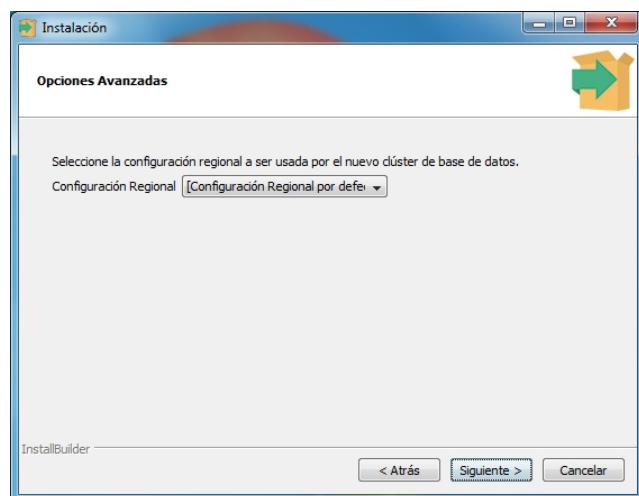


Figura 1.10: Configuración regional para PostgreSQL

Haga click en el botón «Siguiente» para empezar el proceso de instalación y espere a que finalice (véase las figuras 1.11 y 1.12).

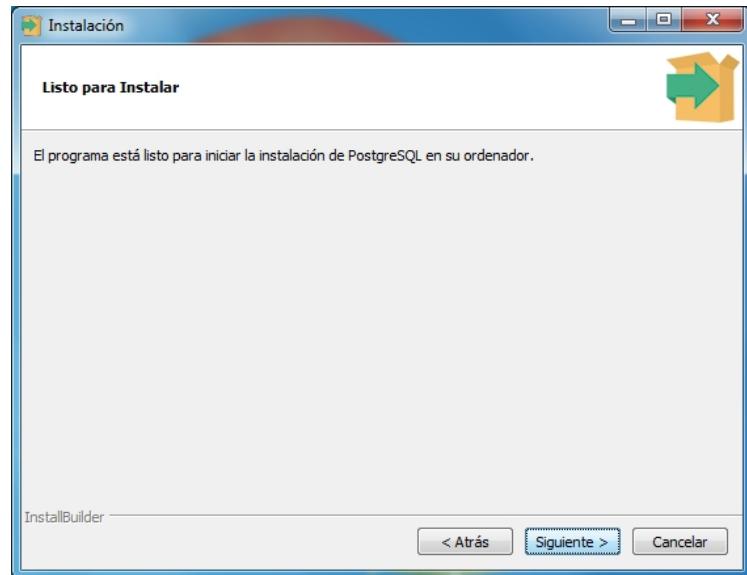


Figura 1.11: Inicio de la instalación de PostgreSQL

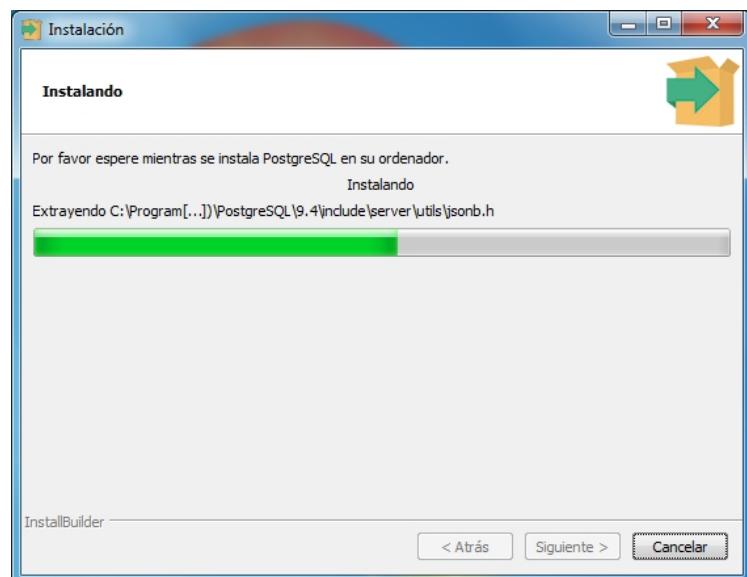


Figura 1.12: Proceso de instalación de PostgreSQL

Después de finalizar la instalación, asegúrese de que la opción «Lanzar Stack Builder al finalizar» no esté seleccionada, y por último haga click en el botón «Terminar» (véase la figura 1.13).



Figura 1.13: Finalización de la instalación de PostgreSQL

## Configuración de Visual Studio

Ejecute el software Visual Studio como administrador. En caso de que al iniciar se le pregunte si desea iniciar sesión, elija la opción «De momento no, quizás más tarde» (véase la figura 1.14).



Figura 1.14: Vista de inicio de Visual Studio

En el menú «ARCHIVO» entre al submenú «Abrir» y haga click en la opción «Proyecto o solución...» (véase la figura 1.15).

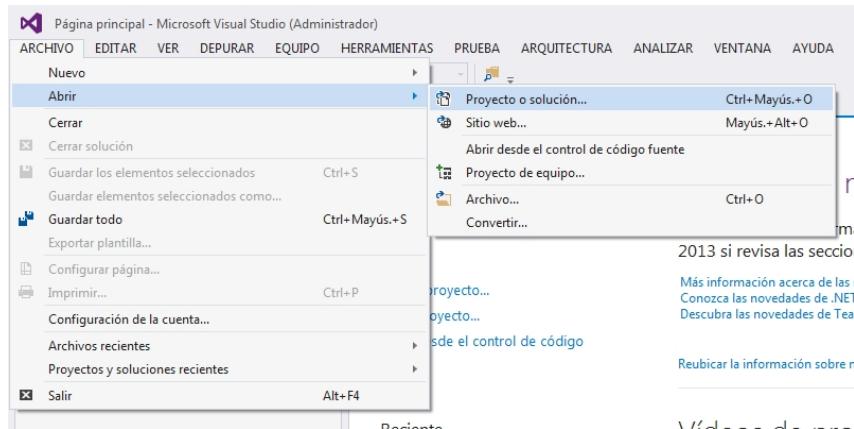


Figura 1.15: Abrir proyecto

## Anexo A. Manual de instalación

---

En la carpeta «MSXEBridge» ubicada en el disco «C:\», seleccione el archivo «MSXEBridge» y haga click en el botón «Abrir» (véase la figura 1.16).

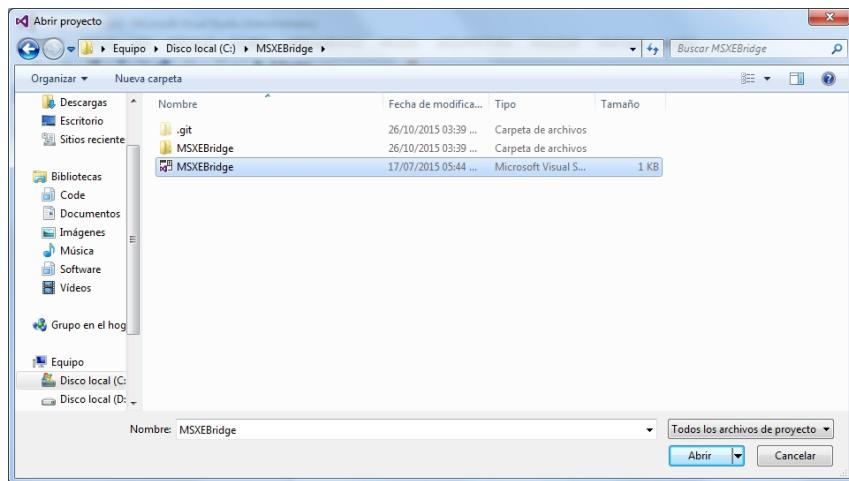


Figura 1.16: Buscar el archivo MSXEBridge

En la parte derecha de Visual Studio, haga click con el botón derecho en «MSXEBridge» y seleccione la opción «Propiedades» (véase la figura 1.17).

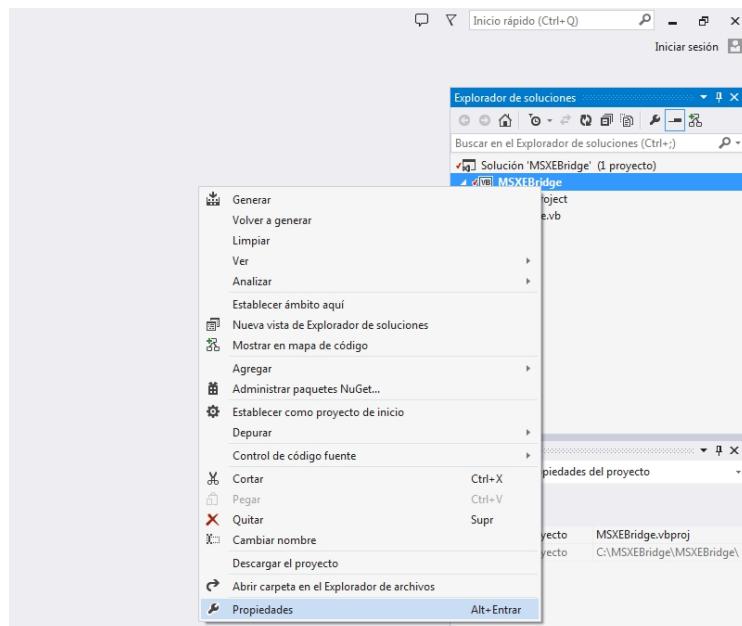


Figura 1.17: Propiedades de MSXEBridge

## Anexo A. Manual de instalación

Haga click al botón «Información de ensamblado...», asegúrese de que la opción «Crear ensamblado visible a través de COM» esté seleccionada, y haga click en el botón «Aceptar» (véase la figura 1.18).

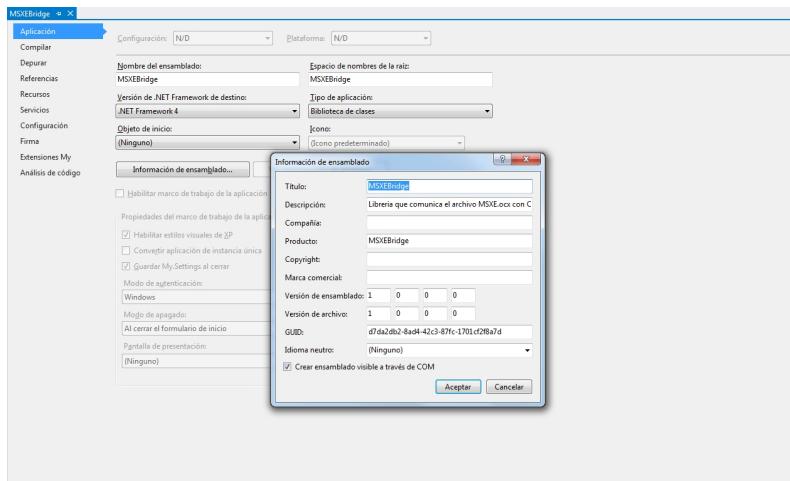


Figura 1.18: Ensamblado de MSXEBridge

Haga click en la pestaña «Compilar» y asegúrese de que la opción «Registrar para interoperabilidad COM» esté seleccionada (véase la figura 1.19).

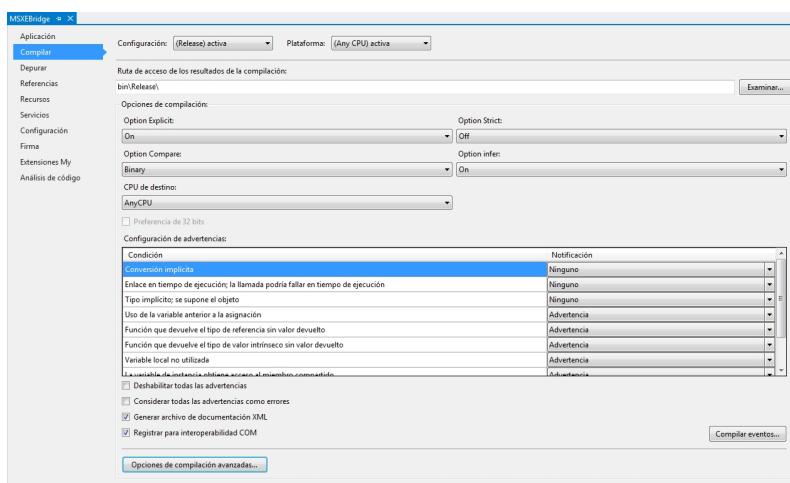


Figura 1.19: Interoperabilidad de MSXEBridge

En el menú «COMPILAR», haga click en la opción «Compilar solución» (véase la figura 1.20).

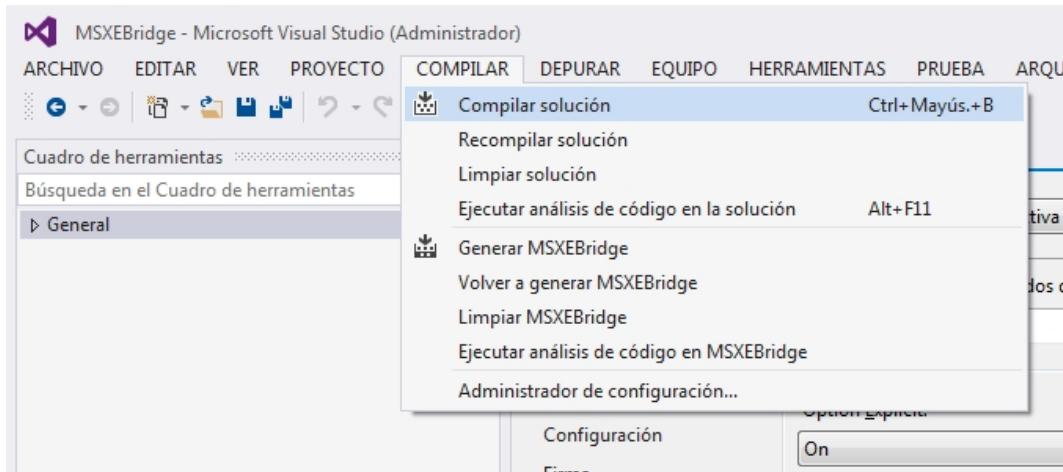


Figura 1.20: Compilar MSXEBridge

En la parte inferior de Visual Studio podrá ver que la compilación finalizó correctamente (véase la figura 1.21). Por último, cierre el software Visual Studio.

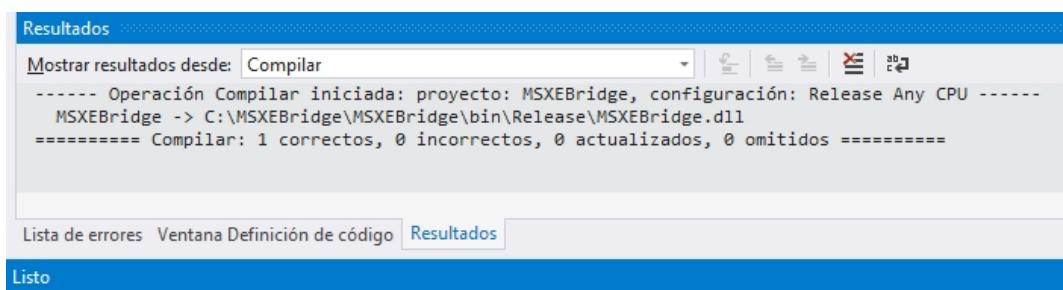


Figura 1.21: Resultados de la compilación

Es importante destacar que los pasos seguidos previamente sólo se deben realizar una vez, y no es necesario que ejecute Visual Studio posteriormente para ejecutar el Spectrasoft.

## Configuración de PostgreSQL

Ejecute el software pgAdmin como administrador (véase la figura 1.22).

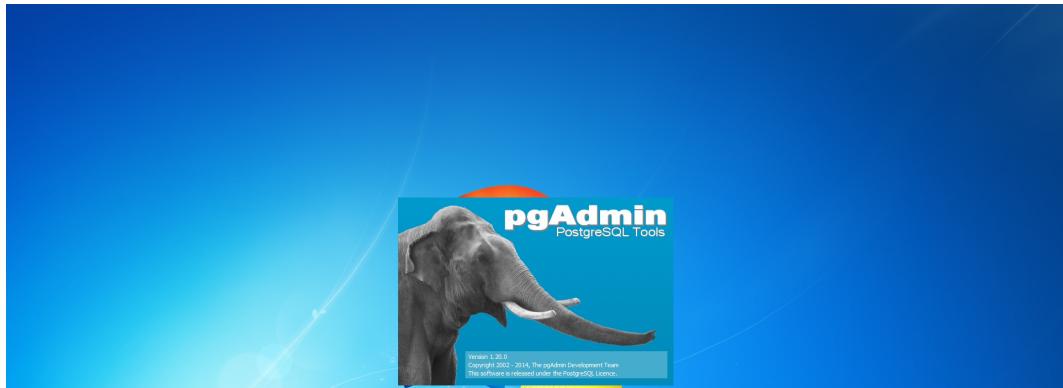


Figura 1.22: Vista de inicio de pgAdmin

Para accesar al servidor, haga doble click en la opción «PostgreSQL (localhost:5432)», e introduzca la contraseña que estableció durante el proceso de instalación (véase la figura 1.23).

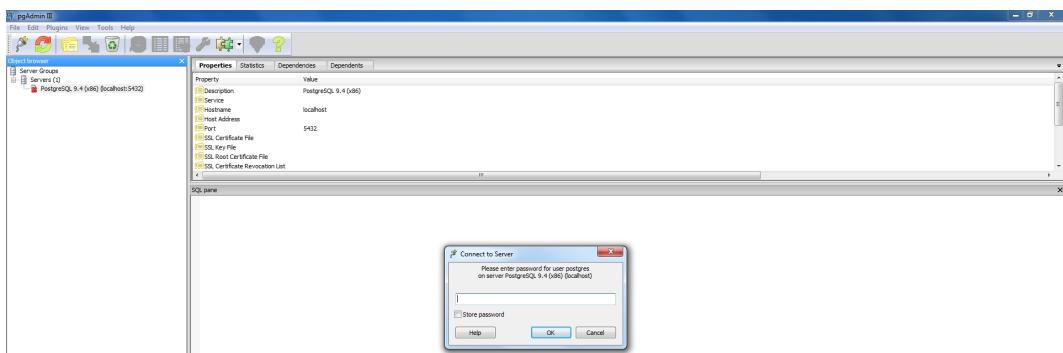


Figura 1.23: Acceso al servidor

Haga click derecho en el menú «Login Roles» y seleccione la opción «New Login Role...» (véase la figura 1.24).

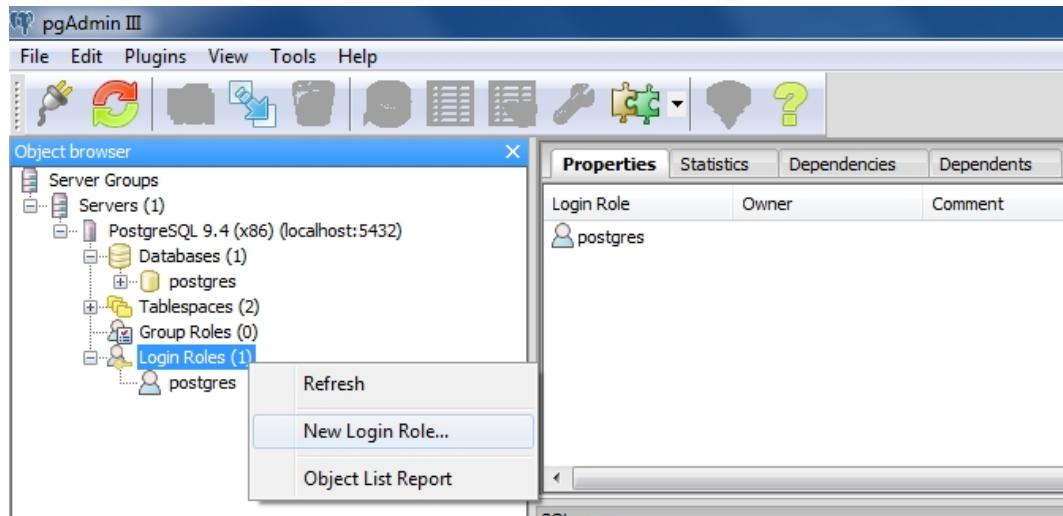


Figura 1.24: Crear nuevo rol

Introduzca «CIMBUC» en «Role name» (véase la figura 1.25).

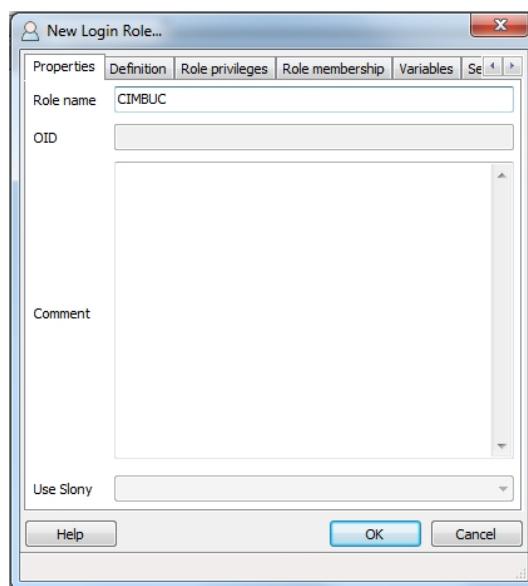


Figura 1.25: Nombre del rol

Haga click en la pestaña «Definition» e introduzca «CIMBUC» como la contraseña del rol (véase la figura 1.26).

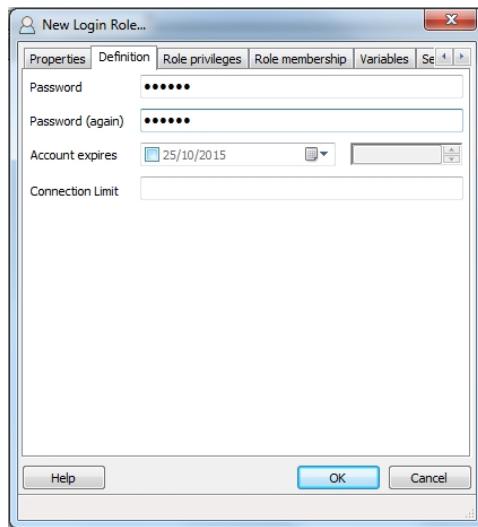


Figura 1.26: Contraseña del rol

Haga click en la pestaña «Role privileges», seleccione todas las opciones de privilegios disponibles para el rol y haga click en el botón «OK» (véase la figura 1.27).

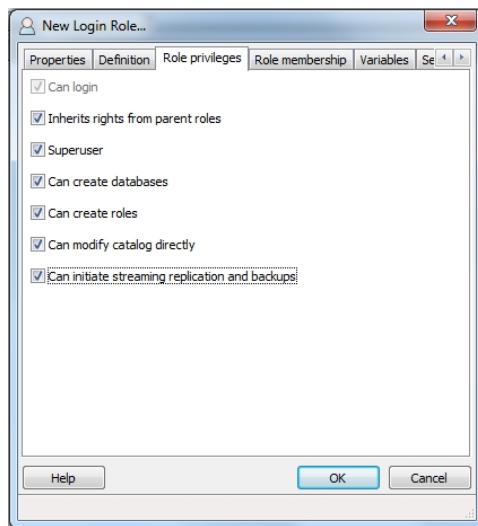


Figura 1.27: Privilegios del rol

Haga click derecho en el menú «Databases» y seleccione la opción «New Database...» (véase la figura 1.28).

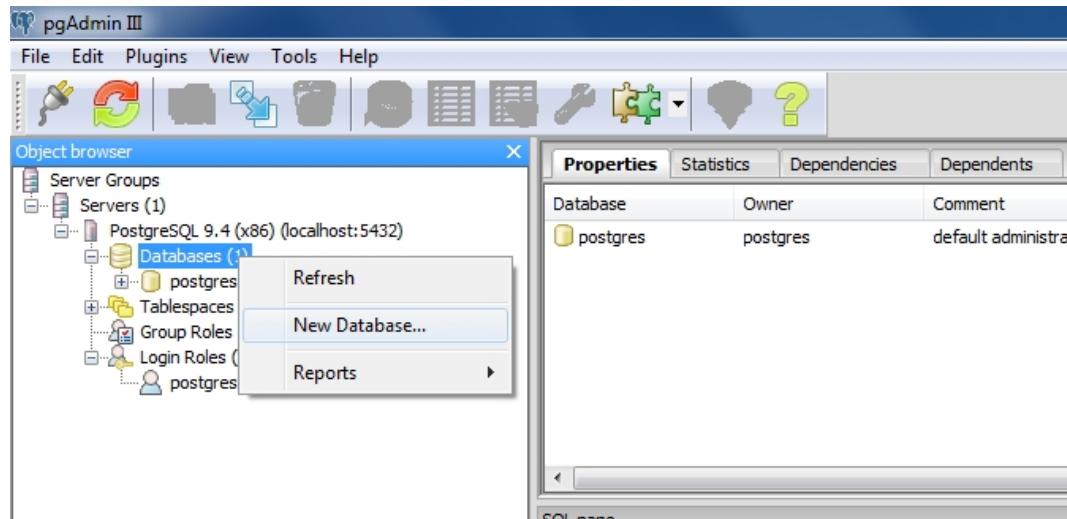


Figura 1.28: Crear nueva base de datos

Introduzca «CIMBUC» en «Name» y haga click en el botón «OK» (véase la figura 1.29).

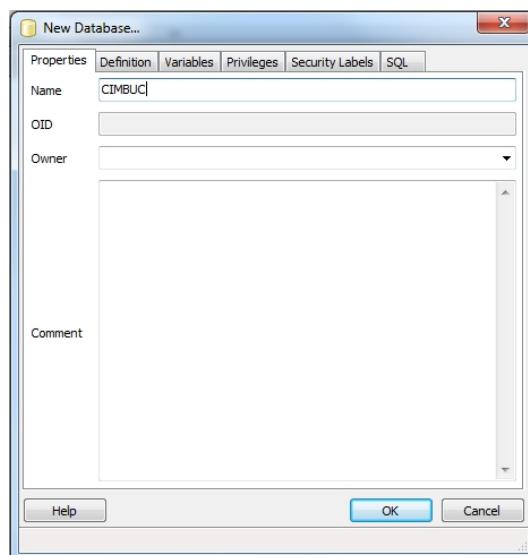


Figura 1.29: Nombre de la base de datos

Haga click derecho en la base de datos «CIMBUC» y seleccione la opción «Restore...» (véase la figura 1.30).

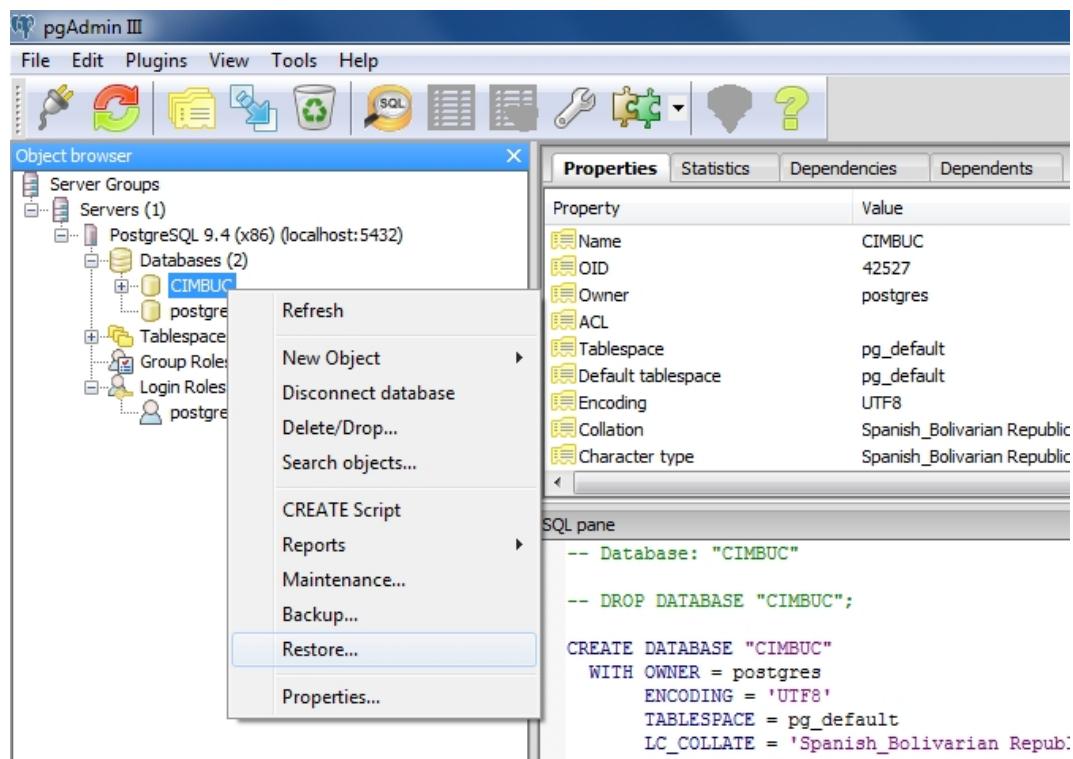


Figura 1.30: Opción de restauración de la base de datos

Haga click en el botón «...» para buscar el archivo de respaldo de la base de datos (véase la figura 1.31).

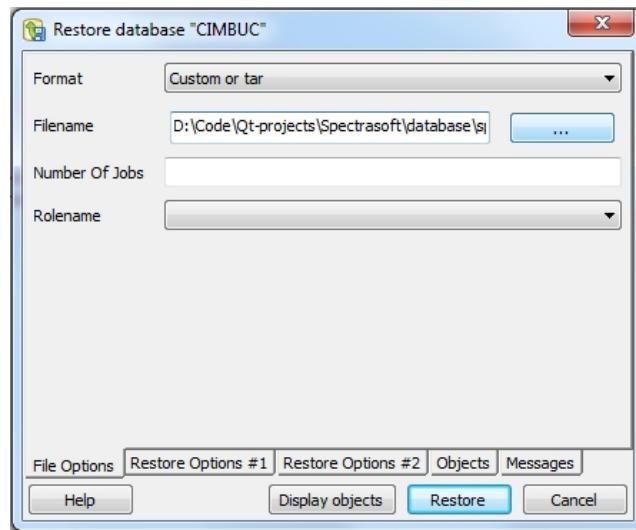


Figura 1.31: Ventana de restauración de la base de datos

En la carpeta con los paquetes de instalación, busque y seleccione el archivo «spectradb.backup», y haga click en el botón «Abrir» (véase la figura 1.32).

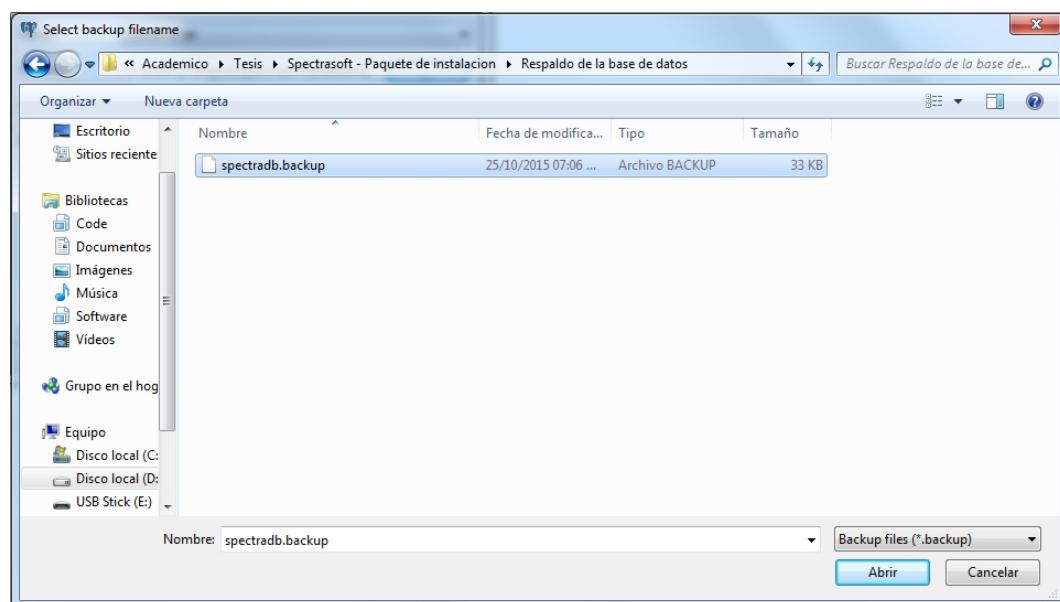


Figura 1.32: Buscar el archivo de respaldo

De vuelta a la ventana de restauración, haga click en la lista desplegable de «Rolename» y seleccione la opción «CIMBUC» (véase la figura 1.33). v

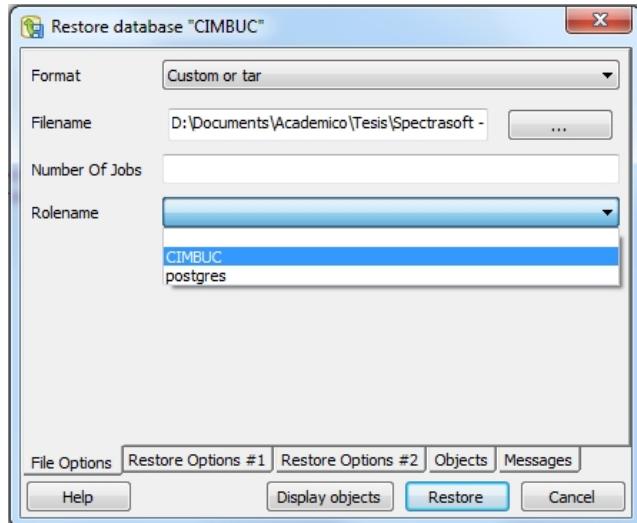


Figura 1.33: Rol de restauración de la base de datos

Haga click en la pestaña «Restore Options #1» y en el grupo «Sections» seleccione las opciones «Pre-data», «Data» y «Post-data», luego haga click en el botón «Restore» (véase la figura 1.34).

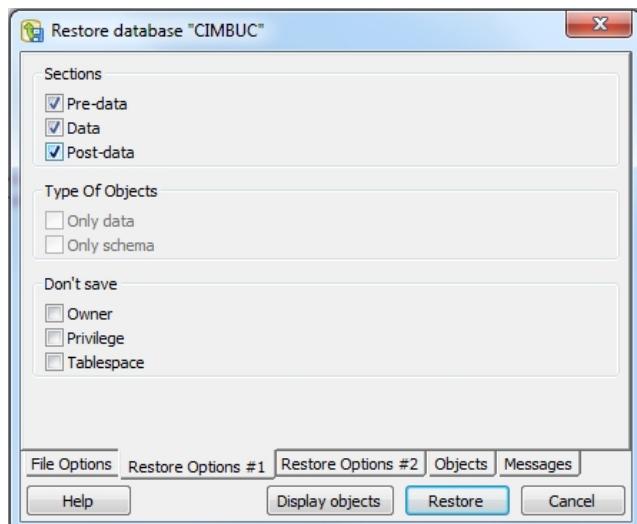


Figura 1.34: Opciones de restauración de la base de datos

En la misma ventana haga click en botón «Done», y por último cierre el software pgAdmin (véase la figura 1.35).

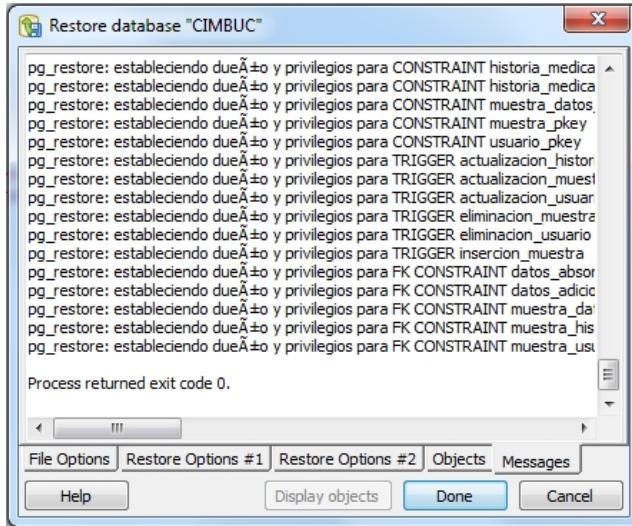


Figura 1.35: Restauración de la base de datos completa

Es importante destacar que los pasos seguidos previamente sólo se deben realizar una vez, y no es necesario que ejecute pgAdmin posteriormente para ejecutar el Spectrasoft.

La base de datos posee un usuario administrador por defecto para iniciar sesión y trabajar con el Spectrasoft, sus datos de ingreso son los siguientes:

- **Cédula de identidad:** V00000000
- **Contraseña:** 12345Admin

Luego de iniciar sesión en el Spectrasoft con este usuario, puede crear otro usuario administrador de su preferencia y eliminar éste.

## Instalación del Spectrasoft

Ejecute el instalador «setup-spectrasoft» y haga click en el botón «Next», dejando todas las opciones por defecto hasta llegar al acuerdo de licencia (véase la figura 1.36).

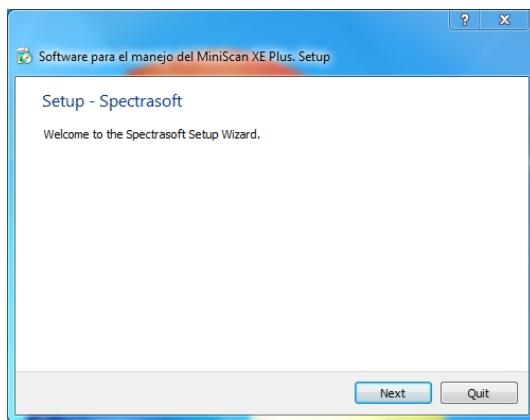


Figura 1.36: Instalador del Spectrasoft

En la ventana «License Agreement», seleccione la opción «I accept the license» y haga click en el botón «Next» (véase la figura 1.37). Deje las siguientes opciones por defecto hasta llegar la opción de instalar.



Figura 1.37: Licencia del Spectrasoft

En la ventana «Ready to Install» haga click en el botón «Install» (véase la figura 1.38).

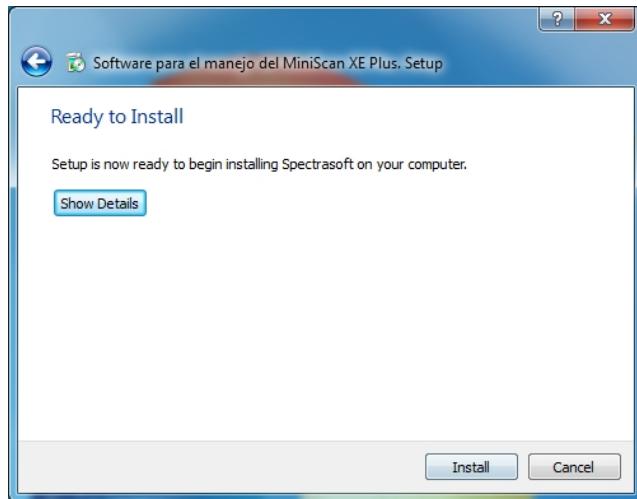


Figura 1.38: Instalar el Spectrasoft

En la ventana «Completing the Spectrasoft Wizard» haga click en el botón «Finish» (véase la figura 1.39).

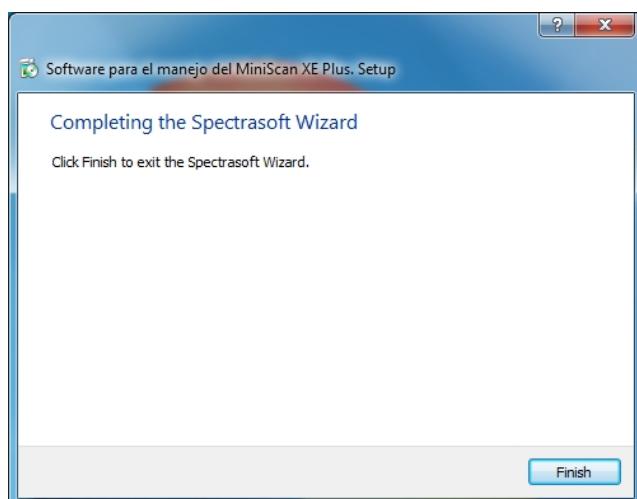


Figura 1.39: Finalizar la instalación

Por último, para ejecutar el Spectrasoft abra el menú de inicio de Windows y haga click en la opción «Spectrasoft» (véase la figura 1.40).

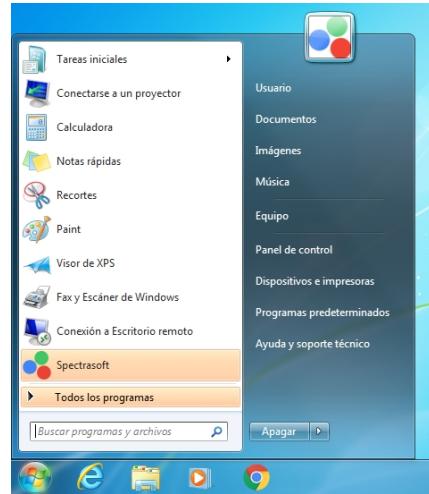


Figura 1.40: Ejecutar el Spectrasoft

Si desea entrar al menú del Spectrasoft, abra el menú de inicio de Windows, haga click en la opción «Todos los programas», busque la carpeta llamada «Spectrasoft» y seleccionela (véase la figura 1.41).

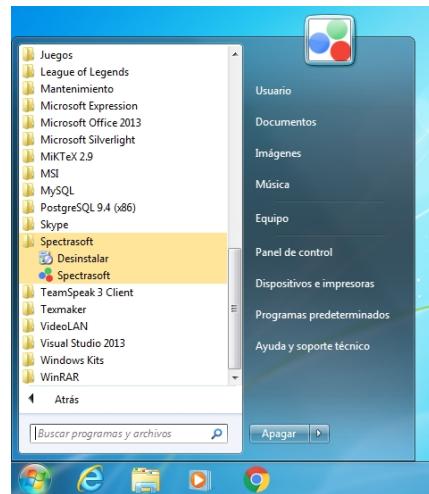


Figura 1.41: Menú del Spectrasoft

## Anexo B: Manual de usuario

### Introducción

El Spectrasoft es un software de código abierto para el manejo del MiniScan XE Plus, el cual es usado en el diagnóstico de patologías dermatológicas en pacientes. Este software ofrece funciones de gestión de mediciones, historias médicas de pacientes y muestras. La vista principal del Spectrasoft es la mostrada en la figura 2.1.

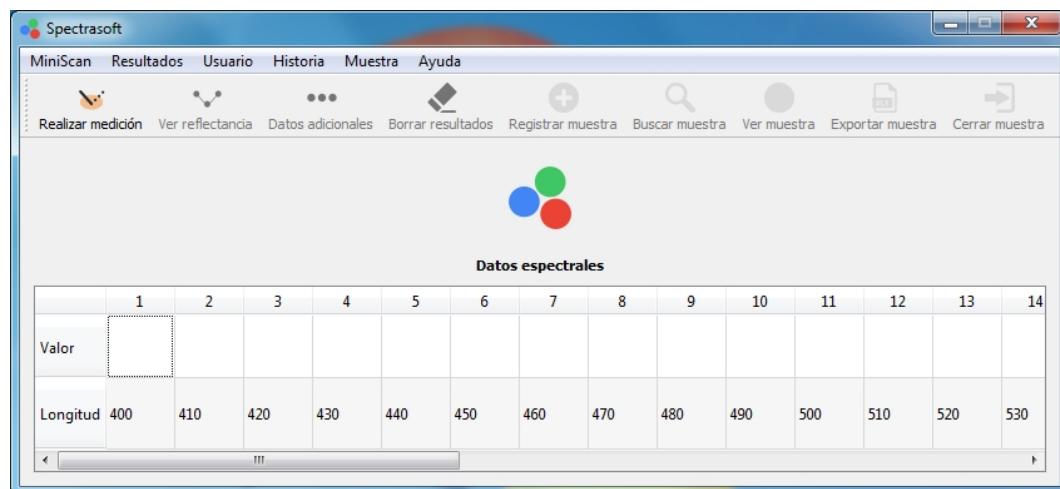


Figura 2.1: Vista principal del Spectrasoft

## Permisología de los usuarios

Spectrasoft maneja tres roles de usuario: administradores, dermatólogos e investigadores. Si bien los tres roles comparten acciones comunes que pueden realizar, cada uno tiene permisos diferentes que lo distinguen de los demás. Estos permisos son descritos en la tabla 1.

Tabla 2.1: Permisología de los usuarios

Usuario	Permisos
<b>Administrador</b>	Manejar el MiniScan XE Plus. Registrar, buscar, modificar y eliminar usuarios. Buscar y ver historias médicas de pacientes. Buscar y ver muestras de pacientes.
<b>Dermatólogo</b>	Manejar el MiniScan XE Plus. Registrar, buscar, ver, modificar y eliminar historias médicas de pacientes. Registrar, buscar, ver, modificar y eliminar muestras de pacientes.
<b>Investigador</b>	Manejar el MiniScan XE Plus. Buscar y ver historias médicas de pacientes. Buscar y ver muestras de pacientes.

Es importante destacar que todas las operaciones de registro, modificación y eliminación requieren de la contraseña del usuario responsable de dicha operación.

## Manejo del MiniScan XE Plus

### Conectar y desconectar

Para conectar o desconectar el MiniScan XE Plus, entre al menú del MiniScan (véase la figura 2.2).



Figura 2.2: Conectar y desconectar MiniScan XE Plus

### Calibrar

Entre al menú del Miniscan y seleccione la opción estandarizar. Prepare la trampa negra del Miniscan para su medición y seleccione listo, por último prepare la cerámica blanca para su medición y seleccione listo (véase la figura 2.3).



Figura 2.3: Calibrar el MiniScan XE Plus

## Gestión de mediciones

### Realizar una medición

Entre al menú del MiniScan, o bien seleccione la opción directamente de la barra de herramientas (véase la figura 2.4).



Figura 2.4: Realizar medición

### Consultar resultados de una medición

El menú de los resultados de una medición es ilustrado en la figura 2.5, y todos los resultados son ilustrados desde la figura 2.6 a la figura 2.10.



Figura 2.5: Menú de resultados de una medición

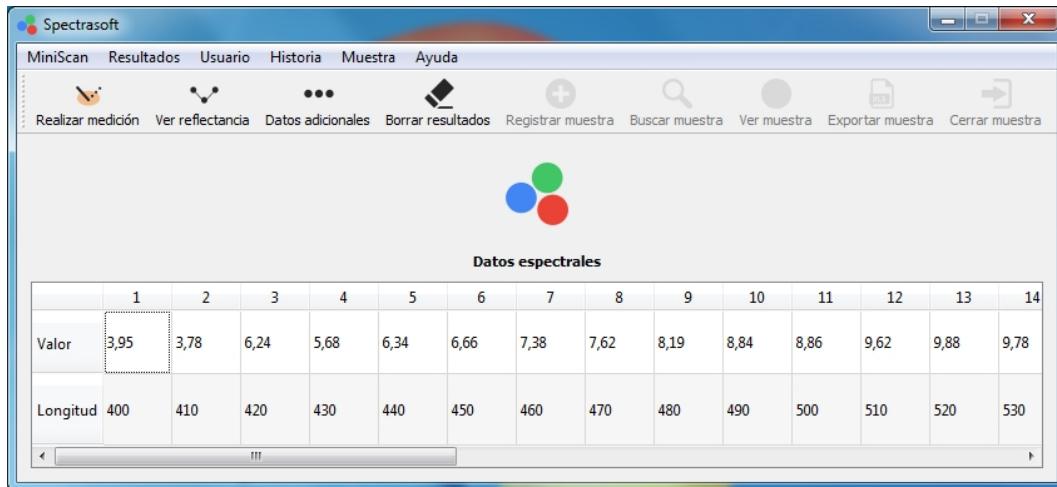


Figura 2.6: Datos espectrales de una medición

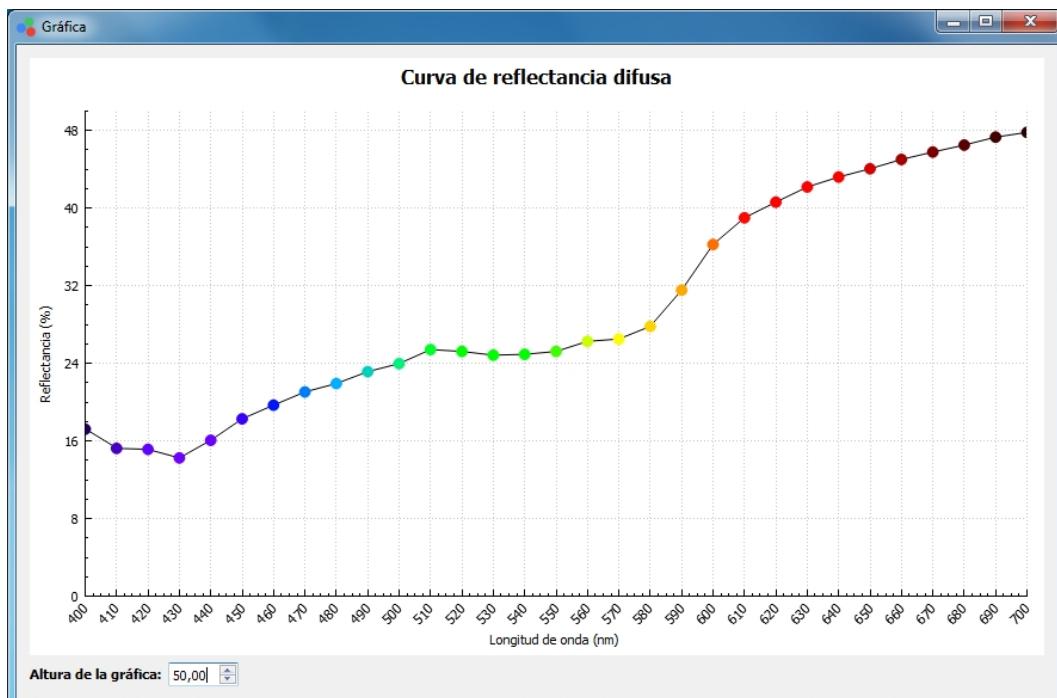


Figura 2.7: Curva de reflectancia de una medición

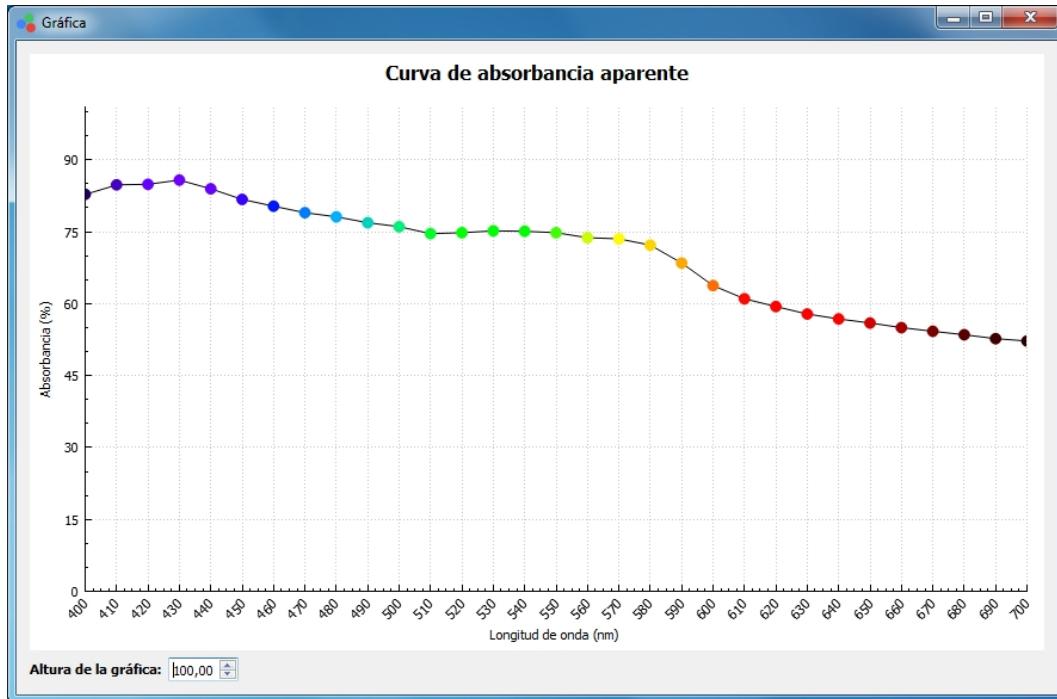


Figura 2.8: Curva de absorbancia de una medición



Figura 2.9: Curva de absorción de una medición

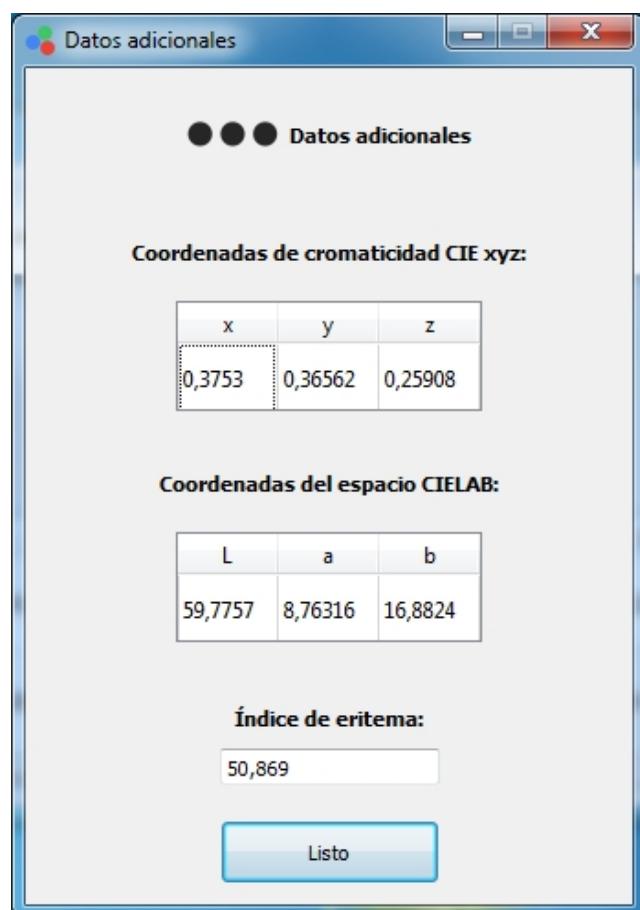


Figura 2.10: Datos adicionales de una medición

## Gestión de sesiones

### Iniciar sesión

Para iniciar sesión entre al menú de usuario y seleccione la opción iniciar sesión. Debe ingresar su cédula de identidad y su contraseña. Esto es ilustrado en la figura 2.11.

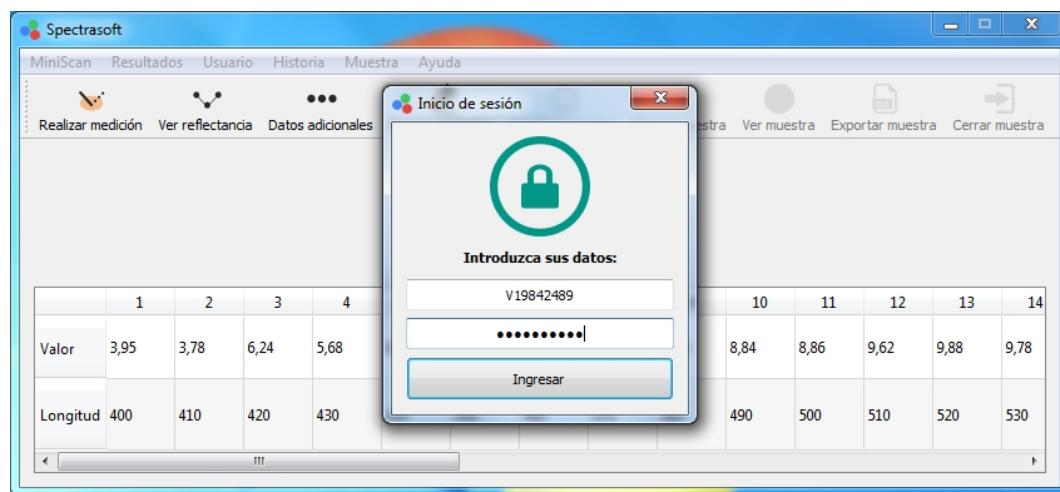


Figura 2.11: Iniciar sesión

### Ver información del usuario

Seleccione la opción ver usuario, ubicada en el menú de usuario. El menú de usuario y la ventana de información son ilustrados en las figuras 2.12 y 2.13.

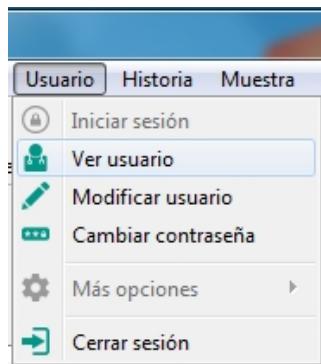


Figura 2.12: Menú de usuario



Figura 2.13: Ver usuario

## Modificar información del usuario

Seleccione la opción modificar usuario, ubicada en el menú de usuario. La ventana para modificar el usuario es ilustrada en la figura 2.14.

## Cambiar contraseña del usuario

Seleccione la opción cambiar contraseña, ubicada en el menú de usuario. Debe ingresar la contraseña actual del usuario y la nueva contraseña (dos veces) para poder realizar el cambio. La ventana para realizar esta operación se ilustra en la figura 2.15.

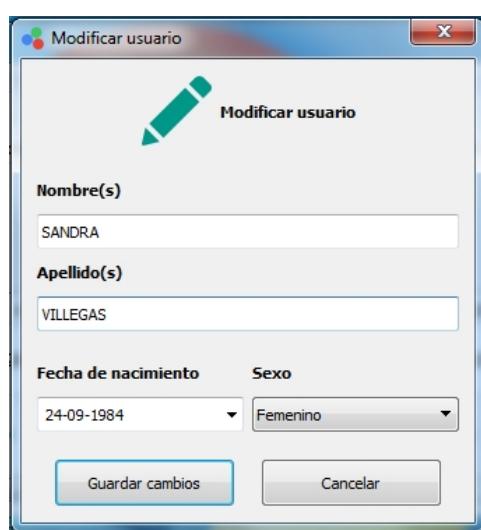


Figura 2.14: Modificar usuario

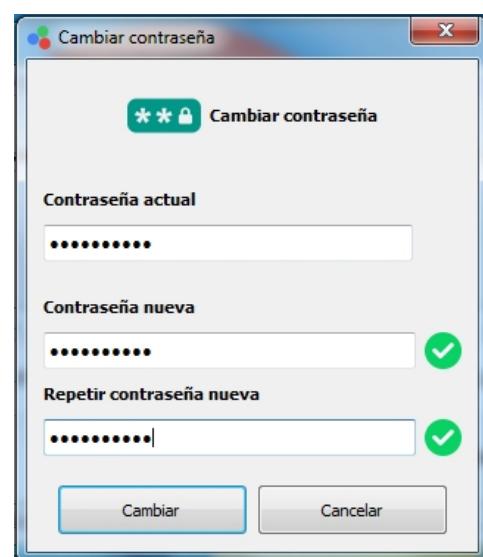


Figura 2.15: Cambiar contraseña

## Cerrar sesión

Seleccione la opción cerrar sesión, ubicada en el menú usuario.

## Gestión de historias

### Registrar historia

Seleccione la opción registrar historia, ubicada en el menú historia. Solo los usuarios dermatólogos pueden registrar una historia médica. El menú de historia y la ventana de registro se ilustran en las figuras 2.16 y 2.17.

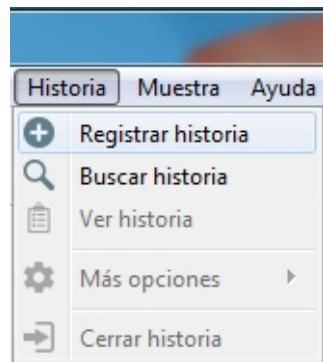


Figura 2.16: Menú historia

A screenshot of a Windows-style dialog box titled 'Registrar historia'. The window has a blue header bar with the title and a close button. Inside, there's a large circular icon with a plus sign. The main area contains fields for 'Nombre(s)' (with value 'JOSE') and 'Apellido(s)' (with value 'GUILLERMO'). There's also a dropdown for 'Cédula de identidad (opcional)' showing 'V'. Below that are 'Fecha de nacimiento' (set to '11-10-2010') and 'Sexo' (set to 'Masculino'). At the bottom are two buttons: 'Registrar historia' (highlighted in blue) and 'Cancelar'.

Figura 2.17: Resgistrar historia

## Buscar historia

En el menú de historia, seleccione la opción buscar historia. Esta ventana permite filtrar la búsqueda de historias empleando ciertos criterios. Para abrir la historia, seleccionela en la lista de historias y por último seleccione la opción abrir historia. Esta ventana se ilustra en la figura 2.18.

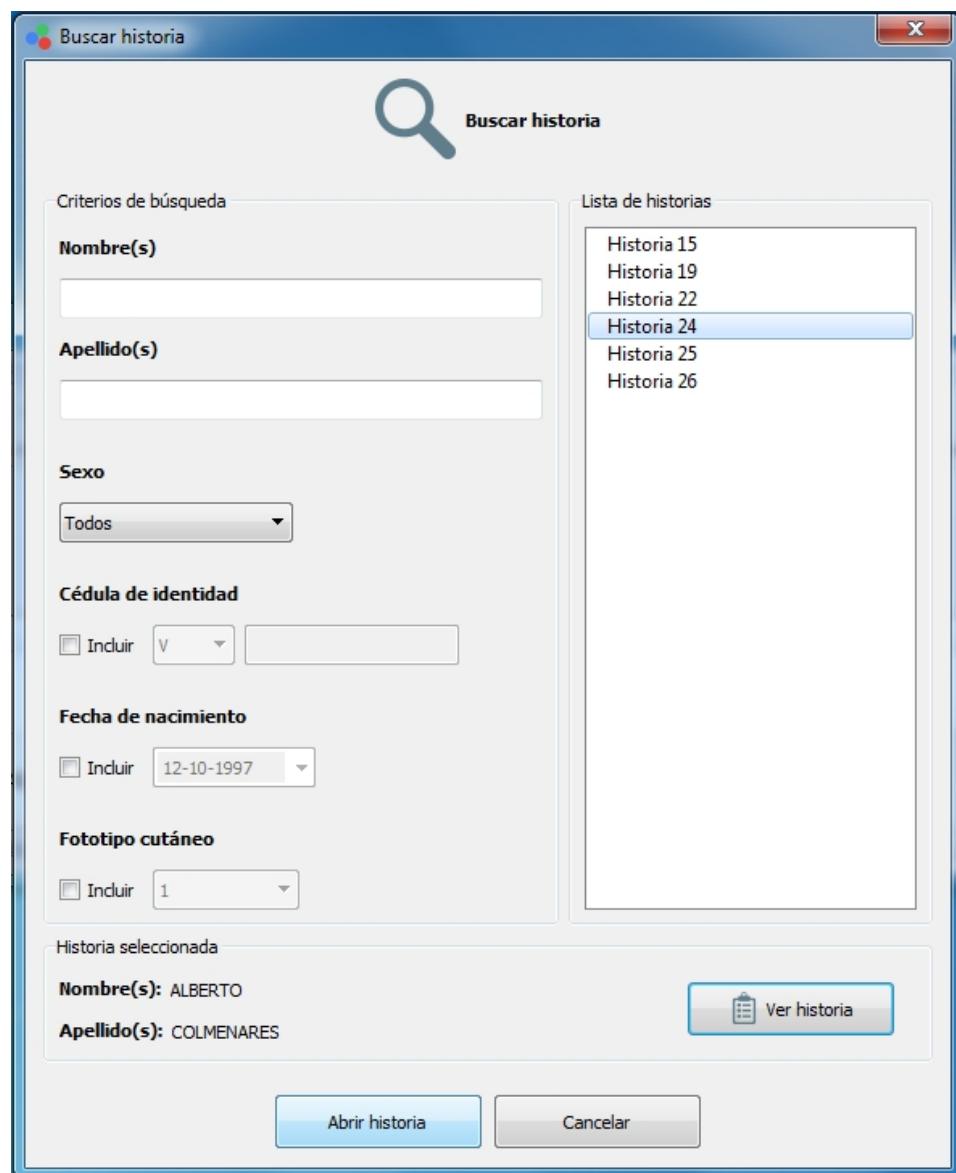


Figura 2.18: Buscar historia

## Ver historia

Seleccione la opción ver historia, ubicada en el menú historia. Esta ventana es ilustrada en la figura 2.19.

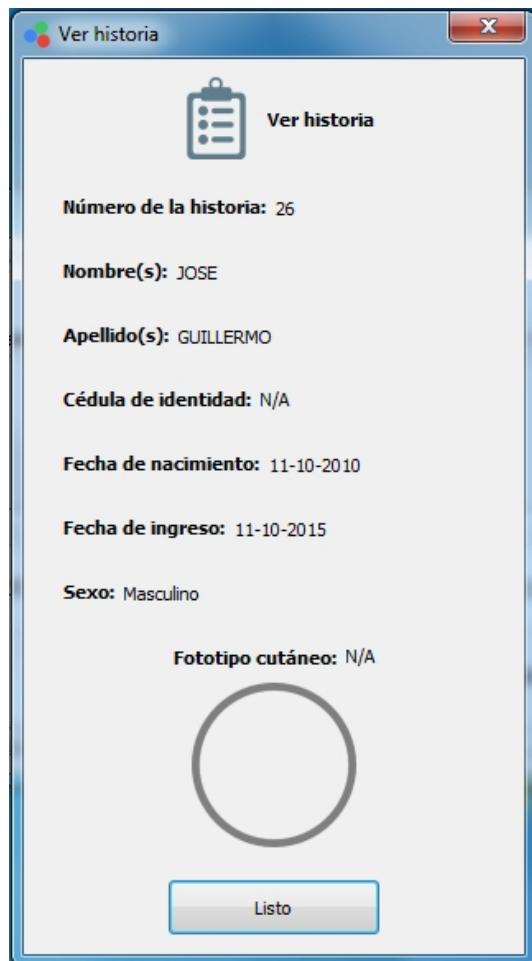


Figura 2.19: Ver historia

## Modificar historia

Seleccione la opción modificar historia, ubicada en el submenú más opciones, dentro del menú historia. Esta ventana se ilustra en la figura 2.20.

## Eliminar historia

Seleccione la opción eliminar historia, ubicada en el submenú más opciones, dentro del menú historia. Esta ventana se ilustra en la figura 2.21.

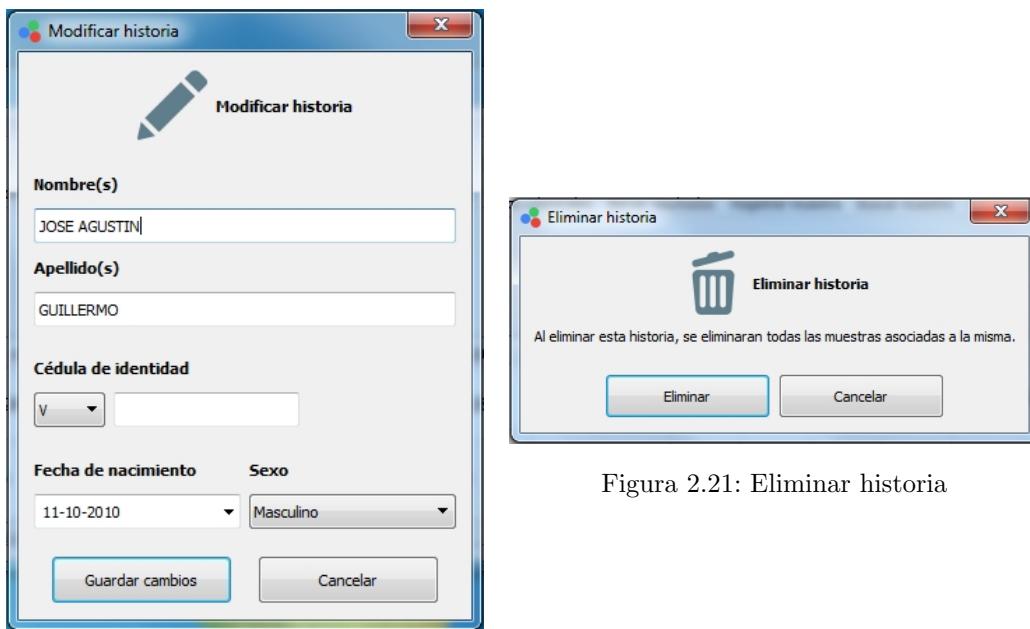


Figura 2.21: Eliminar historia

Figura 2.20: Modificar historia

## Cerrar historia

Seleccione la opción cerrar historia, ubicada en el menú historia.

## Gestión de muestras

### Registrar muestra

Seleccione la opción registrar muestra, ubicada en el menú de muestra (también disponible en la barra de herramientas). En la ventana de registro aparecerán dos tipos de muestra que se pueden registrar, fototipo y lesión. Solo se puede registrar una muestra si el usuario es dermatólogo, si hay una historia médica cargada y si se realizó una medición nueva. El menú muestra y la ventana de tipos de muestra se ilustran en las figuras 2.22 y 2.23.

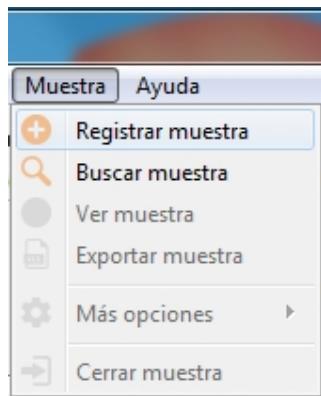


Figura 2.22: Menú muestra

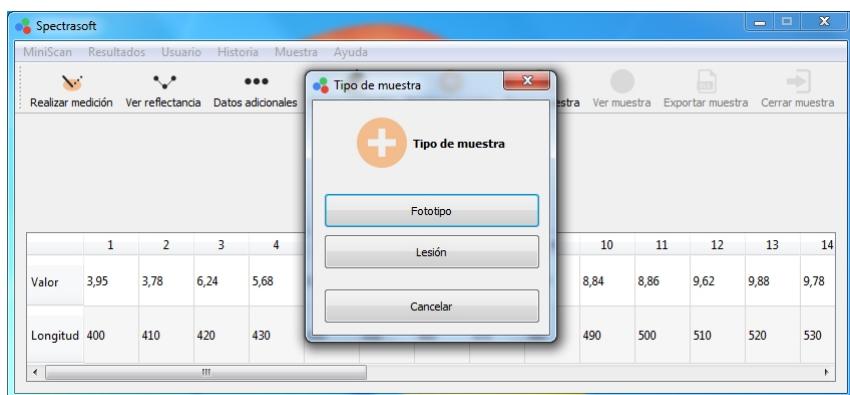


Figura 2.23: Tipos de muestra

## Registrar fototipo

En la ventana para registrar un fototipo, debe especificar el área en donde se le está tomando la muestra al paciente, y se debe seleccionar el fototipo, en la opción clasificar fototipo. Esta ventana se puede apreciar en la figura 2.24.

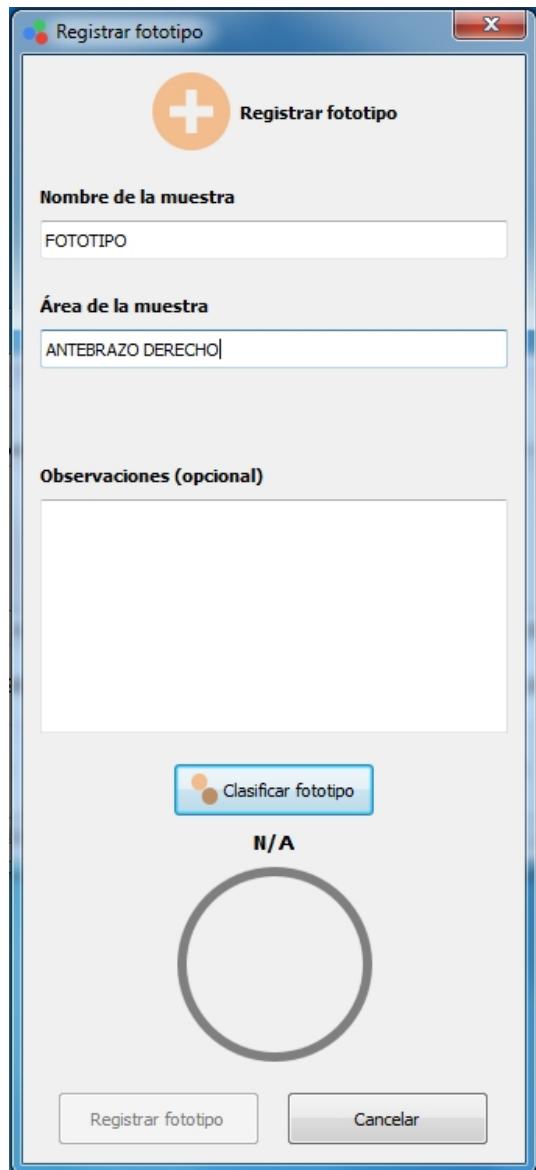


Figura 2.24: Registrar fototipo

En la ventana de clasificación del fototipo aparecerá el fototipo recomendado para la muestra dada, y será necesario elegir el fototipo que se desea registrar. Esto es ilustrado en la figura 2.25.

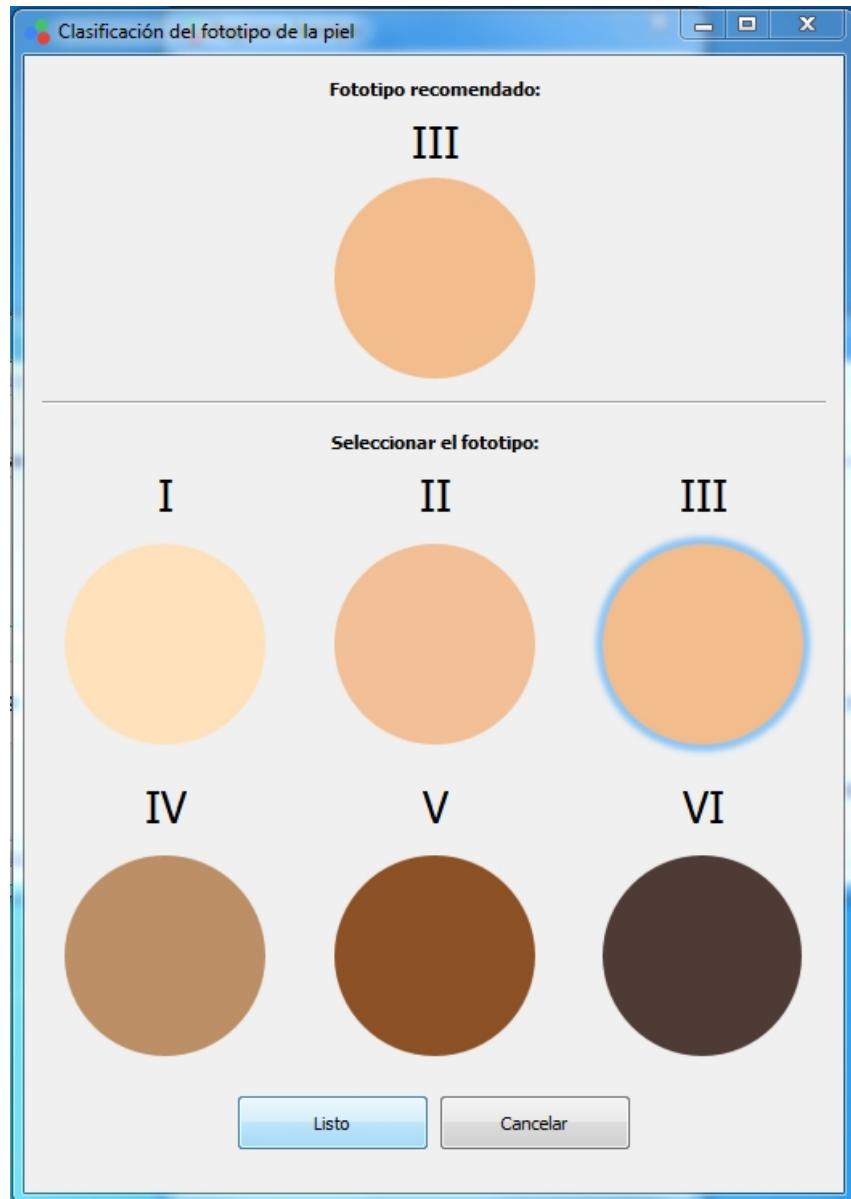


Figura 2.25: Clasificar fototipo

Luego de haber elegido el fototipo, aparecerá la ventana de registro nuevamente, con el fototipo elegido actualizado; por último, seleccione registrar fototipo. Esto es ilustrado en la figura 2.26.

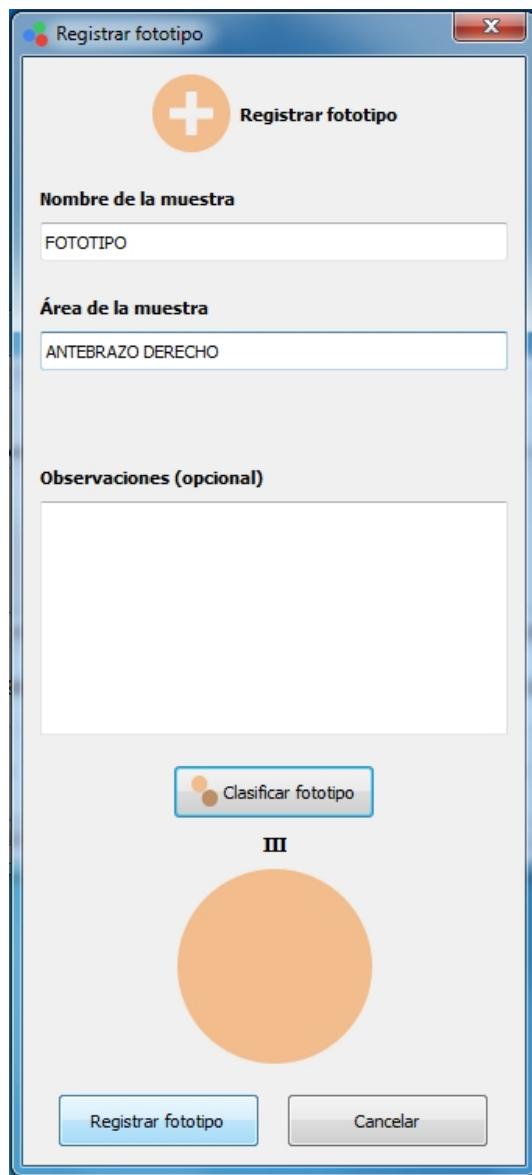


Figura 2.26: Registrar fototipo

## Registrar lesión

En la ventana de registrar lesión, debe especificar el nombre de la lesión y el área en donde se está tomando la muestra de la misma. Esta ventana se puede apreciar en la figura 2.27.

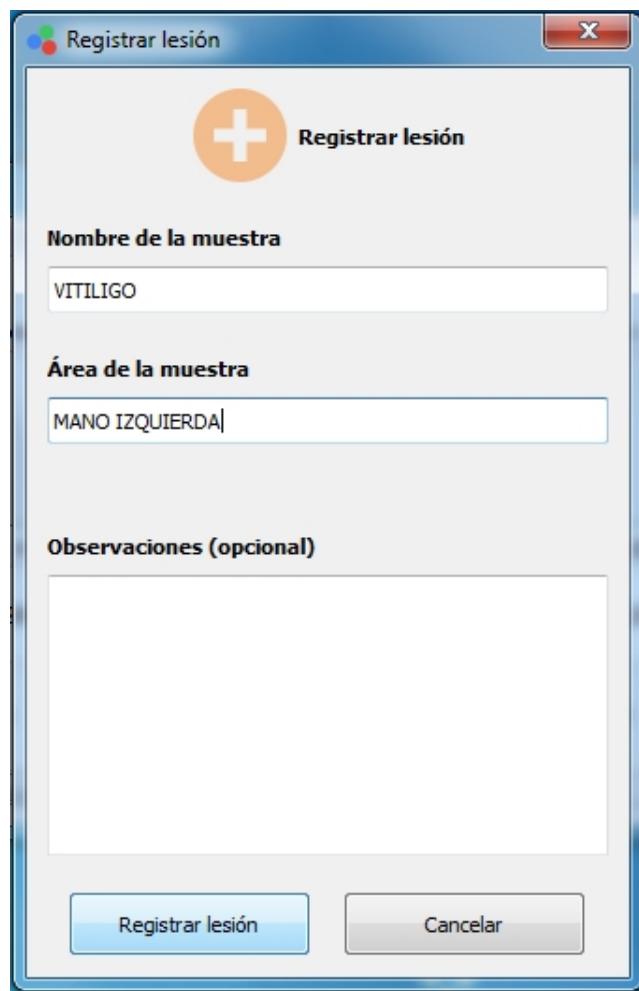


Figura 2.27: Registrar lesión

## Buscar muestra

Seleccione la opción buscar muestra, ubicada en el menú de muestra (también disponible en la barra de herramientas). Esta ventana permite filtrar la búsqueda de las muestras pertenecientes a la historia que esté cargada en ese momento, empleando ciertos criterios. Para abrir la muestra, selecciónela en la lista de muestras y por último seleccione la opción abrir muestra. Esta ventana se ilustra en la figura 2.28.

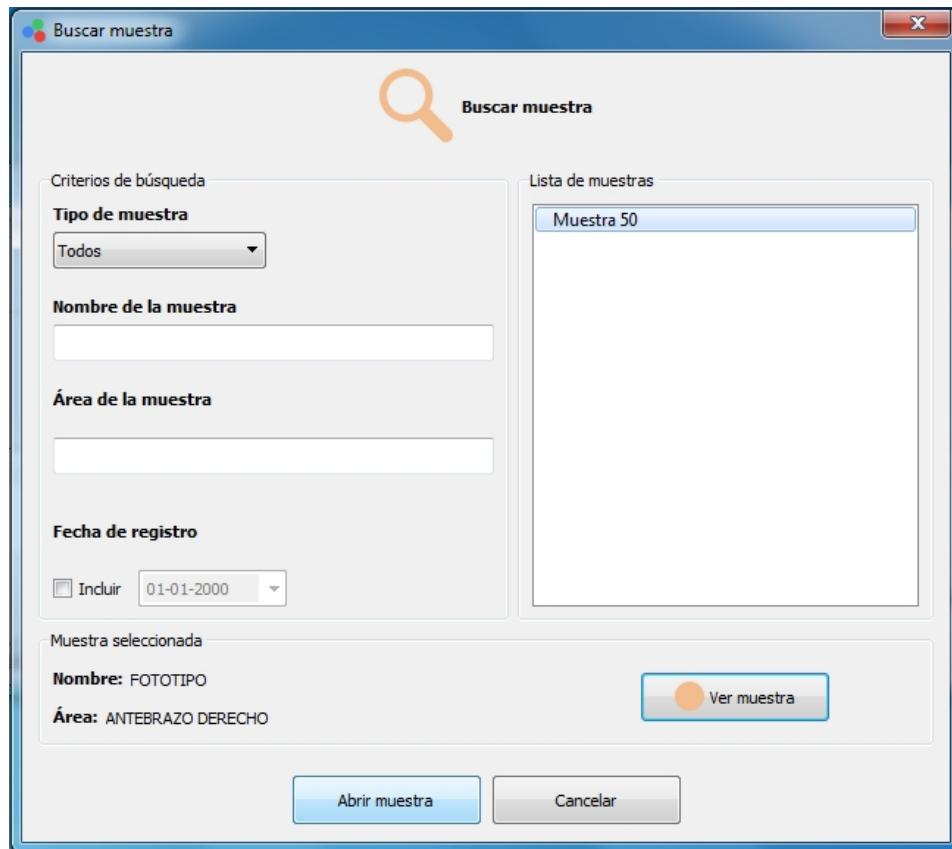


Figura 2.28: Buscar muestra

## Ver muestra

Seleccione la opción ver muestra, ubicada en el menú de muestra (también disponible en la barra de herramientas). Esta ventana se ilustra en la figura 2.29.



Figura 2.29: Ver muestra

## Exportar muestra

Seleccione la opción exportar muestra, ubicada en el menú de muestra (también disponible en la barra de herramientas). Estas opciones se ilustran en la figura 2.30.

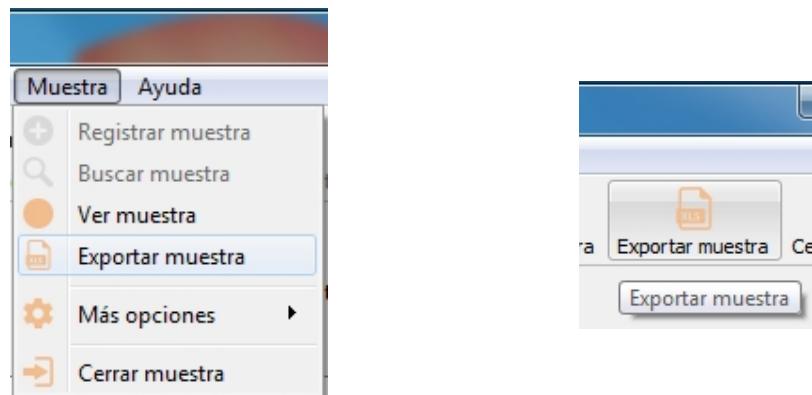


Figura 2.30: Exportar muestra

La muestra se exporta en el escritorio a un archivo .xlsx, que puede abrirse y modificarse con cualquier programa que maneje hojas de cálculo.

## Modificar muestra

Seleccione la opción modificar muestra, ubicada en el submenú más opciones, dentro del menú muestra. Esta ventana se ilustra en la figura 2.31.

## Eliminar muestra

Seleccione la opción eliminar muestra, ubicada en el submenú más opciones, dentro del menú muestra. Esta ventana se ilustra en la figura 2.32.

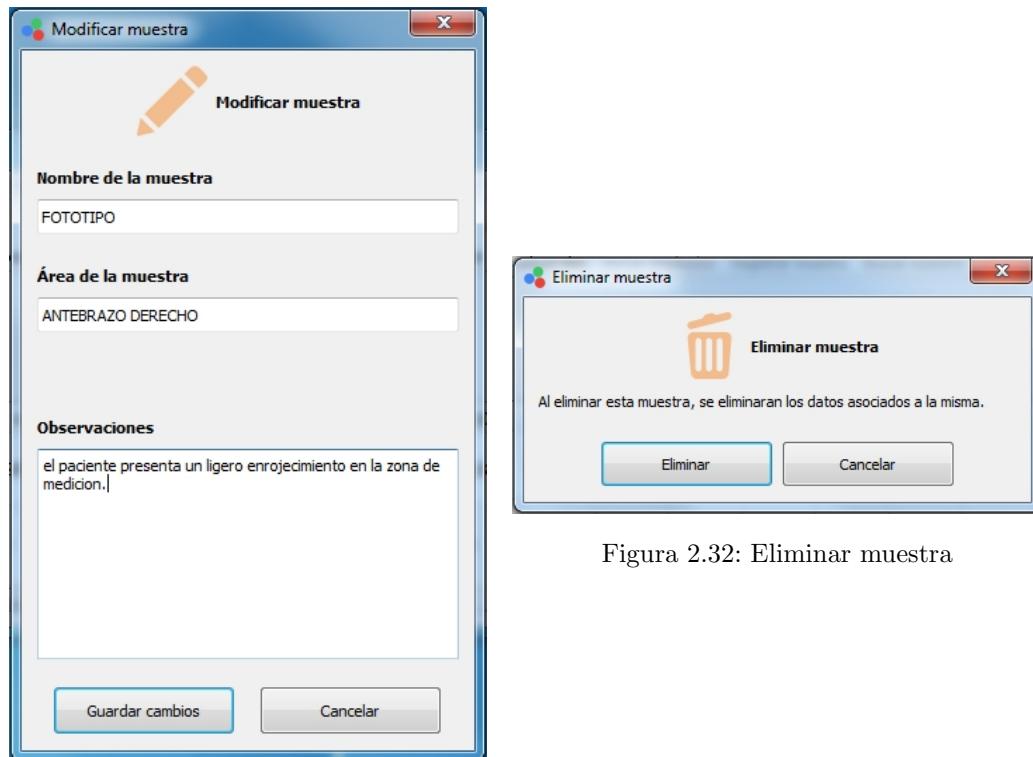


Figura 2.31: Modificar muestra

Figura 2.32: Eliminar muestra

## Cerrar muestra

Seleccione la opción cerrar muestra, ubicada en el menú muestra.

## Gestión de usuarios

### Registrar usuario

Seleccione la opción registrar usuario, ubicada en el submenú más opciones, dentro del menú usuario. Esta ventana es ilustrada en la figura 2.33.

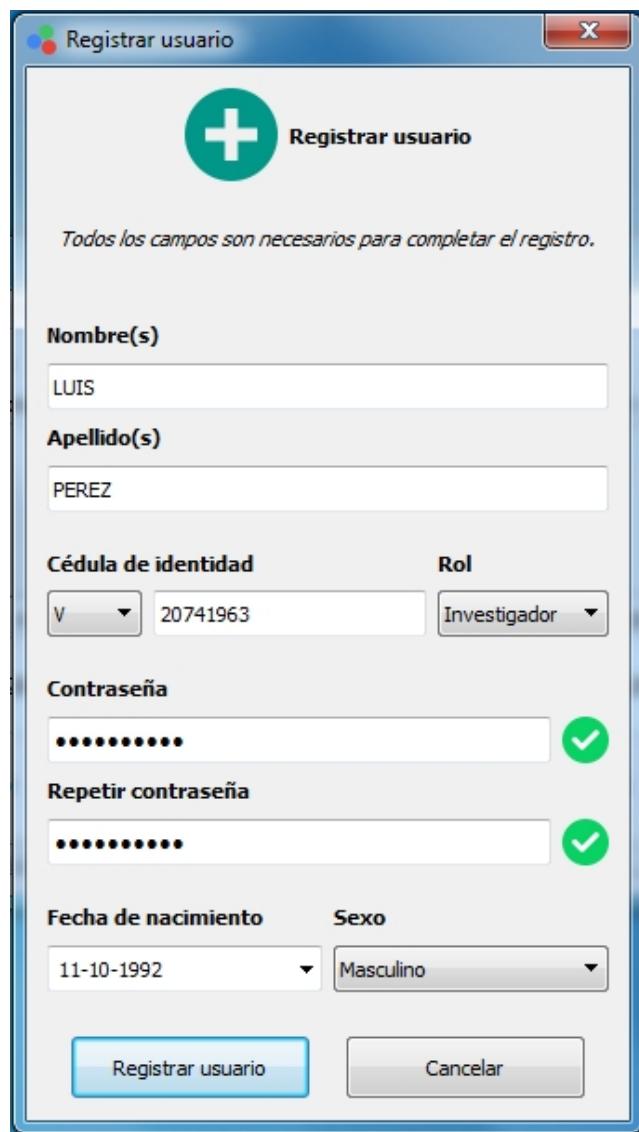


Figura 2.33: Registrar usuario

## Administrar usuarios

Seleccione la opción administrar usuarios, ubicada en el submenú más opciones, dentro del menú usuario. Administrar usuarios permite cambiar sus roles, cambiar sus contraseñas y eliminarlos. Esta ventana es ilustrada en la figura 2.34.

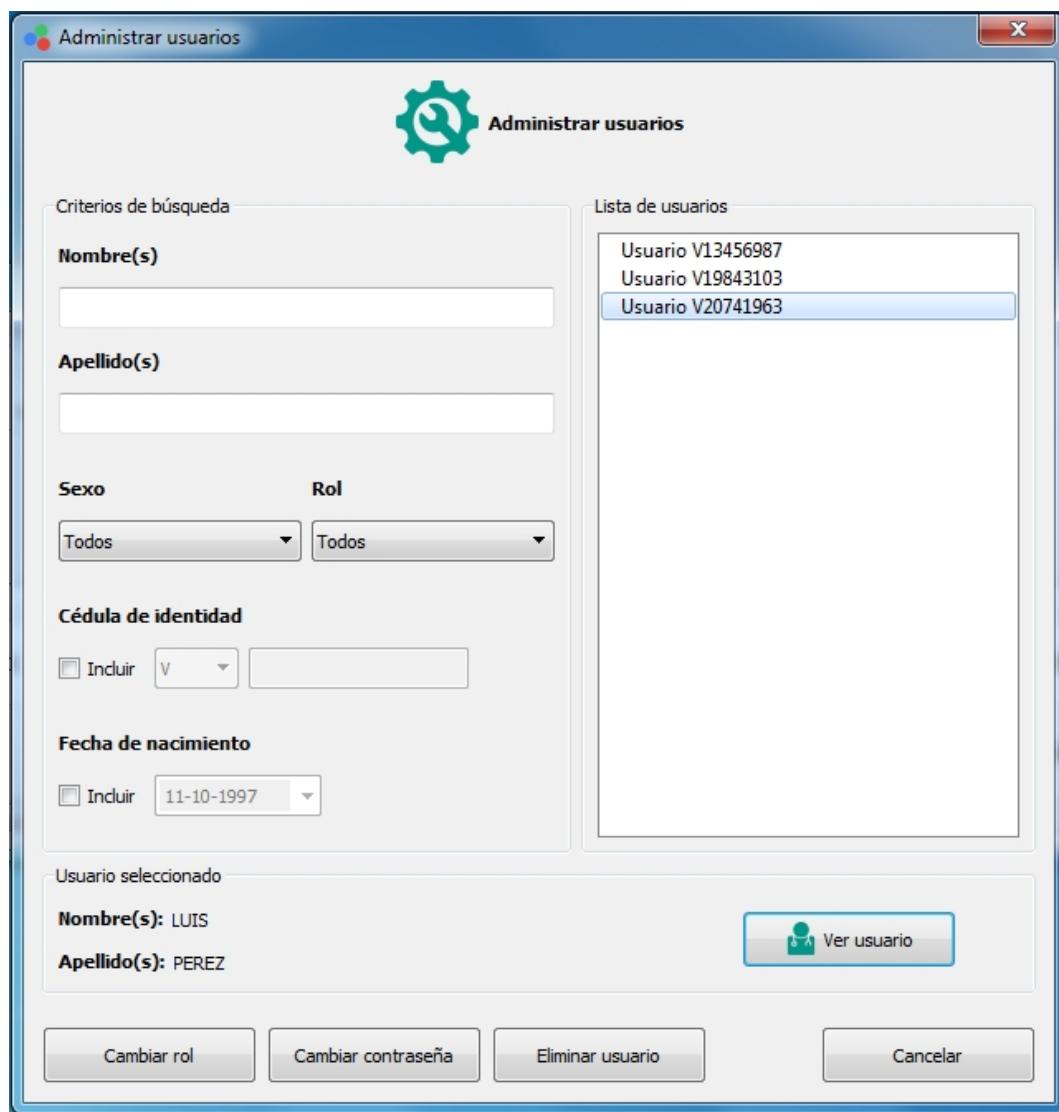


Figura 2.34: Administrar usuarios

## Cambiar rol

Una vez haya seleccionado un usuario de la lista de usuarios, seleccione la opción cambiar rol. Esta ventana es ilustrada en la figura 2.35.

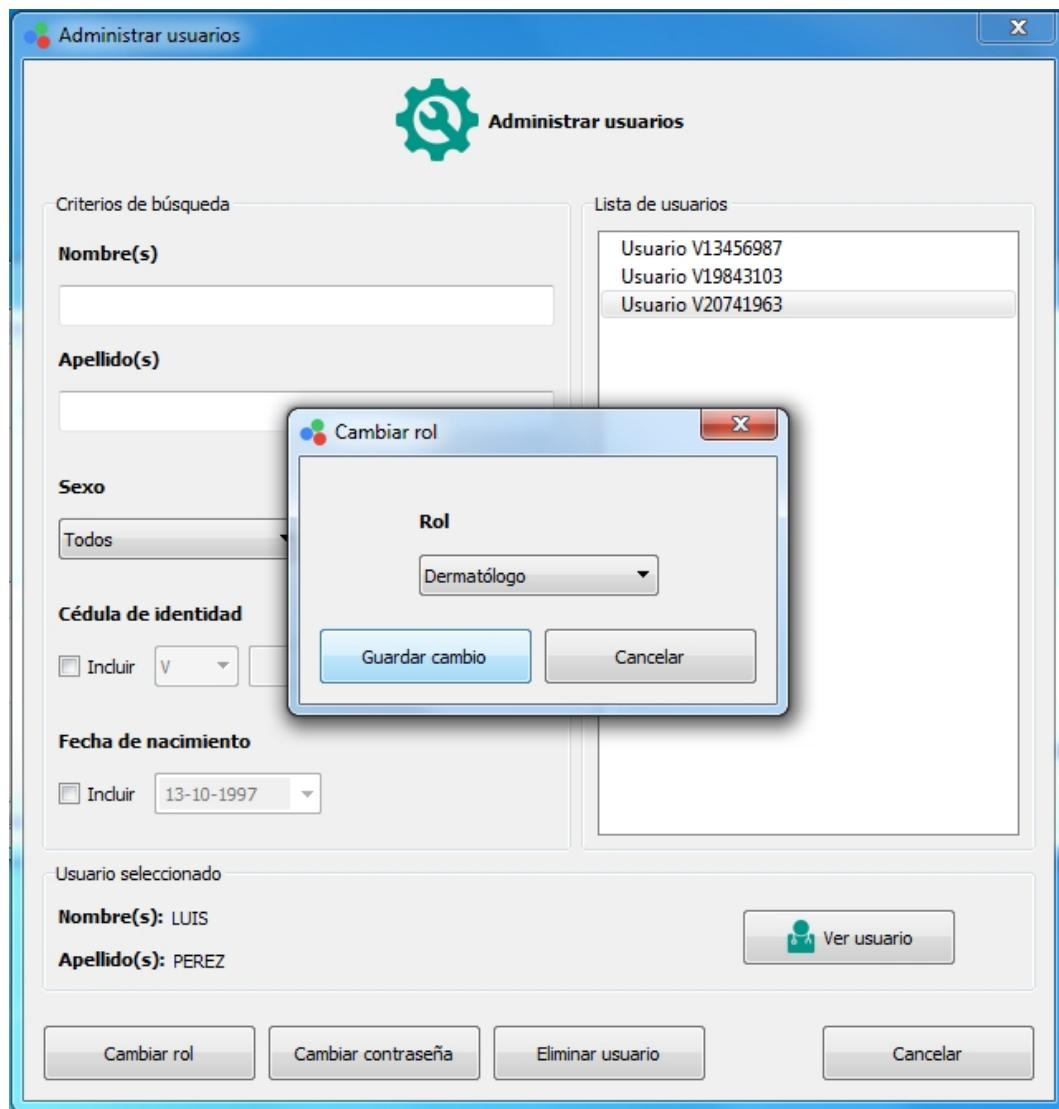


Figura 2.35: Cambiar rol

## Cambiar contraseña

Una vez haya seleccionado un usuario de la lista de usuarios, seleccione la opción cambiar contraseña. Esta opción requiere de la contraseña del administrador que este realizando la operación, y de la nueva contraseña para el usuario. Esto es ilustrado en la figura 2.36.

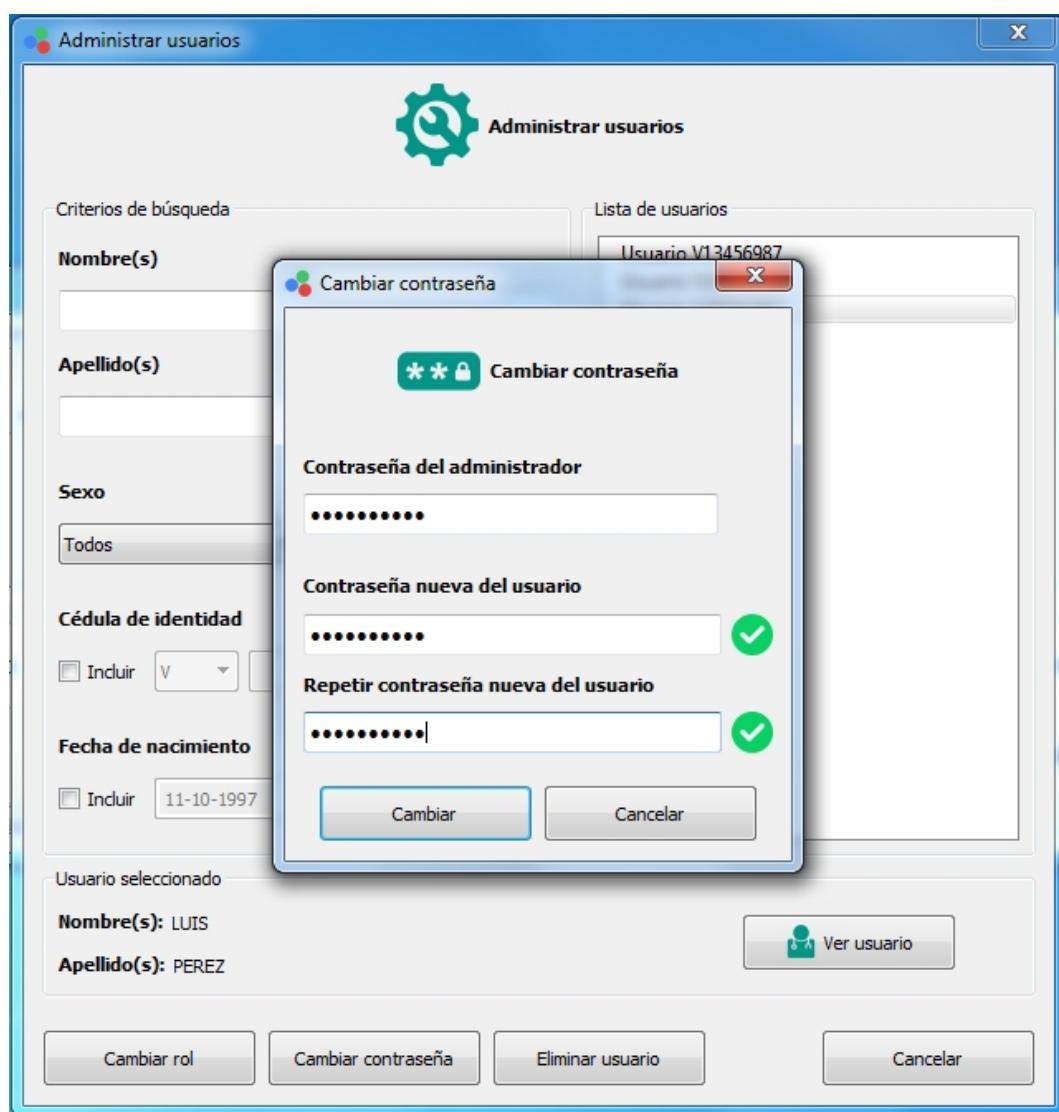


Figura 2.36: Cambiar contraseña

## Eliminar usuario

Una vez haya seleccionado un usuario de la lista de usuarios, seleccione la opción eliminar usuario. Esta opción solo se puede realizar con usuarios que no sean administradores. Esta opción es ilustrada en la figura 2.37.

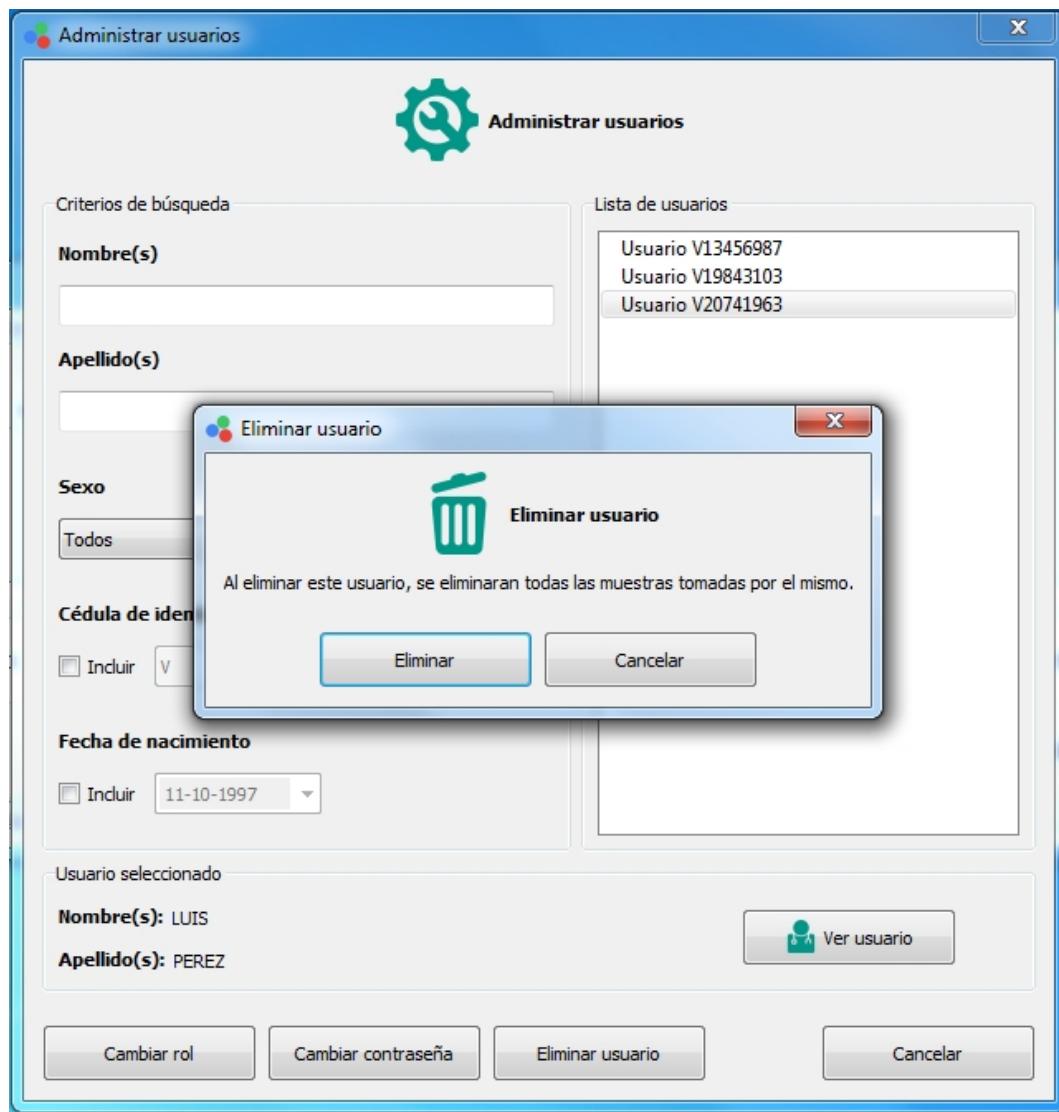


Figura 2.37: Eliminar usuario

## Anexo C: Manual del desarrollador

### 3.1. Requerimientos del sistema

Antes de instalar el software requerido para desarrollar en el Spectrasoft, se debe seguir el manual de instalación del mismo.

#### Software requerido para el desarrollo

- Framework de desarrollo Qt versión *open source* 5.4.1.
- Sistema de control de versiones git versión 1.9.5.

#### Descargas previas

1. **Proyecto MSXEBridge:** <https://github.com/Gabnz/MSXEBridge/>.
2. **Proyecto Spectrasoft:** <https://github.com/Gabnz/Spectrasoft/>.

#### Descripción de los proyectos

1. **Proyecto MSXEBridge:** librería intermediaria entre el OCX Kit del MiniScan XE Plus y el Spectrasoft, que contiene la lógica necesaria para la utilización de las funciones comúnmente usadas de dicho instrumento. La misma está escrita en el lenguaje Visual Basic .NET.
2. **Proyecto Spectrasoft:** software para el manejo del MiniScan XE Plus, escrito en el lenguaje C++ y desarrollado en el *framework* Qt.

## Contenido del proyecto Spectrasoft

Los siguientes archivos y carpetas están ubicados dentro de la carpeta raíz del proyecto Spectrasoft.

1. **mainwindow.h y mainwindow.cpp:** estos archivos contienen la definición y la implementación de las funciones principales del Spectrasoft, respectivamente.
2. **miniscanxe.h y miniscanxe.cpp:** estos archivos contienen la definición y la implementación de las funciones de comunicación con el MSXEBridge, respectivamente.
3. **spectralops.h y spectralops.cpp:** estos archivos contienen la definición y la implementación de las fórmulas y funciones que utilizan los datos espectrales del MiniScan XE Plus como insumo.
4. **polyfit.h y polyfit.cpp:** estos archivos contienen la definición y la implementación del ajuste polinomial utilizado para calcular el coeficiente de absorción.
5. **img\:** esta carpeta contiene todas las imágenes e íconos utilizados en el Spectrasoft.
6. **recursos.qrc:** este archivo administra todos los recursos del proyecto Spectrasoft, incluyendo imágenes e íconos.
7. **deployment-test\:** esta carpeta contiene la estructura de carpetas necesaria para realizar un *deploy* de la aplicación Spectrasoft.
8. **database\:** esta carpeta contiene el respaldo de la estructura de la base de datos spectradb, en las extensiones «.backup» y «.sql».
9. **Archivos «.h» y «.cpp» con el prefijo «dlg»:** estos archivos contienen la definición y la implementación de cada una de las vistas disponibles en el Spectrasoft.

10. **Archivos con extensión «.ui»:** estos archivos definen las interfaces gráficas de usuario de cada una de sus vistas respectivas en el Spectrasoft.

## Librerías de terceros

1. **QtXlsx:** exporta datos almacenados en Qt a hojas de cálculo con extensión xlsx. Los archivos de esta librería están ubicados en la carpeta «qtxlsx\».
2. **QCustomPlot:** permite realizar visualización y trazado de datos en Qt. La cabecera de esta librería es «qcustomplot.h» y la implementación de la misma es «qcustomplot.cpp».
3. **MSV:** determina el tipo de piel en pacientes. Los archivos de la misma están ubicados en la carpeta «clasificador\».

**Anexo D: Guiones de prueba**

**Guión de prueba 1**

**Nombre del proyecto:** Software para el MiniScan XE Plus.

**Área funcional:** Operación del MiniScan XE Plus.

**Nombre de la prueba:** Operar el MiniScan XE Plus.

**Propósito:**

Probar la funcionalidad que implica operar el MiniScan XE Plus.

**Resultado:**

Prueba superada con éxito.

#	Acción	Opción	Resultado esperado
1	El usuario conecta el software con el MiniScan.	Se selecciona la opción «Conectar», ubicada en el menú MiniScan.	Ventana de confirmación, informando al usuario que la conexión ha sido establecida.
2	El usuario realiza una medición.	Se selecciona la opción «Realizar medición», ubicada en el menú MiniScan.	Tabla de datos espectrales recuperados de la medición.
3	El usuario desconecta el software con el MiniScan.	Se selecciona la opción «Desconectar», ubicada en el menú MiniScan.	Ventana de confirmación, informando al usuario que la desconexión ha sido realizada.
4	El usuario calibra el MiniScan.	Se selecciona la opción «Estandarizar», ubicada en el menú MiniScan.	Ventanas de calibración para la trampa negra y la cerámica blanca del MiniScan.

**Errores encontrados:**

Descripción del error
No se encontró ningún error.

**Comentarios y observaciones:**

Se verificó la funcionalidad desconectando físicamente el MiniScan, en cuyo caso el software genera un mensaje de error al usuario.

**Elaborado por:** Gabriel Núñez.

**Fecha:** 15 de octubre, 2015.

## Guión de prueba 2

**Nombre del proyecto:** Software para el MiniScan XE Plus.

**Área funcional:** Resultados.

**Nombre de la prueba:** Gestionar resultados.

**Propósito:**

Probar la funcionalidad que implica gestionar los resultados de las mediciones.

**Resultado:**

Prueba superada con éxito.

#	Acción	Opción	Resultado esperado
1	El usuario consulta los resultados de una medición.	Se selecciona los resultados disponibles en el menú Resultados.	Ventanas con los resultados adicionales de una medición.
2	El usuario borra los resultados de una medición.	Se selecciona la opción «Borrar resultados», ubicada en el menú resultados.	Ventana de confirmación, informando al usuario que se han borrado los resultados correctamente.

**Errores encontrados:**

Descripción del error
No se encontró ningún error.

**Comentarios y observaciones:**

No aplica.

**Elaborado por:** Gabriel Núñez.

**Fecha:** 15 de octubre, 2015.

### Guión de prueba 3

**Nombre del proyecto:** Software para el MiniScan XE Plus.

**Área funcional:** Sesión de usuarios.

**Nombre de la prueba:** Gestionar sesión de usuarios.

**Propósito:**

Probar la funcionalidad que implica gestionar la sesión de un usuario.

**Resultado:**

Prueba superada con éxito.

#	Acción	Opción	Resultado esperado
1	El usuario inicia su sesión, suministrando su cédula de identidad y su contraseña.	Se selecciona la opción «Iniciar sesión», ubicada en el menú usuario.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha iniciado sesión correctamente.
2	El usuario ve sus datos personales.	Se selecciona la opción «Ver usuario», ubicada en el menú usuario.	Ventana de muestra los datos personales del usuario.
3	El usuario modifica sus datos personales, proporcionando su contraseña.	Se selecciona la opción «Modificar usuario», ubicada en el menú usuario.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha modificado sus datos correctamente.
4	El usuario cambia su contraseña, proporcionando su contraseña actual y su contraseña nueva.	Se selecciona la opción «Cambiar contraseña», ubicada en el menú usuario.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha cambiado su contraseña correctamente.
5	El usuario cierra su sesión.	Se selecciona la opción «Cerrar sesión», ubicada en el menú usuario.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha cerrado su sesión correctamente.

**Errores encontrados:**

Descripción del error
No se encontró ningún error.

**Comentarios y observaciones:**

Se verificó la funcionalidad proporcionando una contraseña incorrecta en las operaciones de inicio de sesión y modificación, en cuyo caso el software genera un mensaje de error al usuario.

**Elaborado por:** Gabriel Núñez.

**Fecha:** 15 de octubre, 2015.

#### Guión de prueba 4

**Nombre del proyecto:** Software para el MiniScan XE Plus.

**Área funcional:** Historias.

**Nombre de la prueba:** Gestionar historias.

**Propósito:**

Probar la funcionalidad que implica gestionar las historias médicas.

**Resultado:**

Prueba superada con éxito.

#	Acción	Opción	Resultado esperado
1	El usuario registra una historia, suministrando datos personales del paciente y su contraseña de usuario.	Se selecciona la opción «Registrar historia», ubicada en el menú historia.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha registrado la historia correctamente.
2	El usuario busca una historia existente.	Se selecciona la opción «Buscar historia», ubicada en el menú historia.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha abierto la historia correctamente.
3	El usuario ve los datos de la historia.	Se selecciona la opción «Ver historia», ubicada en el menú historia.	Ventana de muestra los datos de la historia médica.
4	El usuario modifica los datos de la historia, proporcionando su contraseña de usuario.	Se selecciona la opción «Modificar historia», ubicada en el menú historia.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha modificado la historia correctamente.
5	El usuario cierra la historia.	Se selecciona la opción «Cerrar historia», ubicada en el menú historia.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha cerrado la historia correctamente.
6	El usuario elimina la historia, proporcionando su contraseña de usuario.	Se selecciona la opción «Eliminar historia», ubicada en el menú historia.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha eliminado la historia correctamente.

**Errores encontrados:**

Descripción del error
No se encontró ningún error.

**Comentarios y observaciones:**

Se verificó la funcionalidad proporcionando una contraseña incorrecta en las operaciones de registro, modificación y eliminación, en cuyo caso el software genera un mensaje de error al usuario.

**Elaborado por:** Gabriel Núñez.

**Fecha:** 15 de octubre, 2015.

**Guión de prueba 5**

**Nombre del proyecto:** Software para el MiniScan XE Plus.

**Área funcional:** Muestras.

**Nombre de la prueba:** Gestionar muestras.

**Propósito:**

Probar la funcionalidad que implica gestionar muestras.
---

**Resultado:**

Prueba superada con éxito.
----------------------------

#	Acción	Opción	Resultado esperado
1	El usuario registra una muestra, suministrando los datos de la misma y su contraseña de usuario.	Se selecciona la opción «Registrar muestra», ubicada en el menú muestra.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha registrado la muestra correctamente.
2	El usuario busca una muestra existente.	Se selecciona la opción «Buscar muestra», ubicada en el menú muestra.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha abierto la muestra correctamente.
3	El usuario ve los datos de la muestra.	Se selecciona la opción «Ver muestra», ubicada en el menú muestra.	Ventana que proporciona los datos de la muestra.
4	El usuario exporta los datos de la muestra.	Se selecciona la opción «Exportar muestra», ubicada en el menú muestra.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha exportado la muestra correctamente.
5	El usuario modifica los datos de la muestra, proporcionando su contraseña de usuario.	Se selecciona la opción «Modificar muestra», ubicada en el menú muestra.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha modificado la muestra correctamente.
6	El usuario cierra la muestra.	Se selecciona la opción «Cerrar muestra», ubicada en el menú muestra.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha cerrado la muestra correctamente.
7	El usuario elimina la muestra, proporcionando su contraseña de usuario.	Se selecciona la opción «Eliminar muestra», ubicada en el menú muestra.	Ventana de confirmación, informando al usuario que ha eliminado la muestra correctamente.

**Errores encontrados:**

Descripción del error
No se encontró ningún error.

**Comentarios y observaciones:**

Se verificó la funcionalidad proporcionando una contraseña incorrecta en las operaciones de registro, modificación y eliminación, en cuyo caso el software genera un mensaje de error al usuario.

**Elaborado por:** Gabriel Núñez.

**Fecha:** 15 de octubre, 2015.

### Guión de prueba 6

**Nombre del proyecto:** Software para el MiniScan XE Plus.

**Área funcional:** Administración de usuarios.

**Nombre de la prueba:** Gestionar usuarios.

**Propósito:**

Probar la funcionalidad que implica gestionar usuarios.

**Resultado:**

Prueba superada con éxito.

#	Acción	Opción	Resultado esperado
1	El administrador registra un usuario, suministrando los datos personales del mismo y su contraseña de administrador.	Se selecciona la opción «Registrar usuario», ubicada en el menú usuario.	Ventana de confirmación, informando al administrador que ha registrado al nuevo usuario correctamente.
2	El administrador gestiona un usuario existente.	Se selecciona la opción «Administrar usuarios», ubicada en el menú usuario.	Ventana de administración de usuarios.
3	El administrador ve los datos de un usuario.	Se selecciona la opción «Ver usuario», ubicada en la ventana administrar usuarios.	Ventana que muestra los datos del usuario.
4	El administrador cambia el rol de un usuario, proporcionando su contraseña de administrador.	Se selecciona la opción «Cambiar rol», ubicada en la ventana administrar usuarios.	Ventana de confirmación, informando al administrador que ha cambiado el rol del usuario correctamente.
5	El administrador cambia la contraseña de un usuario, proporcionando su contraseña de administrador.	Se selecciona la opción «Cambiar contraseña», ubicada en la ventana administrar usuario.	Ventana de confirmación, informando al administrador que ha cambiado la contraseña del usuario correctamente.
6	El administrador elimina un usuario, proporcionando su contraseña de administrador.	Se selecciona la opción «Eliminar usuario», ubicada en la ventana administrar usuarios.	Ventana de confirmación, informando al administrador que ha eliminado al usuario correctamente.

**Errores encontrados:**

Descripción del error
No se encontró ningún error.

**Comentarios y observaciones:**

Se verificó la funcionalidad proporcionando una contraseña incorrecta en las operaciones de cambio de rol, cambio de contraseña y eliminación, en cuyo caso el software genera un mensaje de error al administrador.

**Elaborado por:** Gabriel Núñez.

**Fecha:** 15 de octubre, 2015.

**Anexo E: Pruebas de aceptación**

**Prueba de aceptación**

**Nombre del proyecto:** Software para el MiniScan XE Plus.

**Usuario:** Dermatólogo.

**Propósito:**

Evaluar el cumplimiento y la satisfacción de los requerimientos establecidos durante la definición del proyecto.

**Resultado:**

#	Requerimiento	Acción	Resultado
1	Conectar el MiniScan.	Conectar el software con el MiniScan.	Éxito
2	Desconectar el MiniScan.	Desconectar el software del MiniScan.	Éxito
3	Calibrar el MiniScan.	Calibrar el MiniScan, utilizando una trampa de luz y una cerámica blanca.	Éxito
4	Realizar una medición.	Realizar una medición con el MiniScan.	Éxito
5	Consultar resultados.	Consultar los resultados de una medición realizada.	Éxito
6	Borrar resultados.	Borrar los resultados obtenidos de una medición realizada.	Éxito
7	Iniciar sesión.	Iniciar la sesión de usuario.	Éxito
8	Consultar usuario.	Consultar los datos personales del usuario.	Éxito
9	Modificar usuario.	Modificar los datos personales del usuario.	Éxito
10	Cerrar sesión.	Cerrar la sesión de usuario.	Éxito
11	Registrar historia.	Registrar la historia médica de un paciente.	Éxito
12	Consultar historia.	Consultar los datos de la historia médica de un paciente.	Éxito
13	Modificar historia.	Modificar los datos de la historia médica de un paciente.	Éxito
14	Cerrar historia.	Cerrar la historia médica de un paciente.	Éxito
15	Eliminar historia.	Eliminar la historia médica de un paciente.	Éxito
16	Registrar muestra.	Registrar una muestra perteneciente a una historia.	Éxito
17	Consultar muestra.	Consultar los datos de una muestra perteneciente a una historia.	Éxito
18	Exportar muestra.	Exportar los datos de una muestra a un archivo portátil.	Éxito

#	Requerimiento	Acción	Resultado
19	Modificar muestra.	Modificar los datos de una muestra perteneciente a una historia.	Éxito
20	Cerrar muestra.	Cerrar una muestra perteneciente a una historia.	Éxito
21	Eliminar muestra.	Eliminar una muestra perteneciente a una historia.	Éxito

**Comentarios y observaciones:**

No aplica.

**Elaborado por:** Sandra Vivas.

**Fecha:** 20 de octubre, 2015.

**Prueba de aceptación**

**Nombre del proyecto:** Software para el MiniScan XE Plus.

**Usuario:** Investigador.

**Propósito:**

Evaluar el cumplimiento y la satisfacción de los requerimientos establecidos durante la definición del proyecto.

**Resultado:**

#	Requerimiento	Acción	Resultado
1	Conectar el MiniScan.	Conectar el software con el MiniScan.	Éxito
2	Desconectar el MiniScan.	Desconectar el software del MiniScan.	Éxito
3	Calibrar el MiniScan.	Calibrar el MiniScan, utilizando una trampa de luz y una cerámica blanca.	Éxito
4	Realizar una medición.	Realizar una medición con el MiniScan.	Éxito
5	Consultar resultados.	Consultar los resultados de una medición realizada.	Éxito
6	Borrar resultados.	Borrar los resultados obtenidos de una medición realizada.	Éxito
7	Iniciar sesión.	Iniciar la sesión de usuario.	Éxito
8	Consultar usuario.	Consultar los datos personales del usuario.	Éxito
9	Modificar usuario.	Modificar los datos personales del usuario.	Éxito
10	Cerrar sesión.	Cerrar la sesión de usuario.	Éxito
11	Consultar historia.	Consultar los datos de la historia médica de un paciente.	Éxito
12	Cerrar historia.	Cerrar la historia médica de un paciente.	Éxito
13	Consultar muestra.	Consultar los datos de una muestra perteneciente a una historia.	Éxito
14	Exportar muestra.	Exportar los datos de una muestra a un archivo portátil.	Éxito
15	Cerrar muestra.	Cerrar una muestra perteneciente a una historia.	Éxito

**Comentarios y observaciones:**

No aplica.

**Elaborado por:** Aarón Muñoz.

**Fecha:** 20 de octubre, 2015.

**Anexo F: Constancias de pruebas de aceptación**

**Constancia de prueba de aceptación**

Por medio de la presente, se hace constar que el cliente Aarón Muñoz, luego de una reunión realizada el 20 de octubre de 2015, donde se presentaron y probaron las diferentes funcionalidades del software Spectrasoft, ha manifestado su satisfacción y ha aceptado su producto. En virtud de lo cual, firma la presente constancia de aceptación, junto con el desarrollador.



Cliente  
14247340



Desarrollador

Constancia de prueba de aceptación

Por medio de la presente, se hace constar que el cliente Sandra Vivas, luego de una reunión realizada el 20 de octubre de 2015, donde se presentaron y probaron las diferentes funcionalidades del software Spectrasoft, ha manifestado su satisfacción y ha aceptado su producto. En virtud de lo cual, firma la presente constancia de aceptación, junto con el desarrollador.



Sandra Vivas  
Cliente



Juan Pérez  
Desarrollador

Observación: agradezco altamente la disponibilidad de uso.

**Anexo G: Pruebas de usabilidad: Evaluación heurística**

**Prueba de evaluación heurística para la usabilidad del software**

**Facilidad para entender el software**

Ítem	Aspecto	Puntuación		
		0	0.5	1
1	Hace hincapié en las tareas de mayor prioridad, de forma que los usuarios tengan un punto de referencia claro en la vista principal.			•
2	Muestra el nombre y/o logotipo del software en una ubicación relevante.	•		
3	La vista principal se diferencia claramente de todas las demás vistas del software.			•
4	Proporciona un mecanismo de «información» o «contáctenos», el cual especifica la finalidad del software.	•		
5	Se utiliza un lenguaje dirigido al usuario. Etiqueta las secciones y las categorías en función al valor que tienen para el cliente y no en función del servicio que prestan dentro de la institución.			•
6	Utiliza correctamente las mayúsculas y otras reglas de estilo.			•
7	Se utiliza un lenguaje imperativo como «Introduzca una ciudad o código postal» sólo para las tareas obligatorias.	•		
8	Los signos de exclamación se utilizan muy poco.			•
9	No aparecen instrucciones genéricas, como «haga click aquí», como nombre de una opción.	•		
10	El título de la ventanas empieza por una palabra que transmite información.			•
11	Los títulos de las ventanas tienen entre 6 y 8 palabras, o menos de 64 caracteres.			•
12	La respuesta del software es predecible antes de hacer click sobre una opción.			•
13	Cuando se produce un error, se informa de forma clara y no alarmista al usuario de lo ocurrido.			•
		Sub-total:	0	4
				9

**Facilidad para operar el software**

Ítem	Aspecto	Puntuación		
		0	0.5	1
14	Las opciones están agrupadas de tal forma que las opciones semejantes quedan juntas.			•
15	Se utilizan solamente iconos que ayudan a los usuarios a reconocer una clase de elementos de forma inmediata.			•
16	El área de navegación principal está situada en un lugar relevante, preferiblemente junto a la vista principal del software.		•	
17	No incluye múltiples áreas de navegación para los mismos tipos de opciones.			•
18	Puede habilitar búsquedas sencillas, con la posibilidad de búsquedas avanzadas.			•
19	Se ofrece a los usuarios un acceso directo a tareas de alta prioridad en el software.		•	
Sub-total:		0	2	4

**Diseño atractivo**

Ítem	Aspecto	Puntuación		
		0	0.5	1
20	Los estilos de fuente y otros formatos de texto, como los tamaños, los colores, etc., en el software, son sencillos.		•	
21	Los elementos más importantes de la vista principal son visibles «en su totalidad», sin necesidad de realizar un desplazamiento.			•
22	Se utilizan pocos logotipos.			•
23	Se utilizan las gráficas e imágenes para mostrar el contenido real y no sólo para decorar el software.			•
24	Se etiquetan las gráficas e imágenes al no quedar claras en el contexto que las acompaña.		•	
25	Se muestran las gráficas e imágenes ajustándolas al tamaño adecuado para su visualización.		•	
26	La imagen del logotipo del software se muestra de forma estática.			•
27	Se tienen pocas animaciones.			•
28	Se evita utilizar imágenes de fondo para colocarles texto encima.			•
29	Se mantiene una coherencia y uniformidad en las estructuras y colores de todas las vistas del software.		•	
30	La interfaz del software es limpia, sin causar ruido visual.			•
31	Se hace un uso correcto del espacio visual de la interfaz del software.			•
Sub-total:		0	4	8

	<b>Resultados</b>
<b>Total:</b>	26
<b>Cantidad de ítems aplicables:</b>	31
<b>Total dividido entre ítems:</b>	0.8387
<b>Resultado multiplicado por 100:</b>	83.87 %

Escala [100 %, 90 %] → excelente

Escala (90 %, 80 %] → bueno

Escala (80 %, 50 %] → deficiente

Escala (50 %, 0 %] → malo

**Resultado:** Bueno.

**Comentarios y observaciones:**

No aplica.

**Elaborado por:** Sandra Vivas.

**Fecha:** 20 de octubre, 2015.

**Prueba de evaluación heurística para la usabilidad del software****Facilidad para entender el software**

<b>Ítem</b>	<b>Aspecto</b>	<b>Puntuación</b>		
		<b>0</b>	<b>0.5</b>	<b>1</b>
1	Hace hincapié en las tareas de mayor prioridad, de forma que los usuarios tengan un punto de referencia claro en la vista principal.			•
2	Muestra el nombre y/o logotipo del software en una ubicación relevante.			•
3	La vista principal se diferencia claramente de todas las demás vistas del software.			•
4	Proporciona un mecanismo de «información» o «contáctenos», el cual especifica la finalidad del software.	•		
5	Se utiliza un lenguaje dirigido al usuario. Etiqueta las secciones y las categorías en función al valor que tienen para el cliente y no en función del servicio que prestan dentro de la institución.			•
6	Utiliza correctamente las mayúsculas y otras reglas de estilo.			•
7	Se utiliza un lenguaje imperativo como «Introduzca una ciudad o código postal» sólo para las tareas obligatorias.			•
8	Los signos de exclamación se utilizan muy poco.		•	
9	No aparecen instrucciones genéricas, como «haga click aquí», como nombre de una opción.			•
10	El título de la ventanas empieza por una palabra que transmite información.			•
11	Los títulos de las ventanas tienen entre 6 y 8 palabras, o menos de 64 caracteres.			•
12	La respuesta del software es predecible antes de hacer click sobre una opción.	•		
13	Cuando se produce un error, se informa de forma clara y no alarmista al usuario de lo ocurrido.			•
Sub-total:		0	3	10

**Facilidad para operar el software**

Ítem	Aspecto	Puntuación		
		0	0.5	1
14	Las opciones están agrupadas de tal forma que las opciones semejantes quedan juntas.			•
15	Se utilizan solamente iconos que ayudan a los usuarios a reconocer una clase de elementos de forma inmediata.			•
16	El área de navegación principal está situada en un lugar relevante, preferiblemente junto a la vista principal del software.			•
17	No incluye múltiples áreas de navegación para los mismos tipos de opciones.	•		
18	Puede habilitar búsquedas sencillas, con la posibilidad de búsquedas avanzadas.			•
19	Se ofrece a los usuarios un acceso directo a tareas de alta prioridad en el software.			•
Sub-total:		0	1	5

**Diseño atractivo**

Ítem	Aspecto	Puntuación		
		0	0.5	1
20	Los estilos de fuente y otros formatos de texto, como los tamaños, los colores, etc., en el software, son sencillos.			•
21	Los elementos más importantes de la vista principal son visibles «en su totalidad», sin necesidad de realizar un desplazamiento.			•
22	Se utilizan pocos logotipos.			•
23	Se utilizan las gráficas e imágenes para mostrar el contenido real y no sólo para decorar el software.			•
24	Se etiquetan las gráficas e imágenes al no quedar claras en el contexto que las acompaña.			•
25	Se muestran las gráficas e imágenes ajustándolas al tamaño adecuado para su visualización.			•
26	La imagen del logotipo del software se muestra de forma estática.			•
27	Se tienen pocas animaciones.			•
28	Se evita utilizar imágenes de fondo para colocarles texto encima.			•
29	Se mantiene una coherencia y uniformidad en las estructuras y colores de todas las vistas del software.			•
30	La interfaz del software es limpia, sin causar ruido visual.			•
31	Se hace un uso correcto del espacio visual de la interfaz del software.			•
Sub-total:		0	0	12

	<b>Resultados</b>
<b>Total:</b>	29
<b>Cantidad de ítems aplicables:</b>	31
<b>Total dividido entre ítems:</b>	0.9354
<b>Resultado multiplicado por 100:</b>	93.54 %

Escala [100 %, 90 %] → excelente

Escala (90 %, 80 %] → bueno

Escala (80 %, 50 %] → deficiente

Escala (50 %, 0 %] → malo

**Resultado:** Excelente.

**Comentarios y observaciones:**

Agregar a las instituciones académicas en la ventana «acerca de», y cambiar el color del logotipo que aparece en la ventana principal, preferiblemente cuando el software se conecte con el MiniScan.

**Elaborado por:** Aarón Muñoz.

**Fecha:** 20 de octubre, 2015.

## Anexo H: Protocolo de respaldo y recuperación de la base de datos

El respaldo de los datos de la base de datos spectradb se debe realizar de forma semanal.

### Respaldar datos

En la aplicación pgAdmin, haga click con el botón derecho al esquema «spectradb» y seleccione la opción «Backup...» ( véase la figura 8.1).

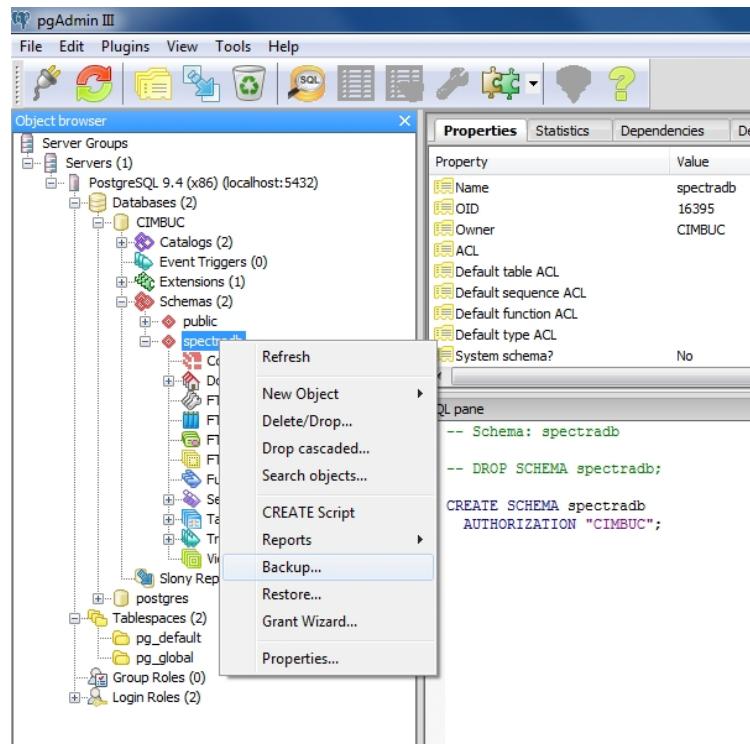


Figura 8.1: Opción de respaldo

Haga click en el botón «...», seleccione la ubicación y el nombre del archivo de respaldo (véase la figura 8.2).

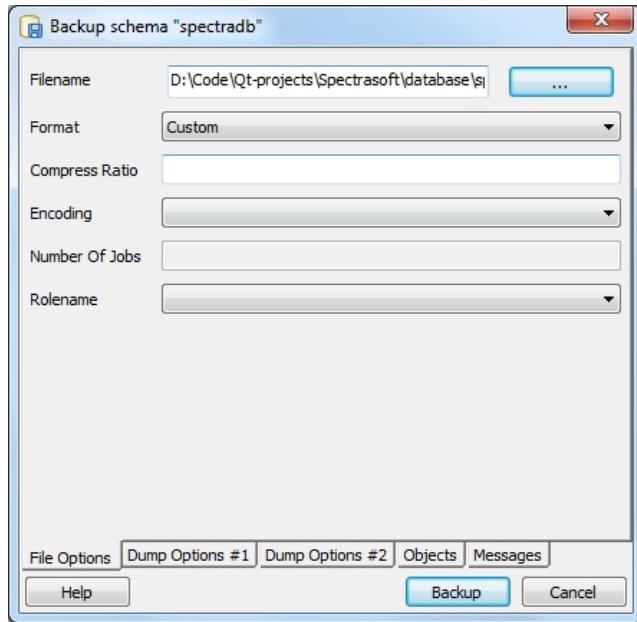


Figura 8.2: Archivo de respaldo

En la pestaña «Dump Options #1», seleccione únicamente la opción «Data», y por último haga click en el botón «Backup» (véase la figura 8.3). restaurar

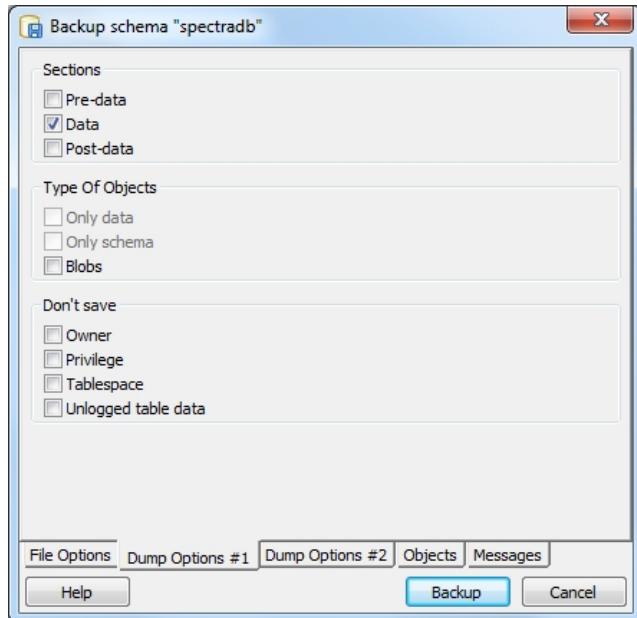


Figura 8.3: Respaldar datos

restaurar

## Restaurar datos

En la aplicación pgAdmin, haga click con el botón derecho al esquema «spectradb» y seleccione la opción «Restore...» ( véase la figura 8.4).

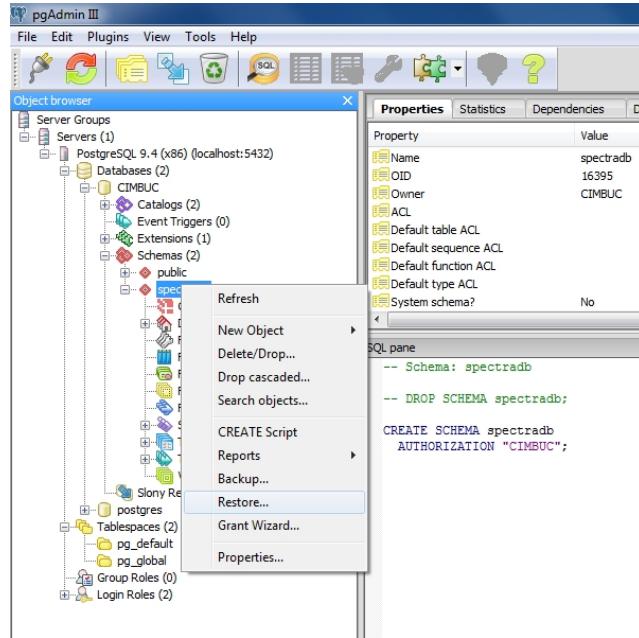


Figura 8.4: Opción de restauración

Haga click en el botón «...», ubique y seleccione el nombre del archivo de respaldo (véase la figura 8.5).

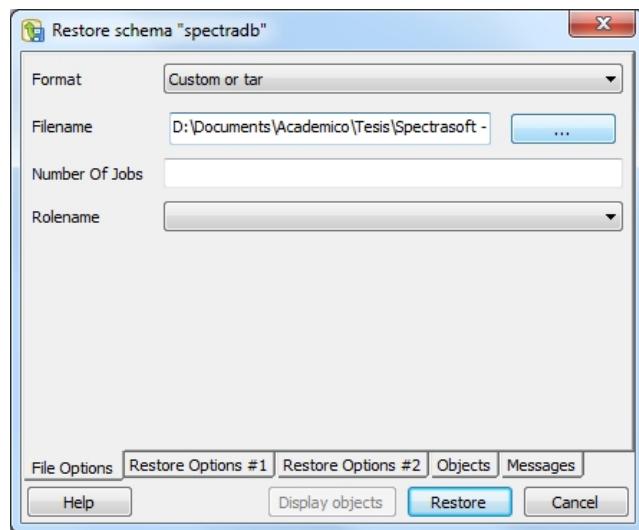


Figura 8.5: Archivo de respaldo

En la pestaña «Restore Options #1», seleccione únicamente la opción «Data», y por último haga click en el botón «Restore» (véase la figura 8.6).

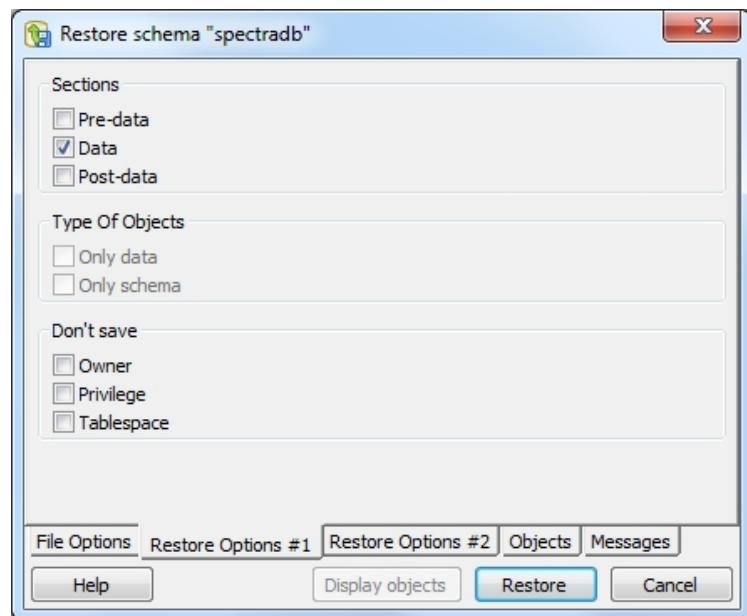


Figura 8.6: Restaurar datos